



# STARTER 2100 /3C Pro

通用实验室pH计



## 简单明了，轻松实验

😊 STARTER2100是一款操作上非常简单的产品，产品质量可靠，达到0.01pH精度的测量，是您最为经济的选择。

针对一般客户的最常用功能，STARTER2100做了优化设计，保证操作最为容易简单；同时具备很多实用功能，保障测量的精准度与便捷。

### 简洁的界面与操作

- STARTER2100最大程度的简化了显示与按键，让您无需说明书即可自学自用，自带的快速操作指南帮助您使用。
- 缓冲液自动识别，自动或手动温度补偿让操作更简便。

### 实用的显示与支架


- 85mm\*60mm的大液晶屏显示，非常清晰明了。
- 独立支架易于安装，可任意放置，稳定灵活，电极导线易于梳理，可放置电极保护瓶。

### 精准的校准与测量


- 本表测量精度高，为0.01pH精度。
- 电极的校准是准确测量的关键，仪表会根据校准数据给出电极状态信息😊 😐 😞，帮助随时了解电极性能。

### 可靠的性能与质控


- 仪表通过了计量的相关检测(CMC)，电磁兼容性测试等。高低温环境实验保障了在不同环境下使用的可靠性。
- 历经百年的质量体系保障了质量的长期稳定。

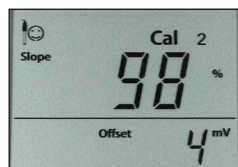

长按 **校准/校准** 即回显最后校准数据

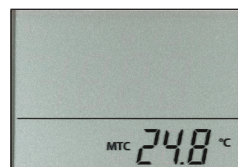

短按 **温度** 即可设置温度(MTC)

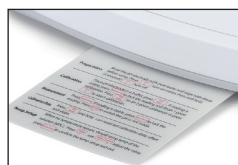

快速操作指南



# STARTER 2100 /3C Pro 通用实验室pH计

## 实验室pH计 STARTER 2100 计量技术参数指标:

计量技术参数	电子单元测量范围: (0.00~14.00) pH 测量范围: (0~14) pH, (-1999~1999) mV 仪器级别: 0.01级
--------	--

## 实验室pH计 STARTER 2100其它指标:

电子测量范围	0.00...14.00 pH -1999...1999 mV 0°C...100°C
分辨率	0.01 pH 1 mV 0.1°C
准确度	± 0.01 pH ± 1 mV ± 0.5°C
缓冲液组	1组 (4.00; 6.86; 9.18)
校准	2点
存储	最近一次校准数据 (零电位与斜率)
电源	110-240V/50Hz, DC 12V
尺寸/重量	约 220 W x 175 D x 78 H mm / 0.75 kg
显示器	液晶
输入	BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω Cinch, NTC 30 kΩ
参比电极输入	2mm 香蕉插座
温度补偿	ATC & MTC
外壳	ABS

## 选件:

订货号	描述
80252529	pH电极 ST310, 三合一塑壳可充液, 适用于常规澄清液
80252530	pH电极 ST210, 二合一塑壳可充液, 适用于常规澄清液
83033017	pH电极 ST230, 二合一玻璃可充液, 适用于浑浊液等
83032960	pH电极 STPURE, 二合一玻璃可充液, 适用于自来水, 蒸馏水等
83032961	pH电极 ST320, 三合一塑壳凝胶免充液, 适用于常规澄清液
83032959	温度电极 STTEMP30, 热敏电阻为NTC 30 kΩ
30038552	ORP电极 STORP2, 玻璃杆铂圈可充液, 适用样品范围广
30038554	ORP电极 STOPR1, 塑料杆铂片凝胶免充液, 适用一般样品
80252531	缓冲液粉剂套件(4.00;6.86;9.18), 各3小袋, 每袋可配250ml溶液
30042005	缓冲液pH4.00, 瓶装500ml
30042006	缓冲液pH6.86, 瓶装500ml
30042007	缓冲液pH9.18, 瓶装500ml
30058733	独立电极支架

## 订货信息/订货号/标准配置

实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro-B 订货号: 30067630

- STARTER 2100 主机仪表
- 12V DC 电源
- 独立电极支架

实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro 订货号: 30067631

- STARTER 2100 主机仪表
- 12V DC 电源
- 独立电极支架
- pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)
- ST210 二合一可充液电极

实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro-F 订货号: 30067632

- STARTER 2100 主机仪表
- 12V DC 电源
- 独立电极支架
- pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)
- ST210 二合一可充液电极
- STTEMP30 独立温度电极



瓶装pH缓冲液



独立电极支架



多种STARTER系列电极可选



仪表接口

奥豪斯仪器 Ohaus Instruments

地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼

邮编: 200233

电话: (021)64855408

传真: (021)64859748

http://www.ohaus.com

客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com

售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188

Customer Center

感谢您选择奥豪斯电化学产品! 精准, 不仅是天平。

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。

30066899 Printed in P.R. China 2012/11

