




DC-12 型 氮吹仪

DC-12系列氮吹仪, 用于试验样品的浓缩预处理。该装置具操作简单、灵活, **一次可处理多达12个样品**, 气体流量可调, 可适用多种试样收集容器。不锈钢针可更换, 方便操作、维护。

应用领域

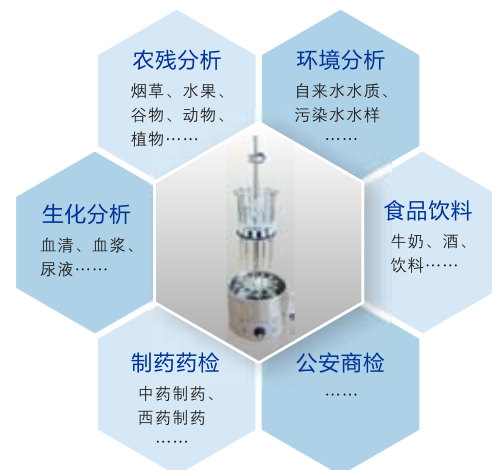

仪器的主要技术指标和规格

- (1) 样品位数: 12位
- (2) 样品试管尺寸: $\Phi 10-29\text{mm}$
- (3) 外形尺寸: $\Phi 210\text{mm} \times 780\text{mm}$
- (4) 气体流量控制范围: $0.1 \sim 1\text{m}^3/\text{h}$ ($2 \sim 16\text{L}/\text{min}$)
- (5) 气体输入压力范围: 小于 0.2MPa

产品特点:

1 圆形结构, 转动自如, 操作简便, 结构合理。



2 12位镂空数字编号样品架, 可升降, 配备不锈钢弹簧圈夹。



3 圆形的分配系统, 导气管可自由升降, 并配有氮气流量微量调节针型阀。

4 适用试样收集容器: 口径 $10 \sim 29\text{mm}$ 的试管、离心管、锥形瓶, 样品容量 $1 \sim 50\text{ml}$ 。



5 100mm 不锈钢或玻璃导气管。

6 圆形恒温水浴, 加热平缓, 室温 ~ 90 度可控。

7 气体通过固定于水浴系统的可调流量计到达气体分配系统, 经导气管吹向样品试液表面, 使溶剂快速蒸发。

8 与国产同类铝制产品相比较: 所用主体材料为**不锈钢**, 耐腐蚀性强, 历久弥新, 美观大方; 各关键部件均选用惰性材质及相应处理 (**不锈钢**、**聚四氟乙烯**、**镀镍铬黄铜**、**阳极化铝**、**高纯度硅胶管及硼硅酸盐玻璃**) 从而避免对试样造成二次污染; 微量调节针型阀可轻松掌控各样品位氮气流量。

9 可另配巴斯德转接口, 将不锈钢针更换成巴斯德吸管。



货号	产品描述	报价(¥)
EFAA-DC12	12位水浴型氮吹仪 (含水浴加热系统)、不锈钢导气管	5800.00
EFAA-DC12U-12	DC-12系列氮吹仪用巴斯德转接口, 12个/包	600.00
SGCR-4-100-150-250	WITEG短型玻璃巴斯德吸管, 总长 150mm , 吸嘴 50mm , 250个/箱	105.00

本资料中价格为参考报价, 具体价格请咨询业务员, 如有变动, 恕不另行通知。



安谱总部 地址: 上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层

网址: www.anpel.com.cn

Tel: 021-54890099

Fax: 021-54248311

北京办事处

Tel: 010-83130651

Fax: 010-83130098

广州办事处

Tel: 020-38811673/31

Fax: 020-38811577

深圳办事处

Tel: 0755-26075073

Fax: 0755-26075056

武汉办事处

Tel: 027-87250176

Fax: 027-51164236

青岛办事处

Tel: 0532-80829481/2

Fax: 0532-80829482

成都办事处

Tel: 028-85254001/2

Fax: 028-85254003

南京办事处

Tel: 025-83737312 / 83716726

Fax: 025-83701408