

SBH130

模拟式干浴器

设计用于试管、微型离心机试管,比色皿和微孔板的精确加热,单一模拟式设定温度,使用方便。加热块温度超过50℃,“HOT”过温警示灯就会闪烁。

技术参数

温度范围	室温+8℃ ~ 130℃
温度稳定性 (37℃)	±0.1℃
温度均一性 (37℃)	±0.1℃
温度均一性 (130℃)	±1℃
外形尺寸 (宽×深×高)	235×280×115mm
净重(不含加热块)	2.1 kg
功率	300W
供电要求	230V, 50Hz
IP等级	31

特点

- 模拟温控, 经济实用
- 最高使用温度130℃
- “HOT”指示灯闪烁警示时, 加热块过热不能触碰
- 良好的温度稳定性和均一性



SBH130

订货信息

产品型号	产品描述
SBH130	模拟式干浴器, 2个加热块, 130℃




SBH130

SBH130 和 SBH/2保护盖

铝块

与Stuart®干浴器配套使用

每个加热器都需要配铝块。所有的铝块都是由阳极氧化铝制成，都拥有一个独立的孔放温度计。为了获得准确的温度测量值，请确保温度计插入的深度合适。每块铝块的规格（宽×深×高）：75×95×50mm，可根据需要不同组合。请注意，只有在加热铝块配备齐全时，Stuart®干浴器才可有效使用。

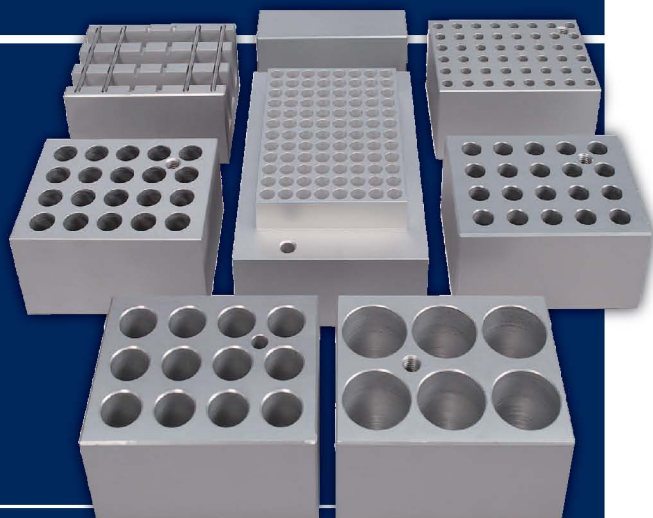

技术参数/订货信息

订货编号	管子 (直径/类型)	孔数	孔尺寸 (直径×深)
SHT1/0	平块	—	—
SHT1/10	10mm	20	10.5×47mm
SHT1/12	12mm	20	12.6×47mm
SHT1/12/33	12mm	20	12.6×33mm
SHT1/13	13mm	20	13.5×47mm
SHT1/16	16mm	12	16.5×47mm
SHT1/19	19mm	8	19.5×47mm
SHT1/20	2ml管	20	10.5×33mm
SHT1/21	用于玻璃比色皿或一次性比色皿，长度可调适应不同光程。		
SHT1/22	1.5ml管	20	10.7×35mm,9° 锥形
SHT1/25	25mm	6	25.5×47mm
SHT1/28	28mm	6	28.0×47mm
SHT1/30	0.5ml管	30	7.8mm,9° 锥形
SHT1/30/1	30mm	4	30.1×47mm
SHT1/33	33mm	4	33.2×47mm
SHT1/48	0.2ml管	48	6.1mm,9° 锥形
SHT1/80	0.2ml条带管	10×8	—
SHT1/96	96孔板	—	7.5mm,9° 锥形
SHT1/384	384孔板	—	3.6mm,9° 锥形

注：SHT/96和 SHT/384 (150×95×61mm) 除外

安全保护盖

与Stuart®干浴器配套使用

坚固的Perspex®安全保护盖与Stuart®干浴器配套使用。安装方便简单，无需使用工具。可防止试管的爆溅，保护操作者的安全，同时可增加温度的稳定性。SBH安全保护盖只允许需加热的管子高出加热块80mm。

订货信息

产品型号	产品描述
SBH/2	安全保护盖，用于2块加热块机型
SBH/3	安全保护盖，用于3块加热块机型和双温控制型



SBH/2
和 SBH130