



**Thermo Scientific Sorvall
Legend Micro 17 & 21 微量离心机**

Small instrument, big impact

Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 & 21



Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 & 21 微量离心机结合了强大的离心性能、优异的离心多用性和良好的人机工效设计。其结构精巧、使用方便，同时兼具卓越的产品安全性。Legend Micro 17 & 21 微量离心机具有通风型和冷冻型型号，可为您的微量样品提供快速、有效的分离。

无碳刷感应电机实现宁静、无震动运转；流线型的外观、体积小、重量轻；操作面板直观、独特的ClickSeal自锁式转头盖，上述特点使得Legend Micro 17 & 21 成为一款真正好用的微量离心机，是各类分子生物学、医学实验室理想的离心工具。

高效率 多功能 安全便捷

Legend Micro 微量台式离心机系列可以选择17,000xg和21,000xg两种离心力规格— Sorvall® Legend Micro 17 适合通用的分子生物学离心应用；Sorvall® Legend Micro 21 适合高级研究应用，可减少20%的离心时间。丰富的转头选择，可以满足分子生物学不同的微量离心实验对转速和离心容器的要求。

- ▶ 标准的24孔转头可用于所有1.5到2.0 ml离心管，包括微量制备管；
- ▶ 独特的双排管转头可以同时处理18×1.5/2.0 ml和18×0.5 ml离心管，不必使用适配器，节约时间，方便操作；
- ▶ 另外还有36×0.5 ml转头、PCR条板转头、血比容转头适合处理0.5ml & 0.2 ml PCR管及血比容毛细管等。

更快的加/减速速率，意味着在更短的时间内分离更多的样品

独特的ClickSeal® 防生物污染转头，安装转头操作方便简单，通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全

转头可高温灭菌；透明转头盖方便观察离心结果，提高使用的安全性及方便性

运行安静、噪音小(通风型<56 dBA，冷冻型<50 dBA)

直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单

机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理





Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 & 21 转头及配件

产品描述	转头 离心容量	离心管 规格	最高* 转速	最大* RCF	货号
24 x 1.5/2.0 ml 转头, 带 ClickSeal 防生物污染转头盖	24x1.5/2	11x50	14,800	21,100	75003424
0.5/0.6 ml 微量离心管适配器, 24个/包装	24x0.6/0.5	7x32	14,800	21,100	76003758
0.25/0.4 ml 微量离心管适配器, 24个/包装	24x0.4/0.25	6x24	14,800	21,100	76003759
0.2 ml PCR 微量离心管适配器, 24个/包装	24x0.2	6x24	14,800	21,100	76003750
36 x 0.5 ml 转头, 带旋口盖	36x0.5	7x32	14,800	19,300	75003436
双排管 18 x 2.0/0.5 ml 转头, 带旋口盖	18x2/18x0.5	11x50	14,800	20,800	75003418
8 x 8 PCR 八联管转头, 带旋口盖	64x0.2	6x24	14,800	17,100	75003489
4 x 8 PCR 八联管转头, 带 ClickSeal 防生物污染转头盖	32x0.2	6x24	14,800	16,200	75003440
血比容转头	24 X毛细 采血管		14,800	16,800	75003473

*Legend Micro 21系列的参数

备用转头盖	货号
ClickSeal 防生物污染密封盖*	75003410
ClickSeal 密封盖备用O型密封圈	75003405
旋口盖**	75003406

*用于 75003424 & 75003440 转头

**用于 75003436、75003489 & 75003418 转头



▶ 24 x 1.5/2.0 ml 转头, 带 ClickSeal 防生物污染转头盖




▶ 36 x 0.5 ml 转头, 带旋口盖



▶ 双排管 18 x 2.0/0.5 ml 转头, 带旋口盖



▶ 8 x 8 PCR 八联管转头, 带旋口盖

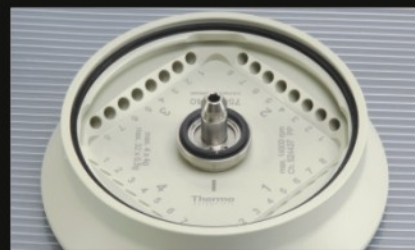

▶ 4 x 8 PCR 八联管转头, 带 ClickSeal 防生物污染转头盖



▶ 血比容转头



Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 & 21系列微量离心机

技术参数	Legend Micro 17	Legend Micro 21
最大 RCF	17,000 x g	21,100 x g
最高转速	13,300 rpm	14,800 rpm
噪音	56 dBA (通风型), 50 dBA (冷冻型)	
时间设置	1-99 分钟, 1分钟递增; 快速离心或连续离心	
温度设置*	-9 °C 到 +40 °C, 1 °C 递增	
规格尺寸, H x W x D		
Legend Micro 17/21	225 x 243 x 352 mm	
Legend Micro 17R/21R	330 x 295 x 445 mm	

订货信息	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
	Legend Micro 17	Legend Micro 17R
Legend Micro 微量离心机, 包括 24 x 1.5/2.0 ml 转头及 ClickSeal 防生物污染密封盖	75002430	75002440
Legend 微量离心机, 包括血比容转头	75002493	N/A
	Legend Micro 21	Legend Micro 21R
Legend Micro 微量离心机, 包括 24 x 1.5/2.0 ml 转头及 ClickSeal 防生物污染密封盖	75002435	75002445
Legend Micro 微量离心机, 包括 24 x 1.5/2.0 ml 转头和 ClickSeal 防生物污染密封盖, 以及双排管转头	75002487	75002489

赛默飞世尔科技

上海
上海浦东新区新金桥路27号
6号楼
电话: 86-21-68654588
传真: 86-21-64457830

北京
北京安定门东大街28号雍和大厦
西楼7层702-715室
电话: 86-10-84193588
传真: 86-10-84193583

广州
广州东风中路410-412号
健力宝大厦3003-3004室
电话: 86-20-83487138
传真: 86-20-83486621

www.thermo.com
www.thermo.com.cn (中文)
800-810-5118