



## IVS600-2S / IVS600-2

### 自动粘度测量系统

—— 开启乌氏粘度测试新篇章

# IVS600-2S




## 技术参数

控温范围	5°C ~ 65°C
浴槽控温精度	±0.01°C
计量精度	±0.01S
进样盘	手动和自动可选
测量位数	2位和4位可选
粘度测量范围	0.35~5000mm <sup>2</sup> /S




发明专利：中旺Z型乌氏粘度计  
从此告别手工清洗粘度计

# IVS600-2

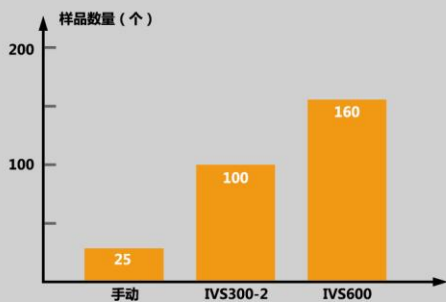

一名操作人员10小时可以处理样品量

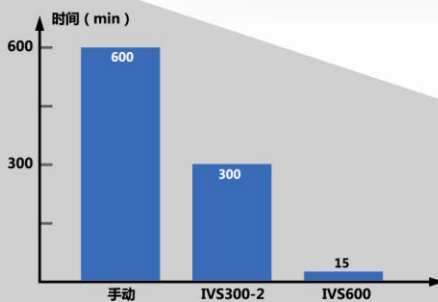

操作人员实际操作时间

## 优势特点

### 适用材料

PET	聚对苯二甲酸乙二醇酯
PBT	聚对苯二甲酸丁二醇酯
PA	聚酰胺(尼龙)
PAM	聚丙烯酰胺
PC	聚碳酸酯
PVC	聚氯乙烯
TP	热塑性均聚、共聚型聚酯
PCT	聚对苯二甲酸环乙烯二亚甲基醇酯
PEN	聚萘二甲酸乙二醇酯
PAN	聚丙烯晴
PS	聚苯乙烯
PMMA	聚甲基丙烯酸甲酯
PIB	聚异丁烯
PSU	聚砜
PLA	聚乳酸酯
SAN	苯乙烯/丙烯晴共聚物
SB	苯乙烯/丁二烯共聚物
TPU	热塑塑料聚氨基甲酸酯/聚氨酯
CA	乙酯纤维素
Chitin	甲壳素
.....	

#### 1、告别手工清洗

避免接触化学试剂，安全且大幅降低劳动强度

#### 2、无须拆装乌氏粘度计

因此几乎不会造成粘度计人为损坏，大幅减少耗材，同时避免因粘度计断在浴槽中必须换水等繁琐操作

#### 3、连续测试


只需放入样品，即可完成连续测试，解放操作人员，节省时间。

#### 4、多功能

1) 能完成运动粘度、动力粘度、相对粘度、比浓粘度、粘数及特性粘度、粘均分子量等测试，内置所有的粘度计算公式，方便用户使用；

2) 能轻松完成串行外推法，IVS600-4更可完成平行外推法；

3) 具有数据统计功能，可分析样品的变化趋势，为控制产品质量提供依据。

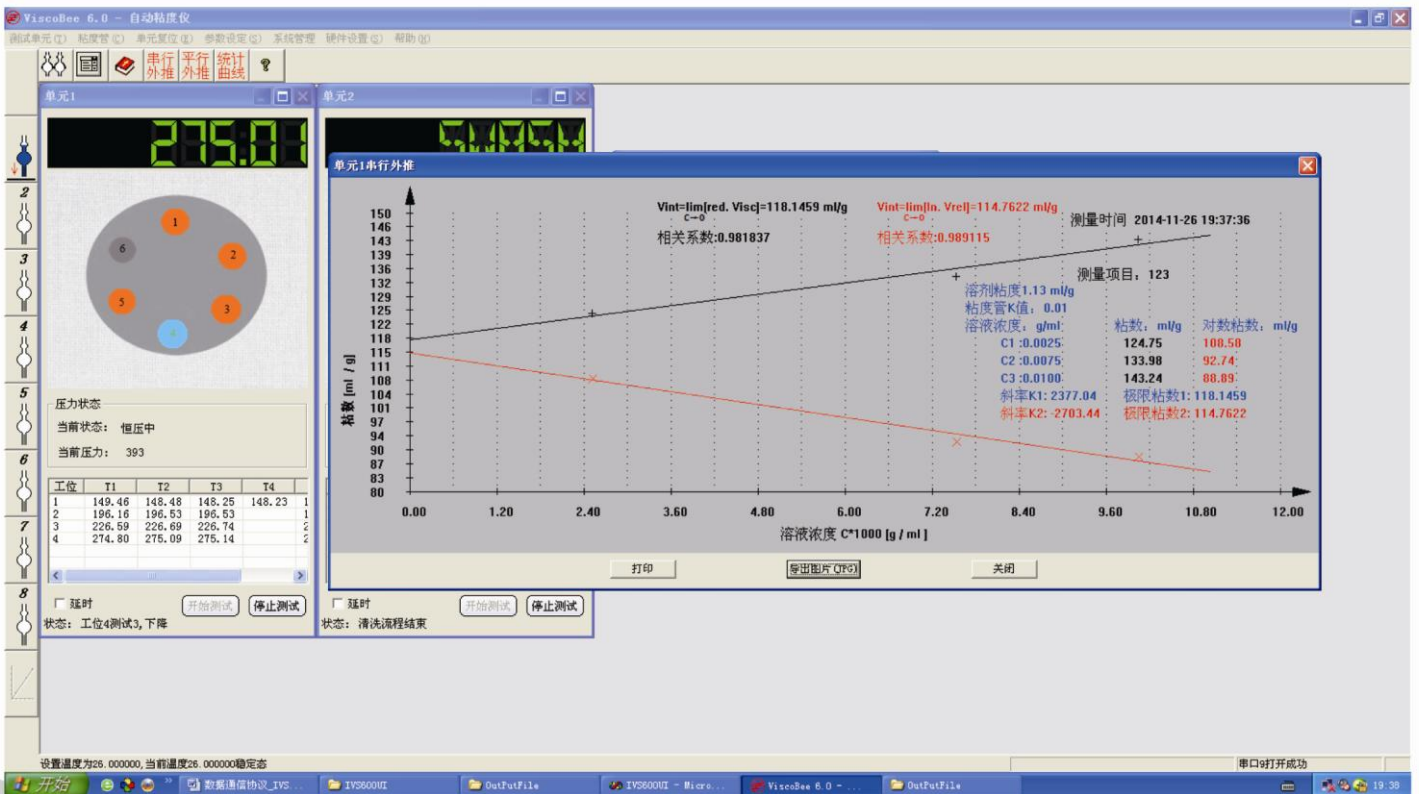

# 为客户打造最智能快捷的粘度测试实验室！

————— 移液配液 >> 恒温溶样 >> 粘度测量 —————

## DP25 移液配液器

安全——避免接触危险试剂  
通用——适合常规量的移液、配液  
快捷——简单操作，对实验人员无要求  
精确——可靠移液，精度高达0.1%  
多功能——可连续移液，可与天平连接  
实现自动配液

## P12恒温溶样器

专为多样品溶样一致性设计  
恒温金属浴，室温-150°C溶样  
孔间最大温差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$   
定时功能，溶样完成后自动提醒

## 粘度测量系统自动

全自动——自动进样、自动测量、自动清洗粘度管  
安全——测试及清洗过程不接触化学试剂  
省时——粘度管清洗时间缩短，可快速进入下一个样品的测量，因此样品分析量大大提升  
实验结果具有良好的重复性和可比性



All For Your Lab



杭州中旺科技有限公司

电话：0571--85285152 85285153

传真：0571--85285191

地址：杭州市文一西路998号海创园19幢4层

网址：www.zonwon.com