

流速范围

超低	低	中等	高
0.0075 mL/min 至 13 LPM			




可堆叠，节省空间的设计

这些经济型泵包括预装配的泵头，便于简单安装和操作。用一个开关即可启动、停止和反向流动。外壳设有可倾斜的速度控制显示屏，方便用户读取。“A”、“B”和“C”型号具有自定心的凸辊，可以延长管道寿命，并缓和地作用于流体，是输送含有细胞培养基介质的理想选择。不锈钢外壳持久耐用。四个稳定脚支架可以将两个驱动器堆叠起来。泵随机附转子，使用壁厚为1.6或2.4 mm的管道。

随机配备：可拆卸的6-ft (1.8-m) 带插头电源线。

A-C 单通道泵

按键速度控制以1% rpm为步进。凸辊确保自动定心，最大限度地减少了管道磨损。通过模拟输入信号 (0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-20 mA 或 4-20 mA) 远程控制驱动器速度；通过触点闭合 (8-针 DIN) 启动/停止驱动器或反向输送。可使用您现有设备的输入信号来启动驱动器。

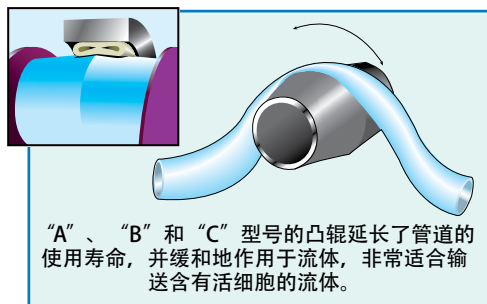

D Masterflex® Easy-Load® 泵

容易进入泵头，可以快速更换管道。泵头有聚砜外壳和不锈钢的转子。有关 Masterflex® 泵管的全系列产品，请参见第 38 - 43 页。

E 迷你卡盘泵


具有8通道或4通道迷你卡盘泵头。弹簧承载盒（随附）无需调整即可在任何时候提供最佳的咬合。（订购带咬合调节功能的承载盒来改变每个通道的压力。）6辊头和12辊头确保低脉冲和一致的流量。通过模拟输入信号 (0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-20 mA 或 4-20 mA) 远程控制驱动器速度；通过触点闭合 (8-针 DIN) 启动/停止驱动器或反向输送。可使用您现有设备的输入信号来启动驱动器。



B
单通道三辊泵
78022-20



有关泵 A、B 和 C，请参见第 124 页。

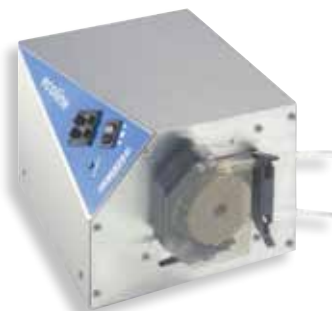

C
单通道泵
78022-30



D
Easy-Load
泵 78022-50



请参见第 38 - 43 页



E
迷你卡盘泵
78022-40



泵的后视图



请参见第 123 页

规格

工作周期：连续

ISO9001:2008

经认证的供应商

CE 2 年保修期

图例	目录号	每通道流速	通道	速度	轧辊	管道	尺寸 (宽x高x深)	电源 (50/60 Hz)
单通道泵								
A	UV-78022-10	1.7-5400 mL/min			2	泵	6 1/2" x 5 1/2" x 9 1/2"	115/230 VAC
B	UV-78022-20	1.6-5000 mL/min	1	3.5-350 rpm	3	(第 124 页)	(16.5 x 14.0 x 24.1 cm)	
C	UV-78022-30	0.25-1300 mL/min			3			
Easy-Load 泵								
D	UV-78022-50	0.23-1600 mL/min	1	3.5-350 rpm	3	Masterflex® (第 38 - 43 页)	6 1/2" x 5 1/2" x 12" (16.5 x 14.0 x 30.5 cm)	115/230 VAC
迷你卡盘泵								
E	UV-78022-40	0.01-130 mL/min	8	3.5-350 rpm	6	三段式 (第 123 页)	6 1/2" x 5 1/2" x 12" (16.5 x 14.0 x 30.5 cm)	115/230 VAC
	UV-78022-60	0.0075-75 mL/min	4		12			

UV-07624-64 带咬合调节功能的迷你卡盘

UV-78016-98 备用 Click' n' go™ 迷你卡盘

UV-07610-25 脚踏开关，瞬时接触开关