

更卓越!

<http://www.metrohmchina.cn>



OMNIS

奥秘一代 演绎全新境界



瑞士万通中国有限公司各地分公司、技术支援中心、维修服务中心:
Branch offices, Application Laboratories and Service Centers of Metrohm China Ltd. in China:

北京Beijing 北京市朝阳区科荟前街 一号院 5号楼 奥林佳泰大厦10层 邮编:100101 电话:010-65170006 传真:010-65179657	上海Shanghai 上海市金钟路658号 4号楼4层 邮编:200335 电话:021-62381166 传真:021-52161825	广州Guangzhou 广州市先烈中路80号 汇华商贸大厦2910 邮编:510070 电话:020-37617902 37617903 86132351 传真:020-37616051	成都Chengdu 成都市锦江区东大街 牛王庙段100号 成都商金大厦B座805 邮编:610021 电话:028-86132353 86132351 传真:028-86124640	香港Hong Kong 香港太吉坊华兰路20号 华兰中心805-808室 电话:+852 29676552 29670443 传真:+852 29670443
--	--	--	--	--

 **Metrohm**
瑞士万通中国

网址: <http://www.metrohm.com.cn>
<http://www.metrohm.com>
电邮: marketing@metrohm.com.cn



微信二维码

 **Metrohm**
瑞士万通中国

超乎想象!

OMNIS奥秘一代
能做什么?



OMNIS 奥秘一代——为您实验室提供高性能的电位滴定平台

面对实验室日常分析样品数量日益增加的挑战, OMNIS奥秘一代为您提供答案——实现您一直追求的功能和效果。

更快速

OMNIS奥秘一代可实现在一个系统上四个样品同时进行分析。

更安全

OMNIS 奥秘一代完全无需接触化学试剂, 并确保样品分析结果完整可追溯。

更简单

OMNIS 奥秘一代能够避免任何错误发生——软件简单易学, 实验室里的任何人都能够应用自如。

我们知道您的实验室所面临的挑战:

- 您必须在越来越紧迫的时间内分析数量不断增加的样品
- 您只有很短的时间来培训新员工学习使用复杂的仪器和软件
- 您不能允许错误发生——因为这关乎您实验结果的质量和员工的安全, 这不能有任何的妥协

这就是为什么我们研发了OMNIS奥秘一代!

样品测定速度快吗？


更快速！

样品吞吐量提升到一个全新高度

样品测定数量提高四倍

无与伦比的系统。OMNIS奥秘一代让您能够在同一时间、同一系统上进行四个样品的全自动电位滴定。这些同时进行的电位滴定分析可以是相同的或不同的测定项目——完全由您决定！

OMNIS奥秘一代使您的系统利用率达到最高：一旦发现系统中有空闲的工作位时，会自动触发下一个样品的分析——这一切完全自动实现，不需要额外设定！

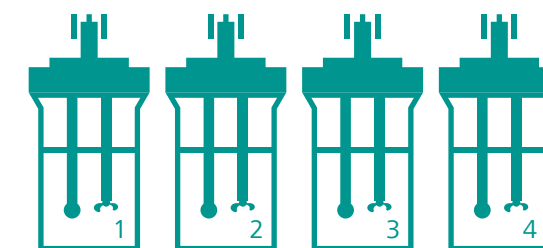

在同一套电位滴定系统上——四个样品同时进行分析



实验室的工作
如何进行?

更安全!

安全级别达到全新高度

3S适配器技术实现化学试剂免接触

拥有专利技术的3S适配器让您无需打开试剂瓶即可更换试剂，完全消除接触有害试剂的潜在危险。您可以选择带有证书的原装标准试剂，用户单手操作就可以快速完成3S 适配器与试剂瓶的连接。

此外，3S适配器确保试剂信息的识别清晰并准确无误。带有证书的原装标准试剂瓶盖内置RFID芯片，芯片记录了试剂生产厂家提供试剂的全部信息。一旦3S 适配器与瓶盖连接完成，试剂瓶密封膜自动损毁并将芯片上的信息载入到电位滴定系统中，避免任何错误的发生。

3S适配器技术

3S[®] 代表: Safe、Secure、Smart。

- 安全的化学试剂处理
- 可靠的试剂信息传输
- 智能的化学试剂连接

更安全的分析

拥有3S适配器技术的OMNIS奥秘一代样品分析结果完整可追溯，包括由试剂生产厂家提供的带有证书的原装标准试剂。不仅如此，OMNIS奥秘一代平台还能够自我监控——消除了所有可能发生的错误。这就意味着您能完全信任所得到的样品分析结果。



RFID射频识别技术确保所用试剂信息识别清晰无误，并确保样品分析所用试剂的信息完整可追溯。



您的实验室里谁
能做电位滴定？

每个人！

操作简单达到全新高度

任何人都能掌握的分析平台


OMNIS奥秘一代非常直观并易于使用，您已经掌握了几乎所有与它相关的应用。没有比它更简单的系统了：

- 用户界面完全图形化的分析平台
- 图标可拖放操作，简单直观
- 根据您的文本输入，用户界面只会显示与您的需求相关的信息，自动过滤不必要的內容，简化操作

用户向导全新维度

OMNIS 奥秘一代是我们的研发团队与真实的实验室用户经过数十年密切沟通的成果。根据他们的反馈，我们的系统内置了多项功能用来指导您建立实验分析方法，评估实验分析结果和管理数据。以下列举部分功能：

- 可视状态指示灯可显示所有系统组件是否正确配置和能否正常工作
- 方法逻辑可行性检查、系统检查，以及给出相应的建议方案
- 按您所需可自由编辑模板：方法、程序、命令和更直观的用户向导

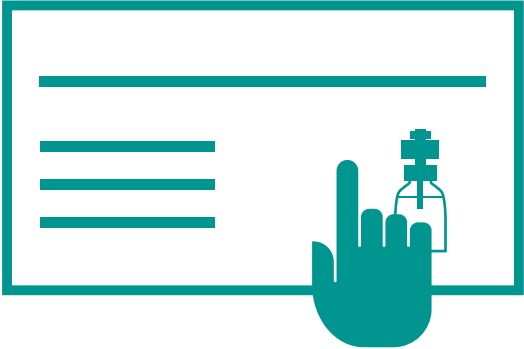

直观的用户向导



谁是您实验室里的
聚焦核心？

是我！

高效全新高度

聚焦于样品

OMNIS 奥秘一代终结了复杂和费力的分析。不管您对于样品有任何疑问，OMNIS 奥秘一代总能提供一目了然的答案——因为所有不同的应用测试项目结果都直接与其对应的样品关联在一起。

系统会高效地管理您的分析过程，从而提高分析效率。当OMNIS 奥秘一代确定系统有空闲工作位时，它会自动分配下一个分析任务到空闲的电位滴定仪或电位滴定模块。这意味着您能够在更短的时间内获得多的实验结果。

Name	batch	location	Nr.	Name
tap water	20150529	Herisau	1	pH & alkalinity
			2	Hardness
			3	Chloride
tap water	20150530	Gossau SG	4	pH & alkalinity
			5	Hardness
			6	Chloride
			7	Fluoride

在OMNIS 奥秘一代的软件中，所有分析项目结果都与样品直接关联。

您对未来有何期许？ 毫无压力！

没有限制的系统

OMNIS 奥秘一代分析平台是完全模块化的。这意味着您可以针对某个应用，从一套电位滴定仪和带有一个工作位的样品处理器开始配置。如果样品数量或分析项目种类增加了，您可以轻松的在原有配置上添加工作位、样品盘、测量输入模块、滴定管、搅拌器、泵等其他附件。


量身定制



OMNIS 奥秘一代的软件也是完全模块化的。针对您目前的需求可从简单的软件配置开始，当您有新的需求时，通过增加新的功能模块来扩展软件的应用范围。

使用OMNIS 奥秘一代，您永远是与时俱进的。因为瑞士万通所有的分析技术都将汇总到OMNIS 奥秘一代操作平台。

多通道全自动分析系统

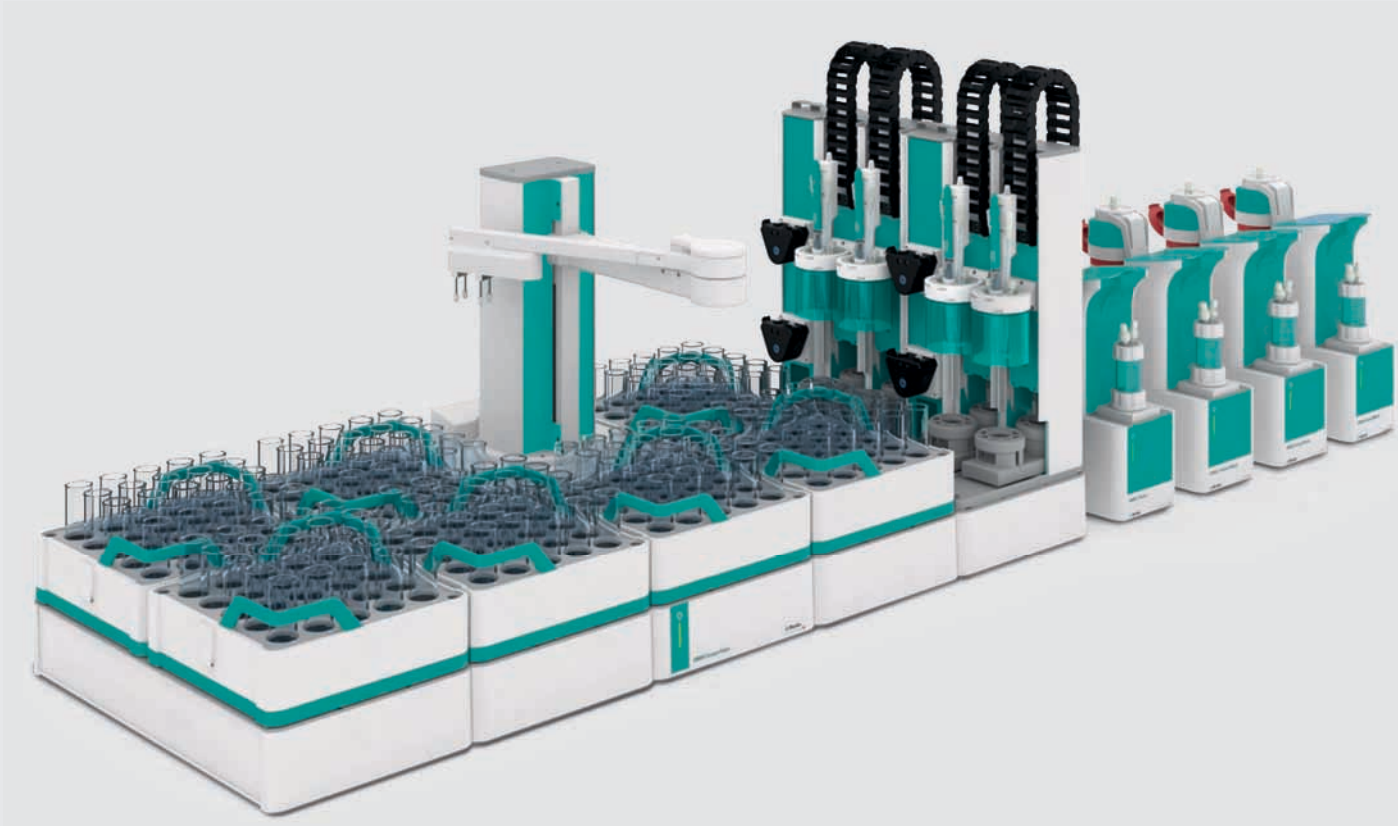


OMNIS奥秘一代系统还可以做什么？ 更加便捷！


提供更多功能

OMNIS 奥秘一代不仅仅是更快速，更简单，更安全--它同时提供了很多附加功能，使日常的实验室工作变得更美好，更方便。


技术特性一览

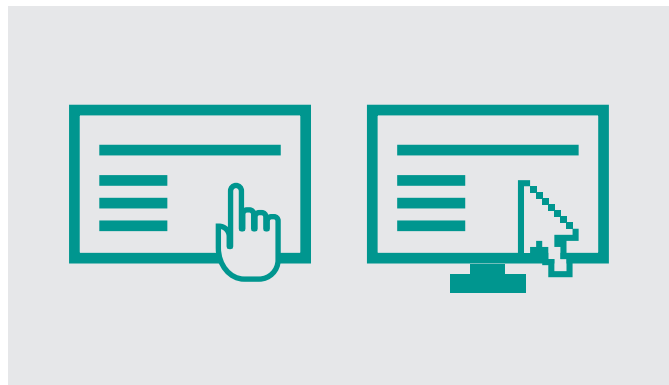


01 选择您需要的控制方式：触摸屏或OMNIS 奥秘一代软件

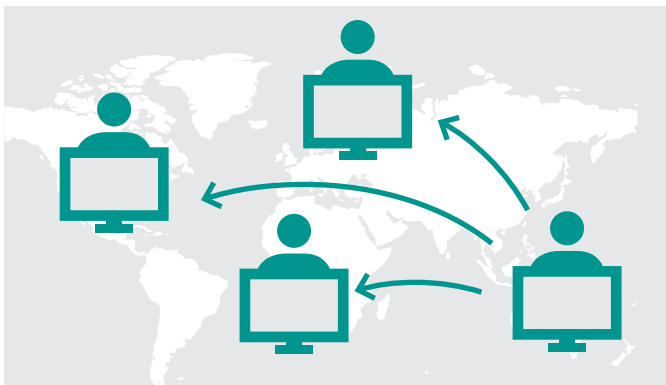

02 网络化：随时随地控制OMNIS奥秘一代平台

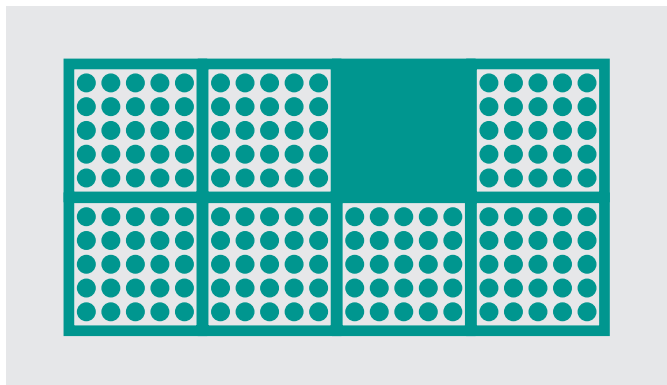

05 自动测定样品数量多达175个！

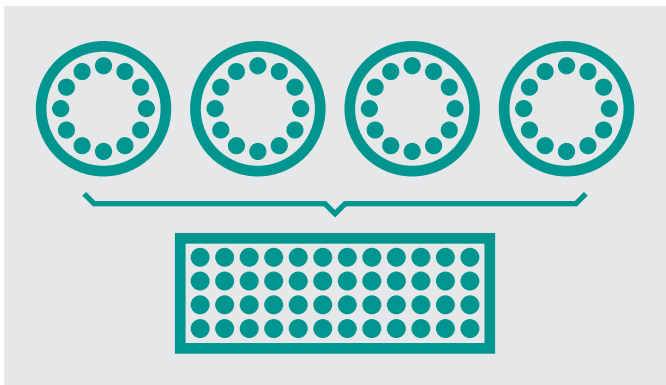


06 占用空间小：有效利用实验室工作台！




03 高精度：滴定管加液分辨率高达十万分之一



04 我的地盘：个性化的用户界面

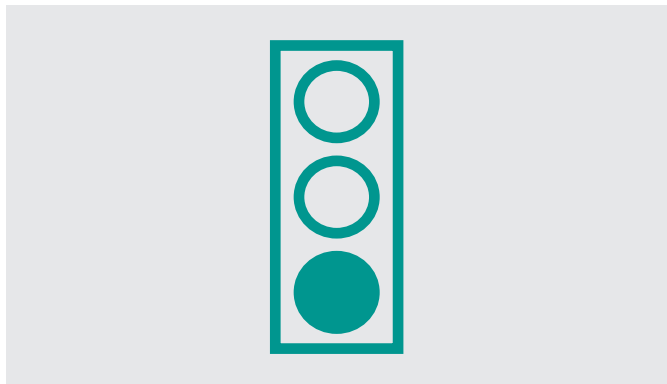

07 系统准备好了吗？查看绿色指示灯！

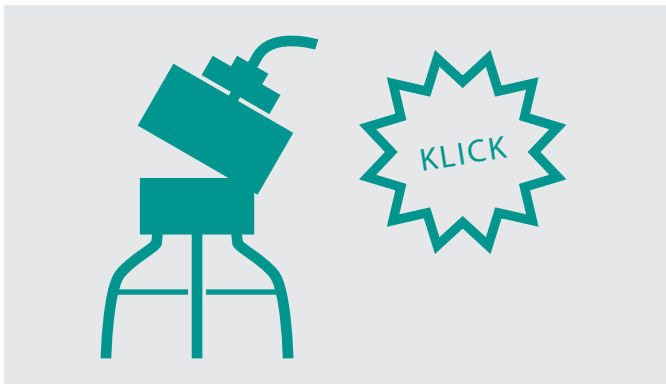

08 快速更换试剂：仅需几秒！