




酒类分析仪 Quick



Quick

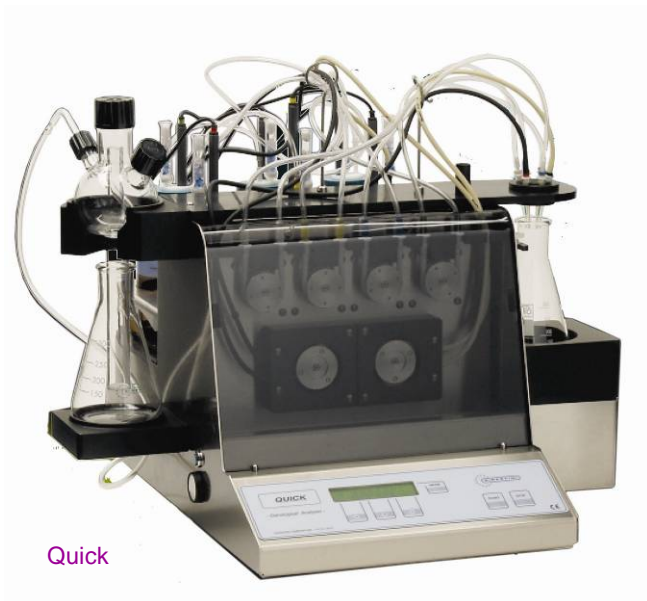

Densimat-CE + Alcomat2



DEEPV + VADE

全自动酒类分析仪，与 DEE 和 VADE、SuperDEE 配合使用



1. 可测参数:

馏出物: 总酸和挥发性酸; 总二氧化硫含量
原酒: 总酸; 挥发的二氧化硫含量

2. 重复性:

挥发性酸度: 0.04 g/l
总二氧化硫含量: 6 mg/l
总酸度: 0.07 g/l
挥发的二氧化硫含量: 2 mg/l

3. 其它参数:

电源: 220 V -15% +10%
工作温度: +10/+40 °C
尺寸大小: 45x52x45 cm (wxdxh)

4. 操作:

自动滴定: 通过记录指示器颜色的变化判断滴定终点

5. 分析时间:

校正挥发性酸: 5-6min
总酸度: 3-4min
总二氧化硫: 4-5min
总酸和游离的二氧化硫: 2-3min

6. 工作量程:

挥发性酸: 最大 1.20g/l
总二氧化硫: 最大 210mg/l