

THE INSTITUTIONS  
机构分布

单位名称: 磐诺仪器江苏办事处  
邮编: 213100  
电话: 18017375791

单位名称: 磐诺仪器浙江办事处  
邮编: 311100  
电话: 18017375709

单位名称: 磐诺仪器上海办事处  
邮编: 200120  
电话: 18017375231

单位名称: 磐诺仪器安徽办事处  
邮编: 230000  
电话: 18017356775

单位名称: 磐诺仪器山东(济南)办事处  
邮编: 250000  
电话: 18017375279/18168817560

单位名称: 磐诺仪器山东(青岛)办事处  
邮编: 266000  
电话: 18017375291

单位名称: 磐诺仪器河南办事处  
邮编: 430000  
电话: 18017375693

单位名称: 磐诺仪器湖南办事处  
邮编: 410000  
电话: 18017375193

单位名称: 磐诺仪器湖北办事处  
邮编: 430000  
电话: 17717395945

单位名称: 磐诺仪器西南办事处  
邮编: 510000  
电话: 18118365962

单位名称: 磐诺仪器云贵办事处  
邮编: 650000  
电话: 18017375202

单位名称: 磐诺仪器广东办事处  
邮编: 510000  
电话: 18017356781

单位名称: 磐诺仪器广西办事处  
邮编: 545000  
电话: 18017375591

单位名称: 磐诺仪器福建办事处  
邮编: 350000  
电话: 17717394056

单位名称: 磐诺仪器东北办事处  
邮编: 110000  
电话: 18017375275

单位名称: 磐诺仪器华北办事处  
邮编: 100000  
电话: 18017356780

单位名称: 磐诺仪器西北办事处  
邮编: 710000  
电话: 18017356771

单位名称: 磐诺仪器新疆办事处  
邮编: 830001  
电话: 17717596405

专业 源于我们一直专注色谱

Panna Instruments (ChangZhou) Co.,Ltd

☎ 0519-80586720/400-608-6890

🏠 江苏省常州市武进区长扬路9号A6栋



公众号



Panna AMD5  
气相色谱质谱联用仪



## Panna AMD5

### 仪器特点：



**真空系统：** 德国进口涡轮分子泵，最高转速达9万rpm，选配进口热电离规。加快抽真空速度，提升效率



**离子源：** 增强型表面钝化筒状离子透镜组，热屏蔽双灯丝设计、优化热传导加热设计，保证样品气化均匀




**质量分析器：** 表面钝化镀金四极杆，更加耐脏，预四极杆与主四极杆一体化装配保证更高的精度



**射频电源：** 独一无二的1.0MHz/1.4MHz双频射频电源系统，超宽温度范围设计，温度适应性更强。核心部件达军品级


全中文操作界面，操作简单  
GCMS工作站：带自建谱库功能、NIST2014选配  
仪器调谐、数据采集和数据分析全模块化设计

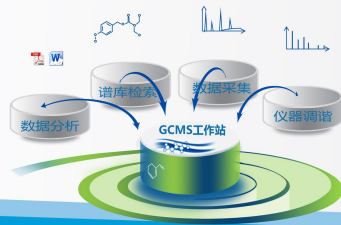


# Panna Instruments




### 典型应用：

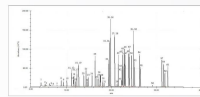


水质64种VOC

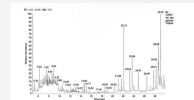


中药中49种农残

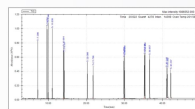

16种多环芳烃

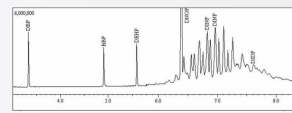

7种邻苯二甲酸酯

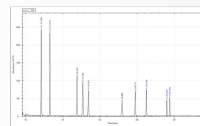

ROHS检测-10种多氯联苯



用户仪器安装现场

### 售后服务：

磐诺“交钥匙”工程，全程提供贴心服务

