


946便携式 重金属快速分析仪

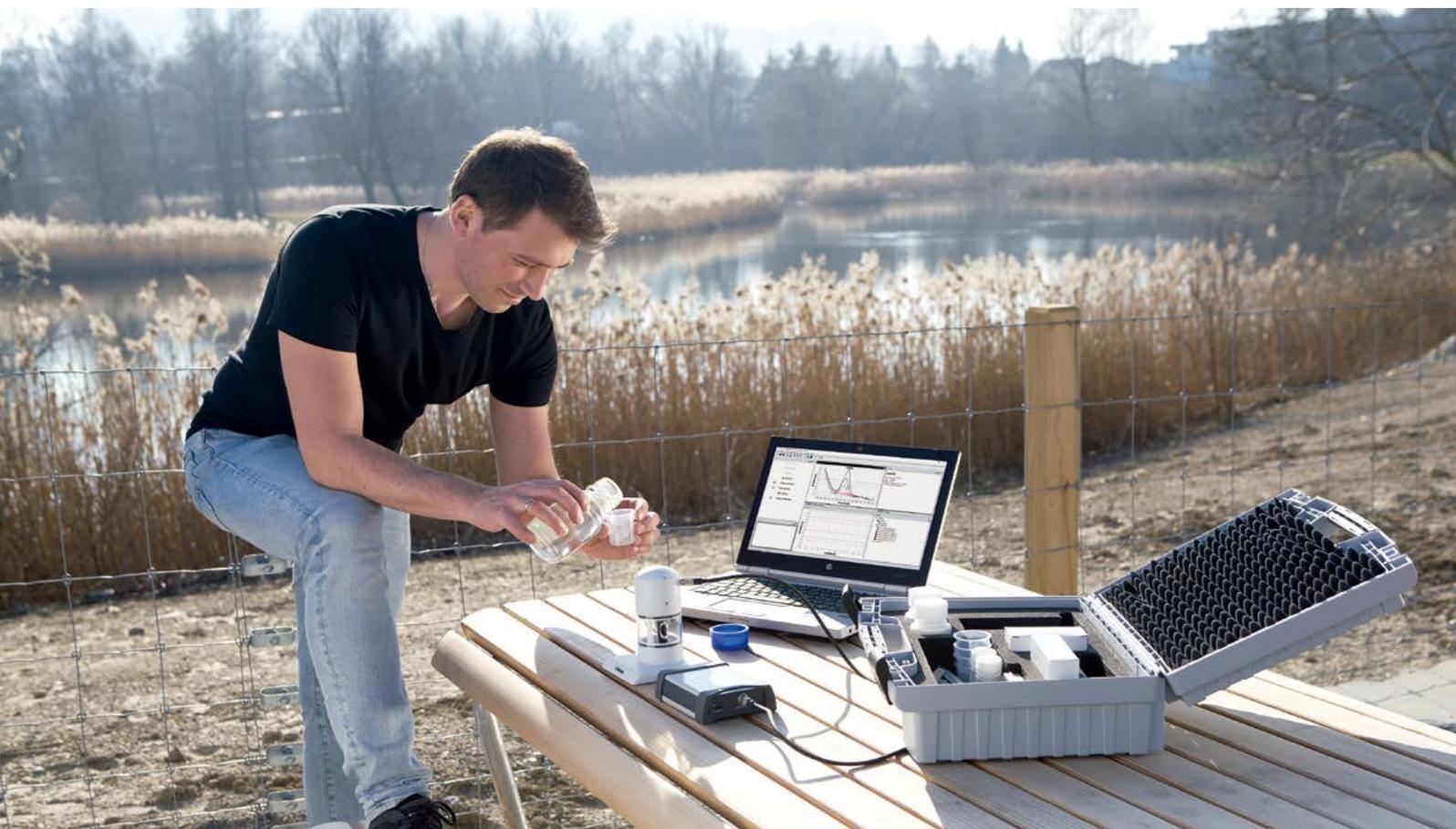

swiss made 
瑞士制造

移动式重金属分析仪

分析化学智库™

 **Metrohm**
瑞士万通中国

现场快速分析水样中的重金属元素As、Hg、Cu

02

为了保障人类用水的质量，需要对痕量的重金属元素进行监测，如：As、Hg、Cu。通常情况下，分析任务需要在实验室中完成——主要原因是缺乏可行的现场解决方案。



带着“实验室”寻找样品

现在，瑞士万通946便携式 重金属快速分析仪为您提供这样一种选择。946便携式 重金属快速分析仪专注于水质分析，能够现场对痕量级别的As、Hg、Cu进行快速方便的分析，其分析结果满足世界卫生组织的指导值，具有高灵敏度、高准确性、重复性好的特点。



946便携式 重金属快速分析仪的特点

- 随时随地进行分析 — 便携箱设计，包含完整的仪器、分析平台、试剂瓶以及附件
- 锂电池供电 — 无需连接电源
- 简单易用 — 应用预先定义好的方法进行分析，几分钟后就能获得结果

*世界卫生组织《饮用水指南》中的推荐值，As 10ug/L, Hg 6ug/L, Cu 2000ug/L。

scTRACE Gold 电极使测量变得简单

946便携式 重金属快速分析仪的核心是scTRACE Gold 电极。以金丝为工作电极的丝网印刷传感器，在保证准确性与重复性的同时，提供杰出的灵敏度，使得总As的检测范围低至个位数 (ug/L)。这远低于世界卫生组织的推荐值，同时满足美国和欧盟国家的法律要求。

电极快速预处理，无需维护—专注分析

scTRACE Gold 电极不需要额外的处理，无需维护。这得益于智能插拔式设计，更换非常简单。

轻松实现形态分析

伏安法可以对痕量元素进行形态分析。例如区分高毒性的三价As和低毒性的五价As。而相对应的其它方法如IC-ICP/MS，则需要花费更多的成本，并拥有完整的实验室。



订购信息

2.946.0010 946便携式 重金属快速分析仪



瑞士万通中国有限公司各地分公司、技术支援中心、维修服务中心：
Branch offices, Application Laboratories and Service Centers of Metrohm China Ltd. in China:

北京Beijing
北京市朝阳区科荟前街
一号院 5号楼
奥林佳泰大厦10层
邮编:100101
电话:010-65170006
传真:010-65179657

上海Shanghai
上海市金钟路658号
4号楼4层
邮编:200335
电话:021-62381166
传真:021-52161825

广州Guangzhou
广州市先烈中路80号
汇华商贸大厦2910
邮编:510070
电话:020-37617902
37617903
传真:020-37616051

成都Chengdu
成都市锦江区东大街
牛王庙段100号
成都商会大厦B座805
邮编:610021
电话:028-86132353
86132351
传真:028-86124640

香港Hong Kong
香港太古坊华兰路20号
华兰中心805-808室
电话:+852 29676552
传真:+852 29670443

 **Metrohm**
瑞士万通中国

网址: <http://www.metrohm.com.cn>
<http://www.metrohm.com>
电邮: marketing@metrohm.com.cn

客服热线: 400-604-0088



微信二维码