


- ◆ VARIO®: 整个过程真空度自动调节, 过程稳定性高, 操作过程无需过多干预
- ◆ VARIO®: 抽速大, 使其过程所需时间短, 零波动 (无滞后) 的真空控制
- ◆ VARIO®: CVC 3000真空控制器非常易于操作, 文本菜单清晰, 内置放气阀
- ◆ 膜片寿命极长, 将操作成本和维修成本降到最低
- ◆ PC 3004 VARIO: 高效的溶剂回收系统, 使其成为一款环境友好的产品



MD 4C NT VARIO - PC 3004 VARIO

VARIO®泵及其真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。按一个键后, 即可实现全自动的蒸发控制。该系列的基础泵是MD 4C NT VARIO三级化学隔膜泵, 满足大部分高沸点溶剂的高真空需求。PC 3004 VARIO是大量溶剂蒸发的可靠之选。在进气口配备一个外覆保护膜的玻璃材质的分离瓶, 防止颗粒或液滴进入泵内。出气口废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果, 有效地循环利用溶剂, 同时主动地保护环境。按需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。

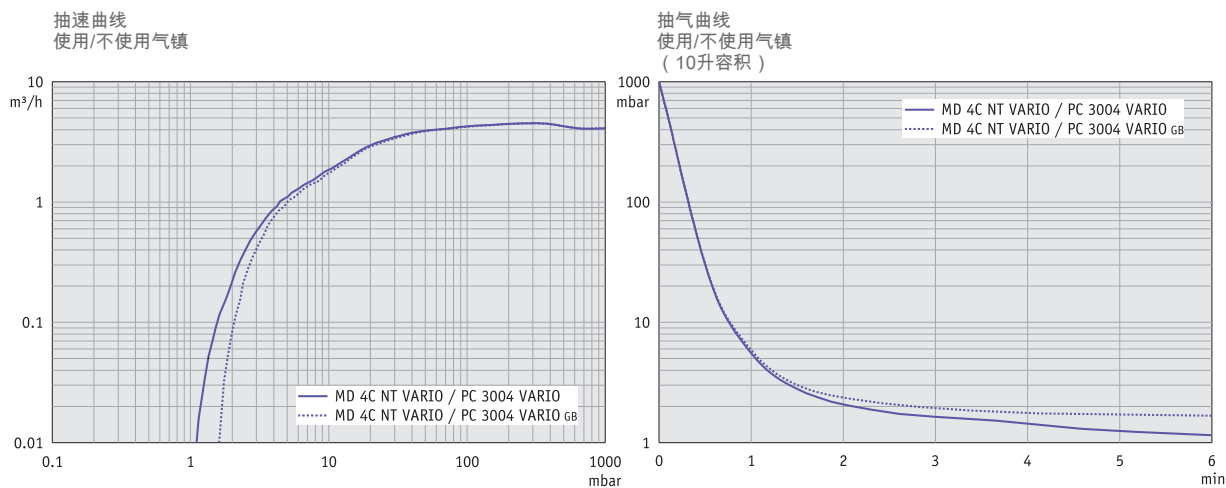

更多信息请查询 www.vacuubrand.com
抽气速度和抽气时间仅供参考。极限真空参数: 请见“技术参数”