


- ◆ VARIO®: 整个过程真空度自动调节，过程稳定性高，操作过程无需过多干预
- ◆ VARIO®: 强劲的真空泵使过程时间更短，零波动（无滞后）的真空控制
- ◆ VARIO®: 非常适合高沸点溶剂在低温下的蒸发应用
- ◆ CVC 3000真空控制器非常易于操作，文本菜单清晰，内置放气阀
- ◆ 高效的溶剂回收系统，使其成为一款环境友好的产品



## PC 3003 VARIO

VARIO®真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。按一个键后，即可实现全自动的蒸发控制。PC 3003 VARIO系统具有极佳的极限真空，因此非常适合高沸点溶剂的蒸发，即使在很低的温度下亦是如此。该系统将优异的性能、紧凑的结构和超低的噪音结合在一起。进气口收集瓶（AK）为玻璃材质，外覆保护膜，可以防止颗粒或液滴进入泵内，保护真空泵的性能。出气口的废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果。按需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。

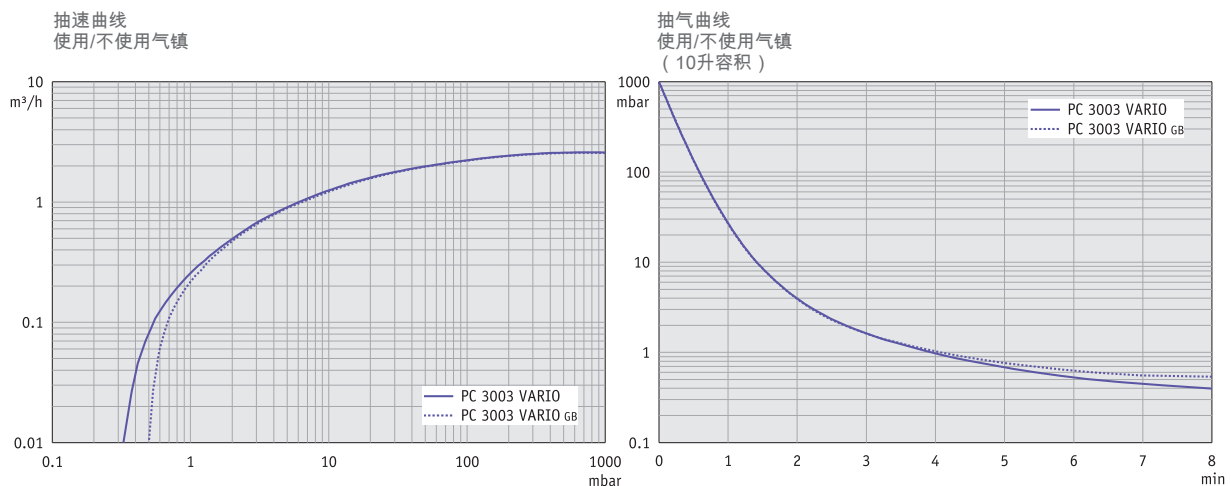

更多信息请查询 [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)  
抽气速度和抽气时间仅供参考。极限真空参数：请见“技术参数”