## Precision Hydrogen GC氢气发生器

Part Number: See Reverse

Service Kit: See Revers




您身边的气体发生器专家

#### 简介

Precision氢气发生器旨在为需要含氢燃气(例如FID和FPD)的检测器提供所需气体。一台氢气发生器可以为多台检测器提供气体,并能调节各种流速,完美地满足客户的个人需求。


这些发生器利用质子交换膜, 电解去离子水产生氢气, 然后通过干燥过滤, 对气体进行干燥处理。

Precision氢气发生器标配各种安全功能,让您在实验室安枕无忧。更安全、更可靠、更便捷,是气体钢瓶的完美替代。

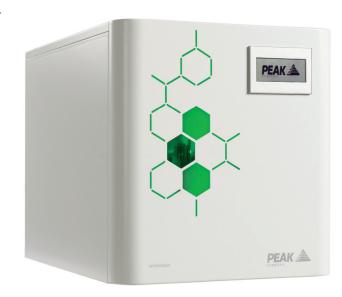

#### 应用

- 检测器气体
  - 燃气

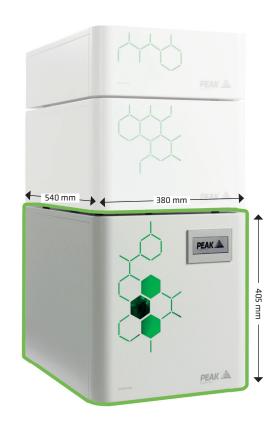

### 特点

- 适用于GC作为燃气
- 纯度高达99.9995%
- 带内部检测功能,若遇故障,系统可自动关闭
- 标配自动装载泵
- ◎ 维护简单,只需更换去离子柱和硅胶柱
- 快速便捷的启动和关机程序
- 小巧,节省空间的模块化设计
- 按需生成氢气,系统内只有及少量的氢气储存。
- 标配提供最长3年电池保修



Precision Hydrogen shown in a typical Precision stack.

技术参数	Hydrogen, 100cc	Hydrogen, 200cc	Hydrogen, 300cc	Hydrogen, 450cc	Hydrogen, 1200cc
最大流速	100cc/min	200cc/min	300cc/min	450cc/min	1200cc/min
最大压力	100 psi / 6.9 bar				
纯度	99.9995%				
气体出口	1x1/8" Swagelok卡套接头				
水质要求	电导性<1.0µ Siemens/cm 或电阻 >1 Mohm-cm				
水用量	up to 0.12L/ day	up to 0.24L/day	up to 0.36L/day	up to 0.53L/day	up to 2.1L/day
工作温度	10°C - 35°C / 50°F - 95°F				
电气要求	110-230V 50/60HZ 6A(100-450cc) 2.3-4.8A(1200cc)				
功耗	309-422 Watts	367-422 Watts	405-422 Watts	422 Watts	600 Watts
热输出	up to 4706 BTU/hr			up to 1000 BTU/hr	
发生器尺寸(WxDxH)	38.0x 54.0 x 40.6cm / 14.9 x 21.2 x 15.9"				
重量	29 Kg (64 lbs)			38 Kg (83.7lbs)	
噪音级	静音				

订购信息					
Part Number	63-0100	63-0200	63-0300	63-0450	33000843
Annual Service					
标准维护计划	www.peakscientific.cn				
全面维护计划					

附属配件	Water Bottle 4L	Water Bottle 8L	
Water Bottle 4L	10-9016	10-9017	

# 

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月,您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护,当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国 Tel: 021 50791190

若想了解更多,请登录 Web: www.peakscientific.cn Email:marketing@peakscientific.com



