

## 培养箱 (2/4箱一体)



2箱或者4箱一体型的培养箱适合在同一时间单独做实验。



### IB-02G-4C

标配

• 钢丝架 (每个箱体标配2个)

选配

• 冲孔搁板

参考76页

### 性能特点

- 温度范围: 室温+5℃~70℃
- 微处理PID控制, 每个腔体都是独立的温度和定时控制。
- 自动校准功能/自动调节功能。
- 无音和强劲有力的热风扇可以使腔内气体流动, 可以保持气体的循环和温度的均匀。

### 操作简单

- 2个或者4个60升的箱体集于一体能够节约实验室空间。
- 背光式LED显示器和直观易懂的控制面板 (分辨率0.1℃)
- 定时操作功能 (1分钟到99小时59分钟)
- 可提前预设3个常用温度, 供后期快速使用。
- 镍铬合金电热线加热器可以防腐蚀, 内部腔体为不锈钢。
- 内部腔体为圆角式设计方便清理, 也方便气体流动。
- 内置电缆接口, 可以连接其它设备供电。
- 标配脚轮, 方便移动。

### 安全特点

- 断电复电后自动运行。
- 键盘保护功能, 防止未经授权的操作。
- 过温保护功能和电流过载保护功能。
- 开门时具有声光报警功能。


型号		IB-02G-2C	IB-02G-4C
腔体容积 (L / cu ft)		60 / 2.1 x 2个箱体	60 / 2.1 x 4个箱体
温度	温度范围 (°C / °F)	室温 +5 ~ 70 / 室温 +9 ~ 158	
	温度波动 <sup>1)</sup> 在37°C时 (±°C / °F)	0.1 / 0.18	
	温度变化 <sup>1)</sup> 在37°C时 (±°C / °F)	0.6 / 1.08	
尺寸 (WxDxH)	内部尺寸 (mm / inch)	400×360×420 / 15.7×14.2×16.5 x 2个箱体	400×360×420 / 15.7×14.2×16.5 x 4个箱体
	外部尺寸 (mm / inch)	570×640×1360 / 22.4×25.2×53.5	1170×640×1360 / 46.1×25.2×53.5
	净重 (Kg / lbs)	110 / 242.5	168 / 370.4
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		4.1A	4.1A x 2EA
货号		<b>AAH2A115K</b>	<b>AAH2A015K</b>
电源要求 (120V, 50 / 60Hz)		7.5A	7.5A x 2EA
货号		<b>AAH2A116U</b>	<b>AAH2A016U</b>

1) 技术参数符合DIN 12880标准。

※ 为FDA项下注册公司, 产品在FDA注册。

## 选配件


### 培养箱

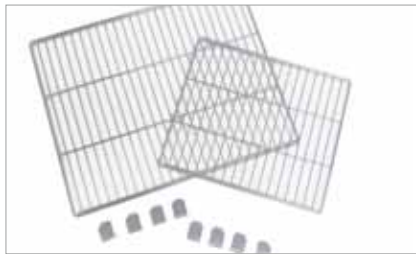

钢丝架



冲孔搁板

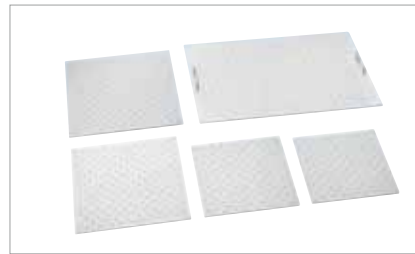

通用平台

### 钢丝架

经过电解抛光处理的不锈钢丝架可以随意移动，方便清理。

货号	描述		WxL (mm / inch)	适用型号
	标配	最多		
EDA8136	2	7	366×316 / 14.4×12.4	IB-05G
EDA8135	2	11	446×366 / 17.6×14.4	IB-15G
EDA8137	2	11	576×419 / 22.7×16.5	IB-25G
EDA8136	2	10	366×316 / 14.4×12.4	IB-01E
EDA8220	2	13	466×490 / 17.6×19.3	IB-11E
EDA8219	2	14	566×466 / 22.3×17.6	IB-21E
EDA8136	4	14	366×316 / 14.4×12.4	IB-02G-2C
	8	28		IB-02G-4C
EDA8219	2	11	566×466 / 22.3×17.6	IL-11/11A
	4	22		IL-11-2C
	8	44		IL-11-4C
EDA8220	3	25	466×490 / 17.6×19.3	IL-21/21A
EDA8223	1	5	195×310 / 7.7×12.2	ILP-02
EDA8221	2	10	305×299 / 12×11.8	ILP-12
EDA8235	2	8	416×406 / 16.4×16.0	ISS-3075/R
EDA8233	2	11	516×506 / 20.3×19.9	ISS-4075/R
EDA8244	2	5	247×247 / 9.7×9.7	IM-10

### 冲孔搁板

不锈钢冲孔搁板可以随意移动，方便清理。

货号	描述		WxL (mm / inch)	适用型号
	最多			
AAA12531	7		366×316 / 14.4×12.4	IB-05G
AAA12532	11		446×366 / 17.6×14.4	IB-15G
AAA12535	11		576×419 / 22.7×16.5	IB-25G
AAA12531	10		366×316 / 14.4×12.4	IB-01E
AAA22522	13		466×490 / 17.6×19.3	IB-11E
AAA22521	14		566×466 / 22.3×17.6	IB-21E
AAA12531	14		366×316 / 14.4×12.4	IB-02G-2C
	28			IB-02G-4C
AAA22521	11		566×466 / 22.3×17.6	IL-11/11A
	22			IL-11-2C
	44			IL-11-4C
AAA22522	25		466×490 / 17.6×19.3	IL-21/21A
AAA24501	5		195×310 / 7.7×12.2	ILP-02
AAA24502	10		305×299 / 12×11.8	ILP-12
AAA24511	5		247×247 / 9.7×9.7	IM-10

### 堆叠器

用堆叠器可以把两台设备堆叠在一起，节约空间。

货号	描述	适用型号
AAA21521	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-05G
AAA21522	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-15G
AAA21523	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-25G
AAA26501	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-01E
AAA26502	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-11E
AAA26503	堆叠器 (堆叠箱体)	IB-21E