

样品支架

常规支架与液晶盒支架

产品简介

除了标准型号里自带的样品支架，Instec 提供有一套样品支架方案，用解决冷热台竖起安装时的夹持粉末/液体样品需求。

并且 Instec 还有为液晶测试盒专门设计有可用于冷热台的加电支架。Instec 也可根据用户实验需求专门设计样品支架。

常规支架

代替原侧边送样器使用，可将嵌住样品，使其位置固定。需要和样品腔增高垫片一起使用。适用于 IR 红外光谱仪、垂直固定等需要严格限制样品位置的应用。



配置列表

常规支架	装载粉末/液体样品，可用于冷热台竖直固定时
液晶盒支架	可透光，可对 Instec 液晶盒加电，BNC 接口
定制支架	根据用户实验需求定制样品支架


*注：详询上海恒商

液晶盒支架

代替原侧边送样器使用，可装入 Instec 液晶测试盒，并设有通光孔，以搭配光学仪器使用。液晶盒支架为磁吸搭扣，开合更加方便。支架末端的 BNC 接口直接联通液晶测试盒的电极，免去液晶盒电测试时的接线烦恼。



通用型的加电支架将电极直接裸露在基板上，便于用户自行连接液晶测试盒或其他样品。建议使用导电胶布进行连接。

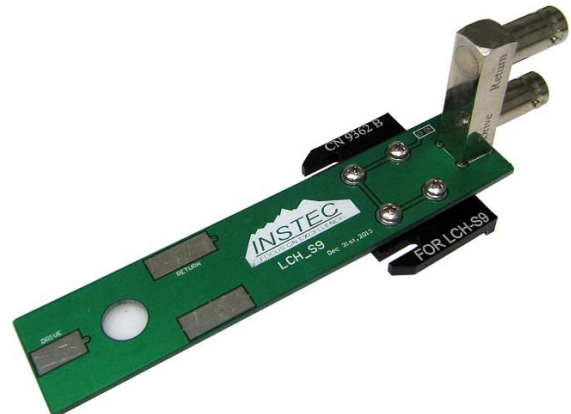

*注：样品支架有多种型号，详询 sales@hsinstrument.com