

# Julie Z7 乳品、牛奶分析仪

## Julie Z7 乳品、牛奶分析仪介绍：

这是一款高级牛奶分析仪，可以满足各种实验室的要求。

内置过滤器，稳定牛奶分析仪及保障仪器运行正常。

系统的控制声音信号。

PC 连接选项及电缆和软件，包括分析仪的配套零件。

3 种定标渠道可以设置三种奶供用户选择。

用户所付款中只包括一种定标，其它定标需另外支付价钱。

如需清理时分析仪会显示并发出声音信号。自动冲水，清洗液清洗。

适用于大型牛奶加工企业的实验室及实验室认证。

Z7 自动牛奶分析仪是斯凯普电子公司智慧的结晶，我们为之骄傲。

牛奶分析仪拥有大显示屏，所显示的测量参数更加清晰。

嵌入式键盘，牛奶生产商可以轻松选择数字并能提供所测牛奶的质量。

测量参数的数据和值通过 Julie Z7 自动牛奶分析仪的内嵌式打印机打印出来。

牛奶分析仪丰富的软件菜单，使其操作起来更为快捷，简便。

Julie Z7 自动牛奶分析仪配有高精度度，专业的内嵌式 PH 计（酸碱度计量器）。第二次图表显示 PH 值。

由斯凯普电子公司开发的斯凯普系统，牛奶分析自动进行，只需将样品放置在吸管下面，不需要按其它键。


Julie Z7 自动牛奶分析仪可用于所有类型的动物奶，豆奶，及人奶分析。

## Julie Z7 Automatic 牛奶分析仪技术参数

测量范围		技术指标	
脂肪	0%-50%	样品体积	3-12ml
蛋白质	0%-15%	样品速度	50sec
乳糖	0%-20%	样品温度	5-40°C
非脂肪固体	0%-50%	湿度	0-80%RH
固体	0% - 10%	数据处理	RS232port
密度	1000-1200kg/m <sup>3</sup>	电源	110/230VAC ± 10%,50/60H
加水	0%-100%	消耗	50W
冰点	-0.400 to -0.700	尺寸	H=310mm,W=270mm,D=400mm
样品温度	5-30 °C	重量	6.5kg
PH	0 - 14 pH		
标准配置	主机，电源线，数据线，热敏纸，样品杯，废液杯，软管备件，浓缩清洁液，pH 电极，pH 溶液，说明书，软件		

## Julie Z7 Automatic 牛奶分析仪技术规格

精确度			配置	
脂肪	±0.01%	罗斯-高特里巴乳脂测定法	牛奶分析主机	1 台

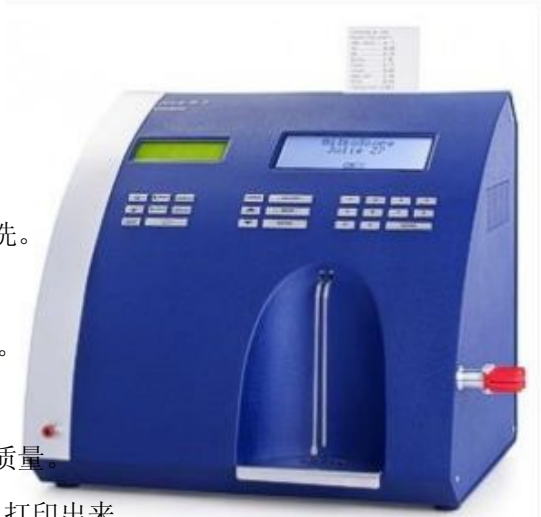

蛋白质	±0.01%	凯氏(测定氮)法	220V 电源电缆	1 条
乳糖	±0.01%	偏振测定法	与计算机连接的系列电缆	1 条
非脂肪固体	±0.01%	干燥箱法	RS232 电缆	1 个
固体	±0.01%	比重测定法	热敏打印纸卷	1 个
密度	±0.1kg/m3	比重计法	样品杯	1 个
加水	±1%	冰点降低测定法	废液瓶	1 个
冰点	0.005°C		软管	1 根
PH	±0.01%PH		清洗液,PH 探针,PH 溶液,使用手册,CD 光盘	

南京欧熙科贸是保加利亚 milkscope 公司在中国的总代理

Julie Z7 Automatic 牛奶分析仪

C3/Julie C5/Julie C8/Julie Z9 乳成份分析仪

Julie C2 全自动牛奶分析仪

单位名称: 南京欧熙科贸有限公司

单位地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

邮政编码: 210018

联系电话: 025-86465277, 52613764

联系传真: 025-52613794

联系人: 张海霞: 13913028277

邮 箱: 13913028277@163.com

公司网址: www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn

对人以诚信，人不欺我；对事以诚信，事无不成。