

## 可提供安心清洁的研究环境 不必担心飞溅、冒烟、火灾等安全隐患

### 带加热磁力搅拌 铝块恒温槽

シンフレックス  
**SynFlex™**

Dry Block Bath with Stirrer BBS+RCH RCH型+BBS型



出色的耐热性、耐腐蚀性、耐磨损性  
带搅拌功能的铝块恒温槽



RCH-1000+BBS-230RB



RCH-1000+BBS-3HLD

HIP + HIP-HEAD2型  
催化剂筛选



BBS-3HLD型  
回流试验



#### RCH型

- 标配的温度传感器，可以控制样品温度。
- 陶瓷涂层的加热板具有出色的耐热性、耐腐蚀性、耐磨损性，远红外线效果最高到达温度为310℃。
- 温度和转速显示一目了然。通过大旋钮可设定转速设定，确认方便，再现性强。

#### BBS型

- 丰富的配件可供选择，配合不同的研究课题，可进行自由地组合。
- 品种多样的加热铝块可根据试剂瓶等玻璃容器的热胀冷缩进行自动调节。
- 为了提高铝块的耐腐蚀性，采用了白耐酸铝涂层处理，有2个地方配有温度传感器插孔(φ 3.2mm)。

产品名称	带加热板磁力搅拌器
型号	RCH-1000
产品代码No.	264286
旋转速度范围	50~1500rpm(无负荷时)
搅拌容量	20L(水)
温度调节范围	室温~310°C(置物盘温度)
马达	DC无刷电机 输出25W
加热器	600W
搅拌台材质·尺寸(mm)	铝合金、陶瓷涂层·直径135
外部尺寸·质量	165Wx285Dx90Hmm·3kg
电源输入·额定电源	3.2A、630VA·AC220V 50/60Hz

#### SynFlex用铝槽 BBS—130AB型

根据容器可选用不同铝槽，最新推出了更加丰富的铝槽可供选择。铝槽内加入铝球，可以使用不同外形的容器。



#### 防滑脱装置

防止烧瓶、三角瓶等反应容器从搅拌台上脱落发生烫伤危险而设计的防滑脱装置。




产品代码No. 264720




手机“扫一扫”  
浏览更多产品和促销信息。

■ 配套指南

容量：5~5000mL(BBS型 + RCH-1000型)

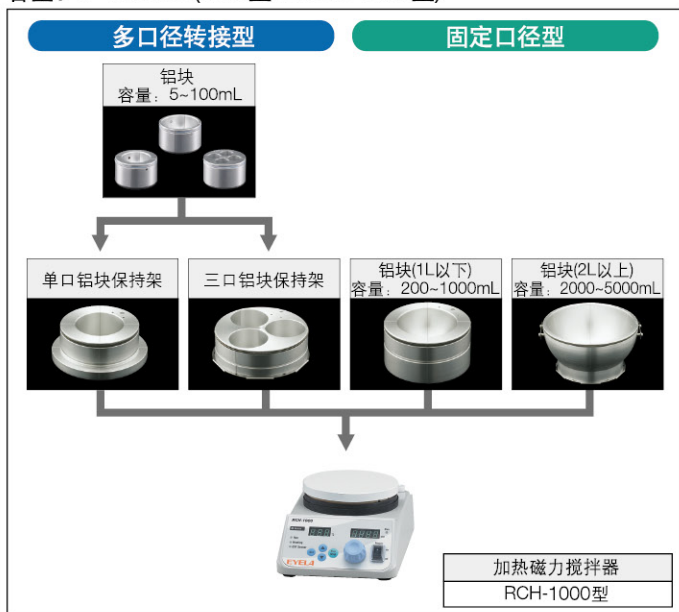

容量：5~500mL(BBS型 + RCH-3型)

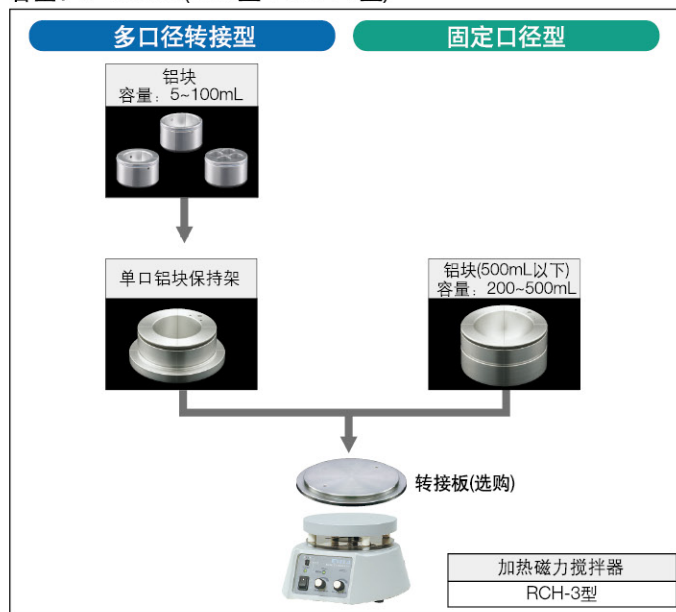

■ 试剂瓶用铝块·铝块保持架选定表

容量	规格	试剂瓶		园底试剂瓶		试管·反应容器
		ISO规格	JIS规格	ISO规格	JIS规格	
铝块	ø12mm x 8	—	—	—	—	BBS-12T8I
	ø24mm x 4	—	—	—	—	BBS-24T4I
	ø60mm	—	—	—	—	BBS-60TI
	5mL	—	—	BBS-30RI	—	—
	10mL	—	BBS-32RI*1	BBS-35RI	BBS-32RI*1	—
	20mL	—	BBS-35RI*2	—	—	—
	25mL	—	—	BBS-41RI	BBS-45RI*1	—
	30mL	—	BBS-41RI*1	—	—	—
	50mL	BBS-56EI*1	BBS-51RI*3	BBS-51RI	BBS-53RI*1	—
	100mL	BBS-60EI*1	BBS-61RI*3	BBS-64RI*1	BBS-65RI*1	—
+						
单口铝块保持架				BBS-1HLD		
三口铝块保持架				BBS-3HLD		


※ 单口铝块保持架使用时，选用常用搅拌子；选用三口铝块保持架时，选用椭圆形、橄榄形、长型搅拌子。搅拌速度请使用400rpm以上。

■ 铝块选定表

容量	规格	试剂瓶		园底试剂瓶	
		ISO规格	JIS规格	ISO规格	JIS规格
铝块	200mL	—	BBS-76EB	—	BBS-80RB
	250mL	BBS-80RB	—	BBS-85RB	—
	300mL	—	BBS-85RB	—	BBS-93RB
	500mL	BBS-100EB	BBS-100EB	BBS-105RB	BBS-108RB
	1000mL	—	BBS-133EB	BBS-131RB	BBS-135RB
	2000mL	—	BBS-166RB	BBS-166RB	BBS-170RB
	3000mL	—	—	BBS-185RB	BBS-200RB
	4000mL	—	—	BBS-207RB	—
	5000mL	—	—	BBS-223RB	BBS-230RB

多口径转接型

5~100mL的少量用铝块和铝块保持架组合

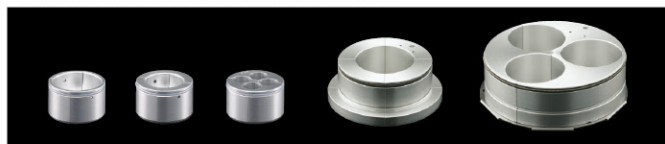

产品名称	尺寸	型号	产品代码	
试管用铝块	ø12 x 8	BBS-12T8I	239940	
	ø24 x 4	BBS-24T4I	239920	
	ø50	BBS-50TI	248840	
	ø60	BBS-60TI	239930	
	ø30	BBS-30RI	239830	
试剂瓶用铝块	ø32	BBS-32RI	239840	
	ø35	BBS-35RI	239850	
	ø41	BBS-41RI	239860	
	ø45	BBS-45RI	239870	
	ø51	BBS-51RI	239880	
	ø53	BBS-53RI	239890	
	ø56	BBS-56EI	240960	
	ø60	BBS-60EI	240970	
	ø64	BBS-64RI	239900	
	ø65	BBS-65RI	239910	
	ø75	BBS-75FI	245790	
	单口铝块保持架		BBS-1HLD	239810
	三口铝块保持架		BBS-3HLD	239820

固定口径型

适用于容量为2000~5000mL的试剂瓶用铝块



产品名称	尺寸	型号	产品代码
试剂瓶用铝块	ø76	BBS-76EB	239950
	ø80	BBS-80RB	240370
	ø85	BBS-85RB	240380
	ø93	BBS-93RB	240390
	ø100	BBS-100EB	239960
	ø105	BBS-105RB	240400
	ø108	BBS-108RB	240410
	ø131	BBS-131RB	240420
	ø133	BBS-133EB	239970
	ø135	BBS-135RB	240430
	ø166	BBS-166RB	239980
	ø170	BBS-170RB	239990
	ø185	BBS-185RB	240000
	ø200	BBS-200RB	240010
	ø207	BBS-207RB	240020
	ø223	BBS-223RB	240030
	ø230	BBS-230RB	240040

	有关安全的 注意事项	为了使您安全地使用本产品，在使用之前， 请仔细阅读《使用说明书》
--	---------------	-------------------------------------



东京理化器械株式会社  
 东京都文京区小石川1-15-17 TN小石川大厦6层  
 TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室  
 北京办事处 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室  
 广州办事处 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室  
 成都办事处 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场903室  
 西安办事处 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室

Tel: 021-62076878/31 62107271 Fax: 021-62076920 邮编: 200052  
 Tel: 010-84264221/28 Fax: 010-84264233 邮编: 100020  
 Tel: 020-38871910 38264610 Fax: 020-38871930 邮编: 510620  
 Tel: 028-86511719 Fax: 028-86511803 邮编: 610031  
 Tel: 029-87852182 Fax: 029-87852182 邮编: 710054

·由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动。敬请理解。  
 ·由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请理解。