

欧菲姆：欧盟进口干雾过氧化氢消毒灭菌设备

(OXY-30000)

医疗感控突破性消毒产品

A brand new disinfecting facility for hospital infection



降低院感发生率

控制多重耐药性

安全对人体无害

便携灵活操作

医院的高水平“终末端”消毒和杀菌需求，随着突发性传染疾病的增多和耐药性病例的提升，也上升到了一个前所未有的水平。



作为最新型的过氧化氢消毒设备，欧菲姆干雾过氧化氢消毒设备 OXY-30000型，采用全球领先的干雾技术，打造出最接近气态的过氧化氢颗粒，是医院提升消毒水平，避免院感事件的有力助手。

欧菲姆干雾设备：基于文丘里原理，产生肉眼不可见的接近气体的干雾，保证无孔不入的渗透到可能发生传染的每个角落


干雾有如下的性质：

- 干雾滴不会沉降并且无规则运动(布朗运动原理);易于到达房间的各个位置
- 干雾滴不会聚合并且在一起产生大的液滴;不会产生水凝,造成有效成分功效降低
- 干雾滴在表面接触后会反弹,而不会破裂湿润表面;更有效进行空间灭菌

因此干雾气体的这些性质使得难以达到的地方也有很好的空间和表面接触效果。

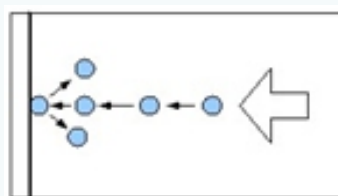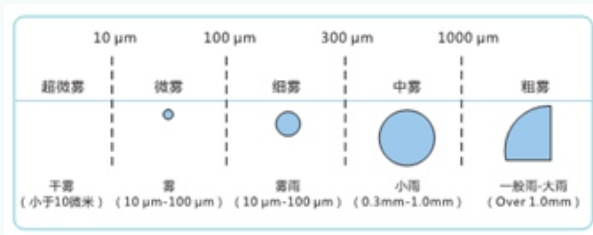

干粒撞壁后反散

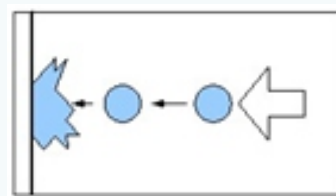

液粒撞壁后射,无法散

而欧菲姆形成的干雾，颗粒仅为3-5微米，接近气态，是目前全球最佳的干雾效果设备，因此可以将干雾所有的优势发挥的更好。与其他雾化设备相比，欧菲姆工作时肉眼几乎不可见。这也是判断干雾效果的最直观标准！

200种

能杀灭包括鲍曼杆菌，MRSA，VRE，H1N1病毒，埃博拉病毒等在内的200多种微生物

对嗜热脂肪芽孢和黑色枯草芽孢杆菌能够达到 10^6 的6次方杀灭效果

10^6

60min

分钟就可完成一间50立方米的病房消毒工作，人员可以进入

1ppm

使用完毕后，过氧化氢浓度5分钟通风就可达1个PPm的人体安全值

5.8公斤

机身仅重5.8KG，单手可提，方便移动

多年的医疗应用经验，保证了欧菲姆可以应用于：ICU，负压隔离病房，传染病房，实验室，手术室，发热门诊，病理检验科，药物配置中心，急救车，血液室，微生物实验室等医疗“终末端”消毒



欧菲姆和诺福中国大陆地区独家代理：
深圳润联环保科技有限公司

地址：深圳市宝安区新湖路华美居商务中心B区7层
邮箱：service@groupic.cn
网址：www.oxypharm.cn
传真：0755-27447596
电话：18128842053

