



MIT300 正置金相显微镜外型尺寸 (mm)

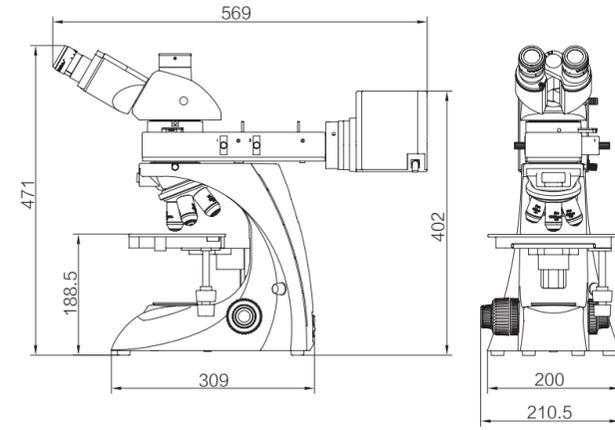

MIT500 正置金相显微镜外型尺寸 (mm)

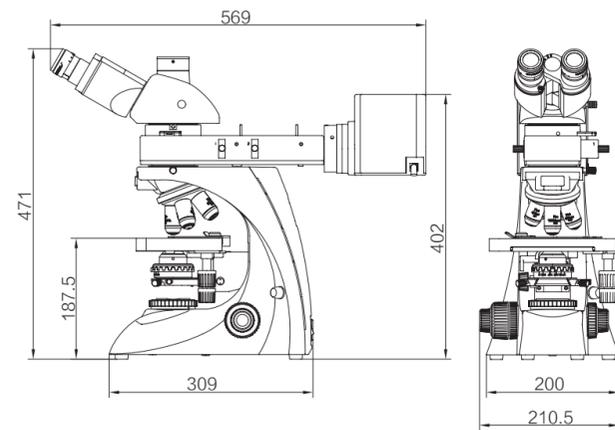

WWW.CNOPTEC.COM — 奥特光学 — 光学显微镜专业生产制造

optec 重庆奥特光学仪器有限公司
CHONGQING OPTEC INSTRUMENT CO.,LTD

RoHS **CE** ISO9001 认证 ISO14001 认证 ISO13485 认证

如果技术进步, 配置参数变动, 恕不另行通知, 以实际产品为准。

地址: 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号13幢3#

电话: 023-68262757

传真: 023-68260097

网址: www.cnoptec.com

E-mail: sales-ot@163.com

邮编: 400700



MIT300/500 正置金相显微镜
MIT300/500 Metallurgical Microscope

重庆奥特光学仪器有限公司
Chongqing Optec Instrument Co.,Ltd



MIT300 正置反射金相显微镜



MIT500 正置透反射金相显微镜

MIT300/500 正置金相显微镜技术规格

光学系统	OTICS 无限远色差校正光学系统
放大倍数范围	50X ~ 1000X
目镜	10X 大视野、高眼点平场目镜, 视场数 Φ 22mm
物镜	长工作距离无限远平场物镜: 5X/10X/20X/40X/50X(S)/80X (S) /100X (S)
观察筒	铰链式三目观察筒, 30° 倾斜, 瞳距调节 48 mm ~ 76mm, 两档转换: 100% 观察; 20% 观察, 同时 80% 摄影
物镜转换器	内倾式内定位五孔转换器
粗微调焦装置	粗微同轴调焦, 粗调行程 25mm, 微调每圈 0.2mm, 格值 2 μ m, 粗调带松紧调节, 并有调焦上限位装置
载物台	机械移动载物台, 面积 182 mm \times 140mm, 移动范围 77 mm \times 52mm, 双片夹结构, 金属载物板 200x150mm 机械移动载物台, 面积 200 mm \times 150mm, 移动范围 77 mm \times 52mm, 平台快降装置, 使观察距离增加 50mm
聚光镜	N.A.1.25 阿贝聚光镜, 带可变光栏
透射照明系统	6V/20W 卤素灯 (宽电压输入: 100V ~ 240V), 视场光栏, 中心可调
反射偏光系统	12V/50W 卤素灯 (宽电压输入: 100V ~ 240V), 视场光栏, 中心可调
偏光装置	起偏器, 检偏器
摄像接筒	0.5X/ 1X 摄像接筒 (C-Mount)
数码照相装置	可配置 CANON、NIKON、OLYMPUS 等多种数码相机
数码摄像系统	DV/TP 系列数码摄像系统

物镜技术参数及配置 (单位: mm, “●”为标配, “○”为选配)

物 镜	数字孔径 N.A.	工作距离	MIT300/500
LPL 5X	0.13	24.23	●
LPL 10X	0.25	18.48	●
LPL 20X	0.40	8.35	●
LPL 40X	0.66	3.90	○
LPL 50X (S)	0.70	1.95	●
LPL 80X (S)	0.80	0.85	○
LPL100X(S)	0.90	1.00	○

规格齐全的长工作距离无限远平场金相物镜



MIT300/500 正置金相显微镜



超大视野目镜, 视场数可达到 22mm, 观察更加平展舒适



两档转换式观察筒: 100% 观察; 20% 观察, 同时 80% 摄影



平台快降装置, 可使被检样品的观察空间增加 50mm 以上高度, 便于观察大型样品



大面积三层机械移动载物台, 使您的样本选择更加广泛



A. 检偏器 B. 磨砂玻璃插件 1. 起偏器 2. 滤光片转换推板 3. 视场光栏 4. 孔径光栏