

赛多利斯集团
BSA系列电子天平
最新力作，成就实验室工作




赛多利斯最新 BSA 系列 最新技术，与众不同



高分辨率的应用程序中集中了更多功能：1 mg-620 g 和 10 mg-6200 g。赛多利斯将尖端技术和合理成本合而为一，创造了最新的卓越等级。

如果对比一些常用实验室天平的技术参数，您会发现它们看上去都一样，也就是说一看到一个型号，就能了解它们全部。但事实上，实验室天平仅仅考虑技术参数是远远不够的。

赛多利斯最新 BSA 系列电子天平设计独特，能有效、可靠地进行实验室日常称量工作。而正是由于其强大的技术和明确的操作及功能，使其显得与众不同。

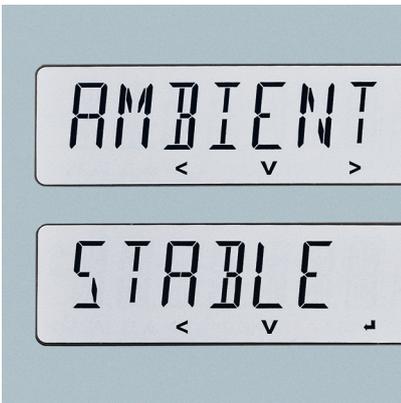



带衬光低温 LCD 显示器。即使在环境条件不够完美的情况下，也始终能得到可靠的称量结果，全靠 BSA 高度发达的数字补偿运算法则。



赛多利斯采用 21 世纪最新技术，如独特的自动加工的 Monolithic 传感器，确保长期得到高精度结果，并将温度漂移的影响最小化。为全世界用户提供真正非凡、可靠的赛多利斯天平。




另外，所有 BSA 型号均能方便、快速、彻底地进行清洁。

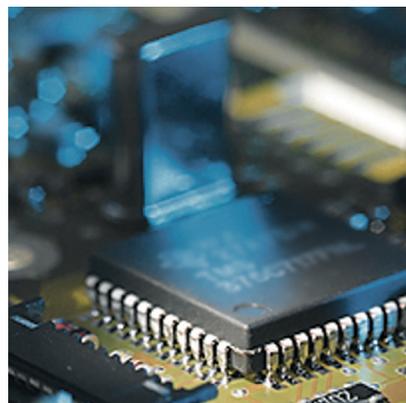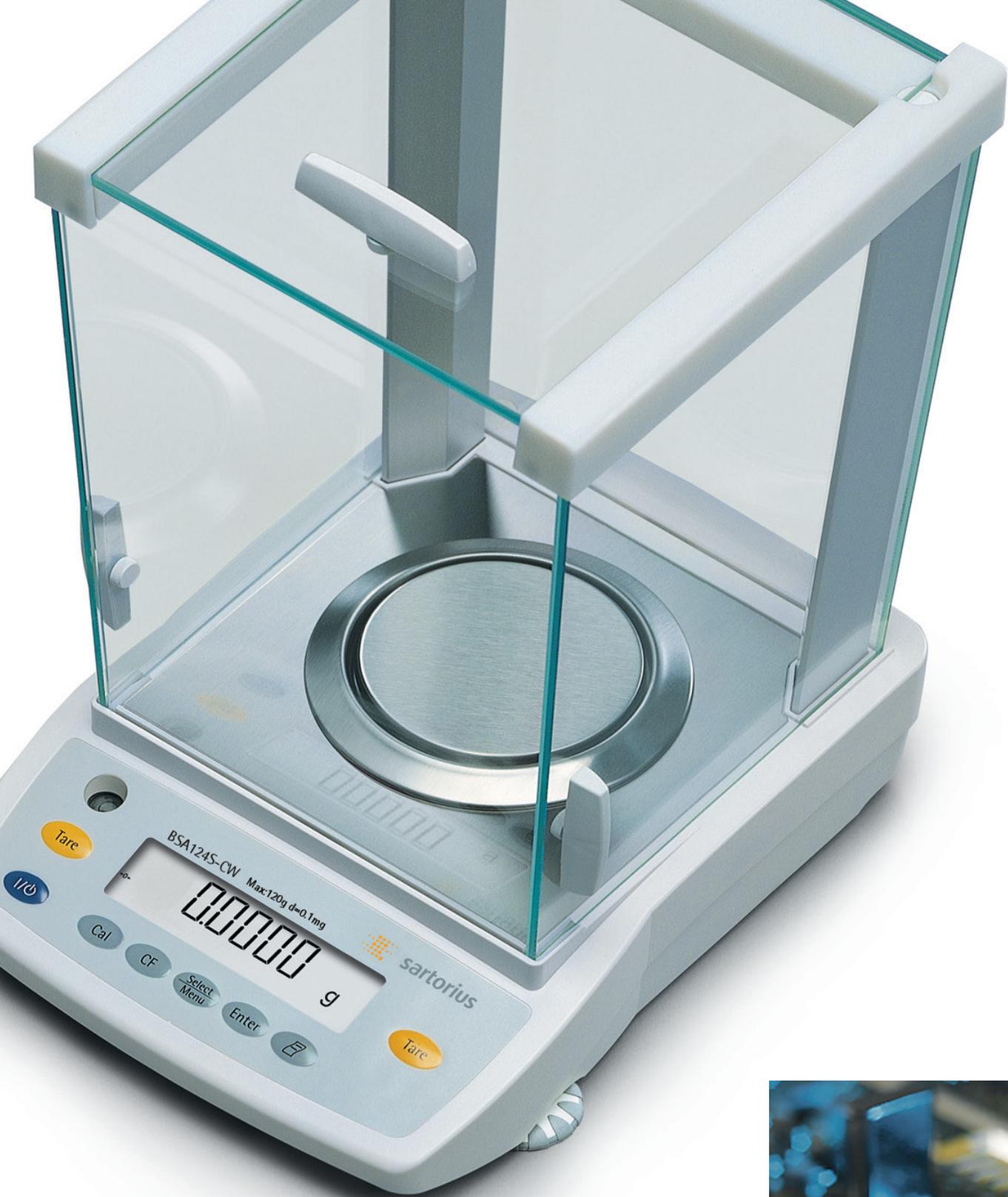


BSA 拥有更新、更强大的微处理器技术，较一般标准天平而言，更能缩短响应时间，得到更快速的结果。

赛多利斯最新 BSA 系列 操作简单，与众不同

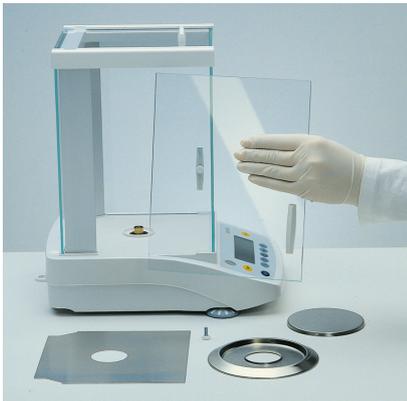

快速清洁、坚固的设计：分析天平防风罩两侧和顶部的防风门，以及称量室内所有不锈钢零件都能轻松取下，方便进行彻底清洁。

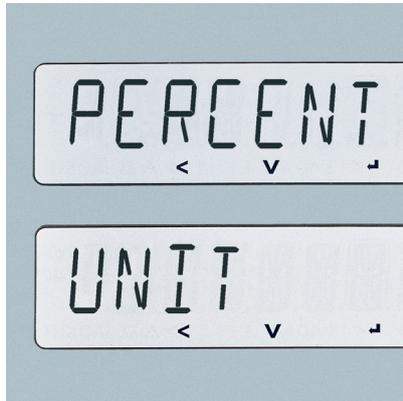

用户友好的操作：简单易懂的英文文本提示以及指示符，指导您方便地设置天平参数，满足个人的具体要求。



水平仪在显示屏旁边，对操作者而言，检查天平是否水平就变得非常方便。触感反馈式按键确保操作可靠有效



高对比度带背景光显示屏，让您得到卓越的读数（字符高度：15 mm）。

赛多利斯最新 BSA：让实验室工作不再复杂、单调的最佳解决方案

当您需要日复一日、快速可靠地重复进行繁重的称量工作时，那么您最不希望得到的就是一台操作复杂，经常会导致误操作，从而浪费您宝贵时间的天平。

欢迎进入 BSA 舒适的操作空间：

简单易懂的控制面板，分布合理的键盘，清晰易读的显示读数，BSA 能完美、有效地适应您的实验室工作。

赛多利斯最新 BSA 系列 功能齐全，与众不同

将赛多利斯 BSA 的所有功能列出来，就能发现只有真正的赛多利斯实验室天平才能提供给您所有这些优势，值得您为此付出。




BSA 分析天平的防风罩采用无框架全玻璃设计，确保称量室内有最佳的光照条件。



密度直读功能，直接显示测得的密度。



下部吊钩，方便称量，并可直读密度。

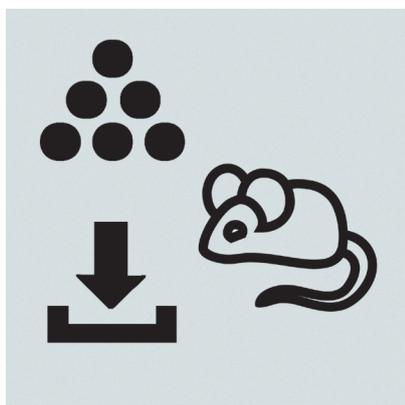

这些图标表示您所选择的应用程序，如动态称量 / 动物称重、净重求和或计数。



所有 -CW 型号都标配内置电机驱动的标准砝码，最大限度确保称量精度和操作便捷性。



可选的适配器电缆能连接其它设备，如通过 USB 接口连接电脑。另外，所有 BSA 都标配 RS-232C 接口

如果要得到符合 ISO/GLP 标准的原始或校准 / 调整数据, 只需连接 YDP20-OCE 数据打印机, 然后按下打印键即可。



技术参数

分析天平		可读性	量程	称盘尺寸	重复性	线性	平均响应时间	校准方式
型号		(g)	(g)	(mm)	($\leq \pm g$)	($\leq \pm g$)	(s)	
	BSA124S	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
	BSA124S-CW	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
	BSA224S	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
	BSA224S-CW	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
精密天平		可读性	量程	称盘尺寸	重复性	线性	平均响应时间	校准方式
型号		(g)	(g)	(mm)	($\leq \pm g$)	($\leq \pm g$)	(s)	
	BSA223S	0.001	220	115	0.001	0.002	1	外校
	BSA223S-CW	0.001	220	115	0.001	0.002	1	内校
	BSA323S	0.001	320	115	0.001	0.002	1	外校
	BSA323S-CW	0.001	320	115	0.001	0.002	1	内校
	BSA423S	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	外校
	BSA423S-CW	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	内校
	BSA623S	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	外校
	BSA623S-CW	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	内校
	BSA822	0.01	820	150	0.02	0.03	1	外校
	BSA822-CW	0.01	820	150	0.02	0.03	1	内校
	BSA2202S	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
	BSA2202S-CW	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
	BSA3202S	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
	BSA3202S-CW	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
	BSA4202S	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
	BSA4202S-CW	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
	BSA6202S	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
	BSA6202S-CW	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
	BSA2201	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	外校
	BSA2201-CW	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	内校
	BSA5201	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	外校
	BSA5201-CW	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	内校
	BSA8201	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	外校
	BSA8201-CW	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	内校

www.sartorius.com.cn

销售咨询电话: 800 810 0124

客服中心电话: 400 610 0856, 800 810 0856

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司

Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd.

电话: (86-10)80426300, 80426552 传真: (86-10)80426551

地址: 北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号 邮编: 101300

E-mail: ssl@sartorius.com

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司上海分公司

Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch

电话: (86-21)64270612, 54240508 传真: (86-21)64270604

地址: 上海市徐汇区南丹东路238号新东亚大厦17E 邮编: 200030

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司广州办事处

Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Office

电话: (86-20)37618575, 37616348 传真: (86-20)37616234

地址: 广州市先烈中路80号汇华商贸大厦23楼K单元 邮编: 510070

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司成都分公司

Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Chengdu Branch

电话: (86-28)86666728, 86666877 传真: (86-28)86666977

地址: 成都市上东大街53号新良大厦2406室 邮编: 610012

技术规格如有改变, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权和修改权。

2012年4月第1版