


微波消解仪的标杆




MultiVIEW是一个完全自动化的微波消化系统，能够在—个消解架上消解多达12个不同基质的样品。通过改进的主机的结构可监测与控制每个样品的实际温度。通过MultiVIEW AutoLOADER（单独销售）自动加载多达7个可放置0-12个样品的消解架，以实现连续化消解。

· 特点

- 一分钟内准备好消解架
- 生成每个样品详细的消解报告
- 整个过程中保证了操作者和机器的安全

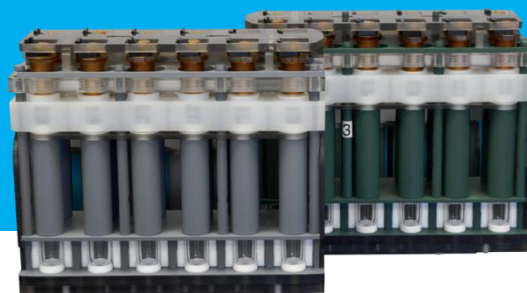

石化

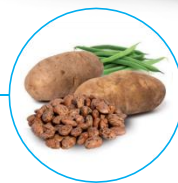

农业



地矿



环境



织物

CORPORATE HEADQUARTERS

Phone: +1 (514) 457-0701
Fax: +1 (514) 457-4499

CANADA/USA

Phone: +1 (800) 361-6820
Fax: +1 (800) 253-5549

FRANCE

Phone: +33 (0) 1 69 18 71 17
Fax: +33 (0) 1 60 92 05 67

GERMANY

Phone: +49 (0) 8342-89560-61
Fax: +49 (0) 8342-89560-69

UK

Phone: +44 (800) 368 6147

欢迎新一代的微波消化系统

亮点

- 侧装的温度探测器随容积和消解物质而启动运行。
- 12个样品都配备对应的磁控管以提供微波能量。
- 安装有高清摄像机，可监测每个样品的消解状态并具有回放、法律工作、方法开发和确认完全消化的功能
- 安装AutoLOADER可实现MultiVIEW自动化，可加载多达7个消解架，实现消解的大通量

用户界面



- 可通过15"彩色触摸屏上查看每个样品的情况
- 可实时查看和保存升温与微波能量曲线
- 实时修改消解参数（恒温时间、升温时间、升温曲线）

预先设定消解方法

- 消解管：允许一个消解架每个样品使用不同的消解方法
- 消解架：整个消解架也可以使用同一消解方法
- 多个消解架：理想的自动化与高通量（安装有AutoLOADER）

安全性

- 零部件都涂有聚四氟乙烯涂层，可耐环境腐蚀。
- 消解隧道采用13gauge（2.413mm）厚的不锈钢，可保护操作者免受爆炸的伤害
- 风扇换气量达100cfm，可迅速排除酸雾
- 安全帽在压力超过500 PSI（34 bar）自动卸压以防止爆管

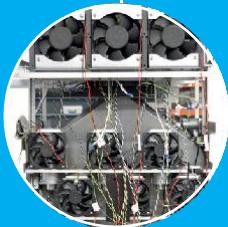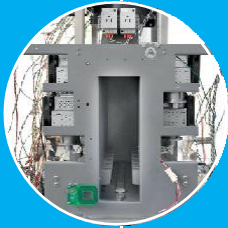

部件号 #	描述	尺寸 (W x H x D in inches)	重量 (lbs)
010-625-001	MultiVIEW消解系统主机	23 x 39 x 28	260
010-625-003	MultiVIEW消解系统主机，带摄像功能	23 x 39 x 28	260
010-625-004	AutoLOADER 自动化加载7个消解架	23 x 39 x 28	128
010-625-005	MultiVIEW 消解架 带75ml石英管，10/ 25/50 ml刻度线	-	-
010-625-006	MultiVIEW消解架，带75ml特氟龙消解管	-	-

欲知更多详情，请与当地销售代表或经销商联系

CORPORATE HEADQUARTERS

Phone: +1 (514) 457-0701
Fax: +1 (514) 457-4499

CANADA / USA

Phone: +1 (800) 361-6820
Fax: +1 (800) 253-5549

FRANCE

Phone: +33 (0) 169 18 71 17
Fax: +33 (0) 160 92 05 67

GERMANY

Phone: +49 (0) 8342-89560-61
Fax: +49 (0) 8342-89560-69

UK

Phone: +44 (800) 368 6147