

SimpliVac™ 真空镶嵌设备

标乐 (Buehler) 真空镶嵌设备 SimpliVac 可排除样品中的空气，能够极佳地填充试样内部的孔隙及镶嵌树脂与试样之间的缝隙。由此，边缘保持得到加强，易碎样品在研磨和抛光的过程中也能得到良好的支撑，特别适用于多孔材料，例如失效分析试样、多孔铸件及复合物、电子元件、矿石、陶瓷和喷涂等试样。



订货信息

产品编号	描述
20-1500	100-240 VAC/ 50-60 HZ, 单相
20-1551	出液管 (数量:100根)
20-1553	真空室内壁内衬 (数量:5张)
20-1555	真空室台面内衬 (数量:100张)

尺寸: 12.8in (325 mm) H X 19.2in (488 mm) D X 18.6in (472 mm) W
重量: 51lb (23 kg)

技术规格

	SimpliVac
真空腔直径	9.4 in (240 mm)
最大真空度	27.1 in Hg (-92 kPa)
最小真空度	-1.47 in Hg (-5 kPa)
30mm模杯最多放置个数	14 个
真空度保持最长时间	60 min
循环次数	10 次
压缩空气输入压力要求	≥ 0.6 MPa
电压	100-240 VAC/ 50-60 HZ, 单相
最大功率	25 W



亚洲总部-标乐中国
依工测试测量仪器(上海)有限公司
销售热线:400 111 8683
咨询邮箱:info.cn@buehler.com
官方网站:www.buehler.com.cn

标乐全球总部 - 美国
847-295-6500 | info@buehler.com

标乐公司德国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司法国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司英国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司中国办事处
info.cn@buehler.com

标乐公司日本办事处
info.japan@buehler.com

标乐公司亚太地区办事处
info.asia@buehler.com






SimpliVac™ 真空镶嵌设备




特氟龙涂层
保证树脂容易清理



优化的真空箱空间
当使用直径30mm的模杯时，
可以同时安装14个试样

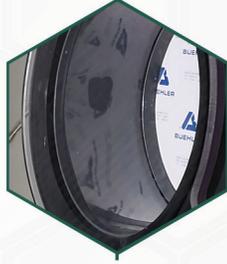


专利密封设计
保证产品生命周期内不漏气，不
需要涂油脂；通过透明盖，可清
晰观察模杯充入过程

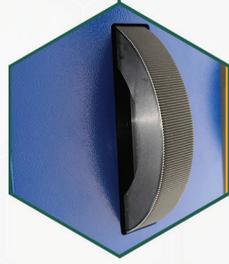

防模杯拨出的手轮设计
当快速手动旋转手轮时，真空腔内的模杯
旋转保持一个速度，保证树脂置于模杯内



多次抽真空循环
可以保证树脂浸入样品小孔内

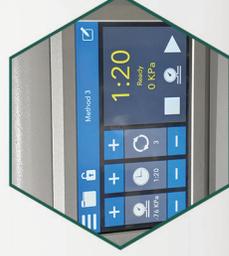

简洁触摸屏
设定并显示设定值、当前真空度
和时间，循环次数



专利旋钮设计
极其方便的控制树脂充入模杯
的速度



带有内衬
易于更换，保证内腔清洁

简洁、省力、可靠



Strong Partner, Reliable Solutions