

Smart-1 Smart-F1 全自动玻璃器皿清洗机





图示: smart-1

Smart实验室玻璃器皿清洗机

- 用于实验室多种材质器皿的清洗及烘干，如容量瓶，进样小瓶，广口瓶、三角瓶、量筒、比色管、移液管、试管等
- 材质：内腔316不锈钢,外壳304拉丝不锈钢或喷塑
- 外形尺寸:H/W/D [mm] 950×605×750
- 带有囊式过滤系统
- 余热烘干，配蒸汽冷凝器

国内较早研发实验室洗瓶机的团队 国内首家模具化生产实验室洗瓶机企业

技术参数

- 进水要求:自来水和实验室纯水
- 工作环境: 5-40℃
- 电源: 220V/380V
- 循环泵功率: 900W
- 一次成型不锈钢圆角内胆: 耐高温、耐腐蚀、易清洁
- 开机自检、LED显示、触摸控制、同步显示水温、运行时间、运行步骤等参数
- 具有10个标准程序和2个自定义程序保证满足用户的清洗要求
- 进水管带有电磁阀装置
- 带有囊式过滤系统
- 旋钮式选择程序，易于操作，清洗完成蜂鸣提示
- 仪器开门自动断电保护，让用户更安全的运用仪器
- 合理的喷洒臂设计，360度无死角



DZ-101

全注射式清洗篮架
容量瓶、进样小瓶、比色管、分液漏斗、蓝盖瓶、三角瓶等综合清洗



DZ-105

全注射式清洗篮架
容量瓶、比色管、分液漏斗、蓝盖瓶、三角瓶等综合清洗



DZ-111

全注射式清洗篮架
移液管专用清洗篮架



图示: smart-F1

Smart实验室玻璃器皿清洗机

- 用于实验室多种材质器皿的清洗及烘干，如容量瓶，进样小瓶，广口瓶、三角瓶、量筒、比色管、移液管、试管等
- 材质：内腔316不锈钢,外壳304拉丝不锈钢或喷塑
- 带有囊式过滤系统
- 抽屉式清洗剂储存方式
- HEPA热风干燥系统，可对清洗后的玻璃器皿进行彻底干燥（干燥温度及时间可调）
- 外形尺寸:H/W/D [mm]950×925×750

国内较早研发实验室洗瓶机的团队 国内首家模具化生产实验室洗瓶机企业

技术参数

- 进水要求:自来水和实验室纯水
- 工作环境: 5-40℃
- 电源: 220V/380V
- 循环泵功率: 900W
- 一次成型不锈钢圆角内胆: 耐高温、耐腐蚀、易清洁
- 开机自检、LED显示、触摸控制、同步显示水温、运行时间、运行步骤等参数
- 具有10个标准程序和2个自定义程序保证满足用户的清洗要求
- 进水管带有电磁阀装置
- 带有囊式过滤系统
- 旋钮式选择程序，易于操作，清洗完成蜂鸣提示
- 仪器开门自动断电保护，让用户更安全的运用仪器
- 合理的喷洒臂设计，360度无死角



图示: smart-F1



DZ-102

全注射式清洗篮架
容量瓶、进样小瓶、比色管、分液漏斗、蓝盖瓶、三角瓶等综合清洗



DZ-104

全注射式清洗篮架
容量瓶、比色管、分液漏斗、蓝盖瓶、三角瓶等综合清洗



DZ-112

全注射式清洗篮架
移液管专用清洗篮架

Smart-1 Smart-F1



下层篮架、上层篮架和组合篮架



ST-101

上层托架
专用托架, 适用不同的筐架



XT-101

下层托架
专用托架, 适用于不同的筐架



DZ-103

DZ-104

全注射式清洗篮架
适用于清洗容量瓶、比色管、试管等细颈玻璃器皿
单次清洗数量: ≥40位, 最大52位
适用于Smart1或Smart-F1



DZ-107

半注射式清洗篮架
适用于清洗容量瓶、比色管、三角瓶、蓝盖瓶、分液漏斗、试管、烧杯、量筒、广口瓶等细颈玻璃器皿
单次清洗数量: ≥17位, 最大25位. 另一半可选择性放置半篮架或四分之一篮架
带护爪。
适用于Smart1或Smart-F1



DZ-108

DZ-109

半注射式清洗篮架
适用于清洗容量瓶、比色管、分液漏斗、试管、烧杯、量筒、广口瓶和细颈玻璃器皿
单次清洗数量: ≥20位, 最大26位. 另一半可选择性放置半篮架或四分之一篮架
适用于Smart1或Smart-F1

DZ-110



XZ-103

XZ-104

下层全注射式清洗篮架
适用于液相气相进样小瓶、离心管等微小瓶皿的清洗
清洗数量: ≥96位 最大清洗量: 230位
适用于Smart1或Smart-F1



DZ-113

全注射式清洗篮架
专用于清洗环境监测吸收瓶的全注射式清洗篮架
单次清洗数量: ≥ 20位
最大清洗数量: 40位
适用于Smart1或Smart-F1



DZ-114

上层全注射式清洗篮架
全注射式喷淋管系统,每个喷淋管带护爪
可清洗容量瓶 (250ml以下)、三角瓶、圆底平底烧瓶、比色管等
清洗数量: ≥ 34位 最大: 50位
适用于Smart1或Smart-F1



SZ-101

SZ-102

SZ-103


SZ-104

上层全注射式清洗篮架
适用于液相气相进样小瓶、离心管等微小瓶皿的清洗
清洗数量: ≥ 96位 最大清洗量: 230位
适用于Smart1或Smart-F1



DZ-115

全注射式清洗篮架
适用于试剂瓶、采样瓶 (500ml/1000ml)
清洗篮架
单次清洗数量: ≥ 16位
适用于Smart1或Smart-F1

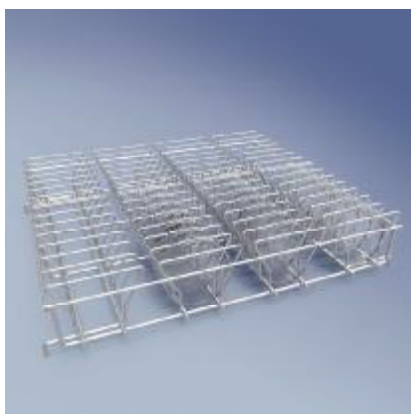

TXF-102

全筐架
可选用于清洗微生物实验室培养皿
清洗数量: 不低于56位
仅与TXF-101共同使用



TXF-101

全筐架
可选用于清洗微生物实验室培养皿
清洗数量: 不低于56位



杭州喜瓶者仪器技术有限公司

Hangzhou XPZ Instrument Technology Co., Ltd

地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号

电话：0571-81389966

售后：0571-88313236

传真：0571-88360630

邮箱：xpz@hzxpz.com

网址：www.hzxpz.com



扫码关注官方微信号