

ENIAC

100A型通用自动进样器

产品特点

- ◆ 可与多数品牌液相色谱仪、离子色谱仪配套使用。
- ◆ 独立可拆卸样品盘，大于100个样品位。
- ◆ 采用六通阀进样， $rsd < 0.3\%$ 。
- ◆ 独立的清洗位，可清洗进样针内外壁，清洗液实时更新，避免交叉污染。清洗时间可任意设置。
- ◆ 可编辑的样品测试序列，支持任意样品优先测试，支持不同样品不同测试次数，支持断点继续测试。
- ◆ 支持方法导入、导出，省去重复编辑样品序列时间。
- ◆ 动态的软件操作界面，可实时显示测试步骤。
- ◆ 状态指示灯，实时显示仪器运行状态。
- ◆ 独特的防扎针设计，错位后不影响后续的样品测试。




ENIAC

200A型通用自动进样器

产品特点

- ◆ 可与多数品牌ICP、ICP-MS配套使用。
- ◆ 样品位：200位以上。
- ◆ 工作过程中可以更换样品盘。
- ◆ 流动液洗针，避免交叉污染。
- ◆ 可选配快速进样附件。
- ◆ 可编辑的样品测试序列，支持任意样品优先测试，支持不同样品不同测试次数，支持断点继续测试。
- ◆ 支持方法导入、导出，省去重复编辑样品序列时间。
- ◆ 动态的软件操作界面，可实时显示测试步骤。
- ◆ 独特的防扎针设计，错位后不影响后续的样品测试。

ENIAC 全自动加液器

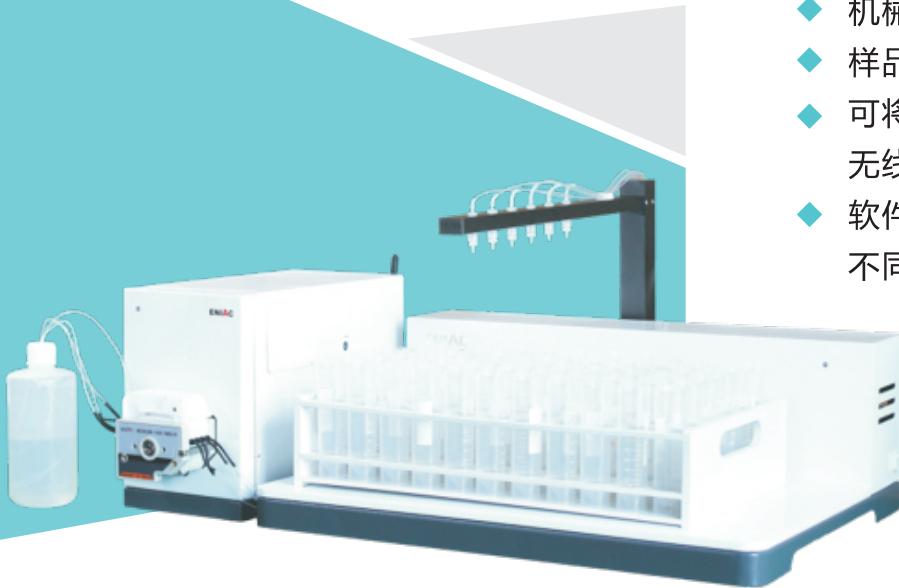

产品特点

- ◆ 采用多通道蠕动泵控制，可同时给多个容器加液，加液量可任意设置。
- ◆ 采用进口蠕动泵管，可耐王水。
- ◆ 机械臂经惰性处理，耐腐蚀。
- ◆ 样品架可根据实际容器规格进行定制。
- ◆ 可将仪器主机放入通风橱，通过手机App 无线控制。
- ◆ 软件具有手动、自动回收废液选项，方便不同客户选择。
- ◆ 手机App 与仪器WIFI断开后不影响仪器正常工作，重新连接可继续控制仪器。

适用范围：食品、环境、农业、地矿、水质、制药等行业。

加液种类：盐酸、硝酸、王水、有机溶剂、纯水等。

适用容器：各种消解罐、试管、烧杯、容量瓶、顶空瓶、样品瓶等等。

样品盘位：一次最多可放置54个消解罐，其他容器可定制专用样品架。

加 液 量：100ul-100ml

加液精度：rsd≤1%(5ml)

加液速度：6个消解罐加液5ml仅需38秒即可完成。

ENIAC 埃尼克仪器（北京）有限公司

地址：北京市顺义区高丽营镇文良街17号院3幢6层6009室
(科技创新功能区)

总机：010-83650995 022-85190266

邮箱：ENIAC2025@163.com



扫描二维码，了解更多信息