

thermo scientific



Powerful at every turn

Sorvall ST4 Plus 系列
通用台式离心机

ThermoFisher
SCIENTIFIC

持续创新

全新的 Thermo Scientific™ Sorvall™ ST4 Plus 系列通用离心机，为您提供创新，强大和可靠的样品制备体验。



强大

- 4 升容量，带水平转子
- 1.5 L 容量，带定角转子
- 最大 RCF：25,830 x g
- 12 个转子可用



可靠

- 可提供多种生物防护转子
- 自动锁定和自动转子识别
- 最新国际标准认证
- 5 年保修

水平转头



转头型号	TX-1000	TX-750	BIOShield 1000A	M-20
最大离心容量 (mL)	4 x 1000 mL	4 x 750 mL	4 x 250 mL	6 Microplates
最高转速 (rpm) ¹	4200 rpm	4700 rpm	5300 rpm	4000 rpm
最大 RCF (x g)	4122 x g	4816 x g	5590 x g	2272 x g
生物安全认证	✓ (选配)	✓ (选配)	✓ (选配)	✓ (选配)
Sorvall ST4 Plus	✓	✓	✓	✓
最大容量				
1000 mL Bio-离心瓶	4	-	-	-
750 mL Bio-离心瓶	4	4	-	-
500 mL Nalgene™ 离心瓶	4	-	-	-
500 mL Corning™ 离心瓶	4	4	-	-
250 mL Nalgene 离心瓶	8	4	4	-
250 mL Corning 离心瓶	4	4	-	-
225 mL - 175 mL 尖底离心瓶	8	4	-	-
50 mL 尖底离心管	40	28	16	-
50 mL 带裙边 尖底离心管	20	20	16	-
50 mL 离心管	48	28	-	-
30 mL Sterilin™ 通用离心管	28	28	16	-
15 mL 尖底离心管	96	56	36	-
10 mL 采血管 (16 x 100 mm)	148	84	64	-
5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	196	108	80	-
4.5/6 mL 采血管	164	108	-	-
1.5/2 mL 微量管	192	192	224	-
酶标板	24	16	-	6

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证
¹ 最高转速是在最高性能型号上实现的性能
 离心管大小非按真实大小比例显示

水平转头及其适配器




TX-1000 水平转头¹,
90°, R_{max} 209 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4R Plus	4200	4122
Sorvall ST4 Plus	3800	3374

¹ 转头, 吊篮及密封盖需分别订购

适配器

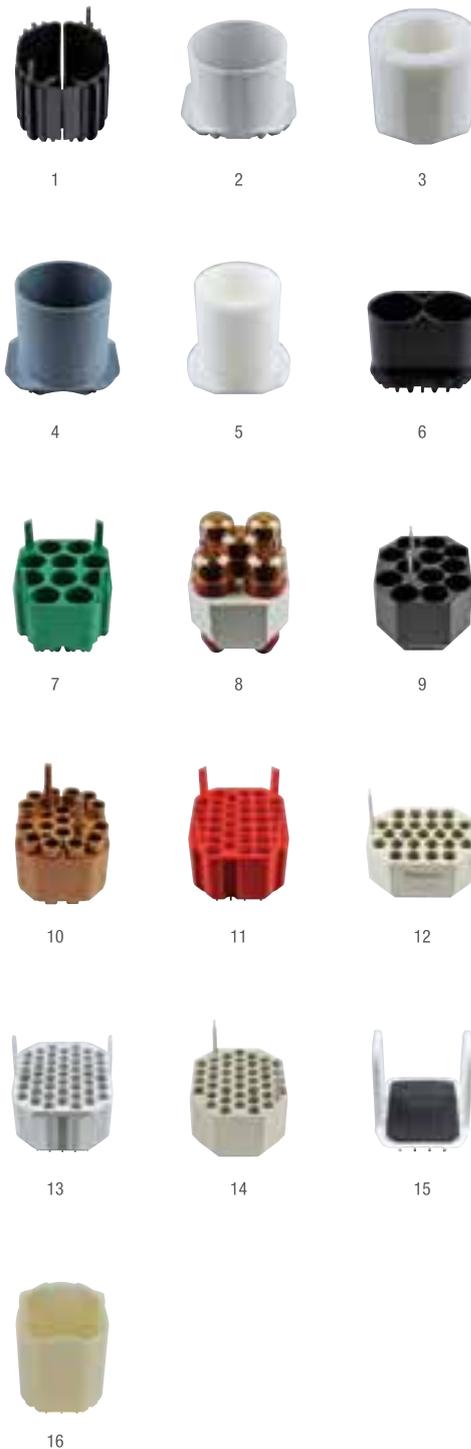

货号	适配器图	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件				
75003017		TX-1000 水平转头	4 x 1000 mL 或 24 块标准板	
75003001		TX-1000 吊篮 (4 个 / 套)		
75007309		TX-1000 ClickSeal 防生物污染密封盖 (4 个 / 套)		
75007001		备用 O- 型密封圈		
75007300		1000 mL Bio- 离心瓶 - 聚丙烯材质 (4 个 / 套)		
用于 TX-1000 水平转头的适配器 (4 个 / 套)				
75007301	1	1000 mL Bio- 离心瓶	4 x 1000 mL	126 x 140
75007304	2	750 mL Polypropylene Bio-Bottle and any TX-750 Round adapter	4 x 750 mL	98 x 133
75004253	3	500 mL Nalgene 离心瓶	4 x 500 mL	70 x 160
75007302	4	500 mL Corning 尖底离心瓶 (另需配 Corning #431124 适配器)	4 x 500 mL	98 x 133
75005392	5	250 mL Corning 尖底离心瓶或 200 mL Nunc™ 尖底离心瓶 175 mL Nalgene Conical Bottle	4 x 250 mL	62 x 145
75007305	6	250 mL Nalgene 离心瓶	8 x 250 mL	62 x 145
75007305	6	225 mL BD Falcon™ 尖底离心瓶 (另需配 BD #352090 适配器)	8 x 225 mL	62 x 130
75007305	6	200 mL Nunc 尖底离心瓶 (另需配 Nunc #377585 适配器)	8 x 200 mL	62.5 x 139
75007305	6	175 mL Nalgene 尖底离心瓶 (另需配 Nalgene #DS3126-0175 适配器)	8 x 175 mL	62 x 130
75003674	7	50 mL 尖底管	40 x 50 mL	30 x 120
75004255	8	50 mL 双重密封套筒, 用于 50 mL 尖底管 (可以和 ClickSeal 密封盖配合使用)	20 x 50 mL	30 x 120
75004252	9	50 mL Nalgene 圆底离心管	48 x 50 mL	29.5 x 120
75007306	10	15 mL 尖底管	96 x 15 mL	17.5 x 121
75003672	11	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 Corex™/Kimble™ 离心管	148 x 10 mL	17 x 110
75003697	12	9/10 mL 采血管 (Sarstedt™)	100 x 9/10 mL	17 x 110
75003671	13	5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	196 x 5/7 mL	14 x 110
75003709	14	4.5/6 mL 采血管 (Greiner™)	164 x 4.5/6 mL	14 x 110
75007303	15	酶标板载架	4 x 6 标准板或 4 x 2 深孔板	最大板高 < 88 mm
75003829	16	小血袋 / 细胞培养袋	4 x 2 袋	

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

水平转头及其适配器



TX-750 水平转头¹,
90°, R_{max} 195 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	4700	4816

¹ 转头, 吊篮及密封盖需分别订购

适配器



1 2 3



4 5 6



7 8 9



10 11 12



13 14 15



16 17

货号	适配器图	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件				
75003180		TX-750 水平转头		
75003608		TX-750 圆形吊篮 (4个/套)	4 x 750 mL	
75003609		TX-750 圆形吊篮 ClickSeal 防生物污染密封盖 (4个/套)		
75003610		TX-750 圆形吊篮密封盖备用 O-型密封圈 (4个/套)		
75006443		750 mL Bio- 离心瓶 - 聚丙烯材质 (1个/包)		
75003795	1	载架, 用于酶标板及 T-75 细胞培养瓶 (包括托盘及底衬) (2个/套)	4 块标准板或 (/ 载架)	最大板高 60 mm
75003617	1	载架, 用于酶标板及 T-75 细胞培养瓶 (包括托盘及底衬) (4个/套)		
用于 TX-750 水平转头的适配器 (4个/套, 除非另行注明)				
Direct		750 mL Bio- 离心瓶	4 x 750 mL	98 x 133
Direct		500 mL Corning 尖底离心瓶 (另需配 Corning #431124 适配器)	4 x 500 mL	98 x 133
75003792	2	250 mL Corning 尖底离心瓶 (仅用于非密封吊篮)	4 x 250 mL	62.5 x 139
75003710	3	250 mL Nalgene 离心瓶	4 x 250 mL	62.5 x 139
75003710	3	225 mL/175 mL BD Falcon 尖底瓶 (另需配 BD #352090 适配器) (仅用于非密封吊篮)	4 x 225 mL	62.5 x 139
75003710	3	200 mL Nunc 尖底瓶 (另需配 Nunc #377585 适配器) (仅用于非密封吊篮)	4 x 200 mL	62.5 x 139
75003710	3	175 mL Nalgene Conical Bottle (另需配 Nalgene #DS3126-0175 适配器) (仅用于非密封吊篮)	4 x 175 mL	62.5 x 139
75003713	4	100 mL 圆底开口管	8 x 100 mL	45 x 123
75003714	5	50 mL 尖底管 (包含密封套筒) 可以和 ClickSeal 密封盖一起使用	12 x 50 mL	30 x 120
75003638	6	50 mL 尖底管	28 x 50 mL	30 x 120
75003824	7	50 mL 尖底管或带裙边 尖底管	20 x 50 mL	30 x 120
75003715	8	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	28 x 50 mL	29.5 x 120
75003716	9	30 mL Sterilin 通用离心管	28 x 30 mL	25.5 x 120
75003639	10	15 mL 尖底管	56 x 15 mL	17 x 122
75003719	11	15 mL 采血管 (17 x 125 mm) (仅限内圈)	32 x 15 mL	17 x 134
75003719	11	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL Corex/Kimble 离心管	84 x 10/15 mL	17 x 117
75003718	12	14 mL 圆底或尖底 尿管	48 x 14 mL	18 x 124
75003723	13	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	108 x 5/7 mL	13 x 116
75003724	14	5 mL RIA 或圆底管 (不带盖)	148 x 5 mL	13 x 111
75003732	14	5/7 mL 圆底管 (不带盖) 带倾倒嘴	148 x 5/7 mL	13 x 111
75003733	15	1.5/2 mL 微量管	192 x 2 mL	11 x 50
75008383	16	T-75 Nunc Easy Flask 细胞培养瓶 (2个/套)	4 x T-75	-
75008384	17	T-25 Nunc Easy Flask 细胞培养瓶 (2个/套)	8 x T-25	-

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

水平转头及其适配器



TX-750 水平转头，
90°，R_{max} 195 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
ST4R Plus, 230V	4700	4816
ST4 Plus, 230V	4500	4415

适配器



1 2 3



4 5 6



7 8 9



10 11 12



13 14 15



16 17

货号	适配器图	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件				
75003180		TX-750 水平转头		
75003614		TX-750 矩形吊篮 (4 个 / 套)	4 x 250 mL	
75003615		TX-750 转头矩形吊篮 Click Seal 防生物污染密封盖 (4 个 / 套) ◆		
75003616		TX-750 转头矩形吊篮密封盖备用 O- 型密封圈 (4 个 / 套)		
用于 TX-750 水平转头的适配器 (4 个 / 套)				
75003737	1	250 mL 平底瓶	4 x 250 mL	63 x 130
75003738	2	150 mL 圆底开口管	4 x 150 mL	56 x 124
75003742	3	100 mL 圆底开口管	4 x 100 mL	46 x 124
75003685	4	50 mL 尖底管	20 x 50 mL	30 x 121
75003749	5	50 mL 圆底管	12 x 50 mL	35 x 121
75003750	6	45 mL 平底 / 圆底管	16 x 45 mL	30 x 121
75003755	7	30 mL Sterilin 通用管	16 x 30 mL	26 x 121
75003756	8	25 mL DIN 圆底管	24 x 25 mL	26 x 121
75003684	9	15 mL 尖底管	48 x 15 mL	17 x 120
75003758	10	14 mL 法兰圆底管	36 x 14 mL	18 x 121
75003759	11	14 mL 圆底或尖底尿管	36 x 15 mL	17 x 124
75003767	12	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL DIN 管	64 x 10/15 mL	17 x 118
75003768	13	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管	80 x 5/7 mL	14 x 118
75003769	14	5/7 mL 圆底管 (13 x 75-100 mm)	112 x 5/7 mL	13 x 119
75003770	15	1.5/2 mL 微量管	224 x 2 mL	11 x 50



BIOShield 1000A 水平转头，
90°，R_{max} 178 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	5300	5590

货号	适配器图	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件				
75003182		BIOShield 1000A 水平转头 ◆	4 x 250 mL	
用于 BIOShield 1000A 水平转头的适配器 (4 个 / 套)				
75003737	1	250 mL 平底瓶	4 x 250 mL	63 x 130
75003738	2	150 mL 圆底开口管	4 x 150 mL	56 x 124
75003742	3	100 mL 圆底开口管	4 x 100 mL	46 x 124
75003749	5	50 mL 圆底管	12 x 50 mL	35 x 121
75003750	6	45 mL 平底 / 圆底管	16 x 45 mL	30 x 121
75003755	7	30 mL Sterilin 通用管	16 x 30 mL	30 x 121
75003756	8	25 mL DIN 圆底管	24 x 25 mL	26 x 121
75003758	10	14 mL 法兰圆底管	36 x 14 mL	18 x 121
75003759	11	14 mL 圆底或尖底尿管	36 x 15 mL	17 x 124
75003767	12	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL DIN 管	64 x 10/15 mL	17 x 118
75003768	13	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管	80 x 5/7 mL	14 x 118
75003769	14	5/7 mL 圆底管 (13 x 75-100 mm)	112 x 5/7 mL	13 x 119
75003770	15	1.5/2 mL 微量管	224 x 2 mL	11 x 50
75003643	16	50 mL 尖底管	12 x 50 mL	30 x 121
75003642	17	15 mL 尖底管	36 x 15 mL	17 x 120

◆ 通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

水平转头及其适配器



M-20 水平转头¹,
90°, R_{max} 127 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	4000	2272

¹ 转头, 吊篮及密封盖需分别订购

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	最高板高
转头及配件			
75003624	M-20 酶标板转头, 含标准开放式载架	2 x 3 标准板	< 65 mm
75003625	ClickSeal 密封载架, 包括载架及密封盖	2 x 1 深孔板	< 45 mm
75002011	备用 ClickSeal 密封盖 (2 个 / 套)		
75002012	M-20 转头密封载架所用密封盖备用 O- 型密封圈		

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

角转头



转头型号	HIGHConic II	MicroClick 18 x 5	Fiberlite F21-48x2	Microliter 48 x 2	MicroClick 30 x 2	Microliter 30 x 2	Fiberlite F15-6x100y
最大离心容量 (mL)	6 x 100 mL	18 x 5 mL	48 x 2 mL	48 x 2 mL	30 x 2 mL	30 x 2 mL	6 x 100 mL
最高转速 (rpm ¹)	10350 rpm	15000 rpm	15200 rpm	15200 rpm	14000 rpm	15200 rpm	13000 rpm
最大 RCF (x g ¹)	15090 x g	24652 x g	25055 x g	25314 x g	21693 x g	25830 x g	18516 x g
生物安全认证	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sorvall ST4 Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最大容量	250 mL Nalgene 离心瓶	-	-	-	-	-	-
	85 mL Nalgene Oak Ridge 管	6	-	-	-	-	6
	50 mL Nalgene Oak Ridge 管	6	-	-	-	-	6
	50 mL 尖底管	6	-	-	-	-	6
	30 mL Nalgene Oak Ridge 管	6	-	-	-	-	6
	16 mL Nalgene Oak Ridge 管	6	-	-	-	-	6
	15 mL 尖底管	6	-	-	-	-	6
	10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	12	-	-	-	-	12
	10 mL 采血管 (16 x 100 mm)	-	-	-	-	-	-
	5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	-	-	-	-	-	-
	6.5 mL 圆底管	12	-	-	-	-	12
	5 mL 微量 / 尖底管	-	18	-	-	-	-
	1.5/2 mL 微量管	24	18	48	48	30 (Including spin columns)	30

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

¹ 最高转速是在最高性能型号上实现的性能
离心管大小非按真实大小比例显示

角转头及其适配器



Fiberlite F15-6x100y 角转头，
25°, R_{max} 98 mm

离心机	F15 转头 最高转速 (rpm)	F15 转头 最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	13000	18516

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75003698	Fiberlite F15-6 x 100y 转头, 适用 100 mL/85 mL Nalgene	6 x 100 mL	38 x 106
021-069031	备用 O- 型密封圈		
3118-0085	85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 (50 个 / 包)	6 x 85 mL	38 x 106
用于 F15-6 x 100y 转头的适配器 (1 个 / 套, 除非另行标注)			
75003102	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 50 mL	29.5 x 117
75003103	50 mL 尖底管	6 x 50 mL	30 x 121
75003094	30 mL Nalgene™ Oak Ridge 离心管 / 38 mL 圆底管	6 x 30 mL	26 x 110
76002906	16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 16 mL	18 x 123
75003095	15 mL 尖底管	6 x 15 mL	17 x 123
75003093	10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 / 12 mL 圆底管	12 x 12 mL	17 x 95
75003092	6.5 mL 圆底管	12 x 6.5 mL	13 x 114
75003091	1.5/2 mL 微量管	24 x 2 mL	11 x 40



HIGHConic II 铝合金角转头，
45°, R_{max} 126 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	10350	15090

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75003620	HIGHConic 角转头, 适用于 100 mL/85 mL Nalgene Oak Ridge 圆底管	6 x 100 mL	38 x 123
75003058	备用 O- 型密封圈		
3118-0085	85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 (50 个 / 包)	6 x 85 mL	38 x 106
用于 HIGHConic 转头的适配器 (1 个 / 套, 除非另行注明)			
75003102	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 50 mL	30 x 117
75003103	50 mL 尖底管	6 x 50 mL	30 x 121
75003094	30 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 / 38 mL 圆底管	6 x 30 mL	26 x 110
76002906	16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 16 mL	18 x 123
75003095	15 mL 尖底管	6 x 15 mL	17 x 123
75003093	10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 / 12 mL 圆底管	12 x 12 mL	17 x 95
75003092	6.5 mL 圆底管	12 x 6.5 mL	13 x 114
75003091	1.5/2 mL 微量管	24 x 2 mL	11 x 40



MicroClick 18 x 5 铝合金角转头，
45°, R_{max} 102 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	15000	24652

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75005765	18 x 5 MicroClick 转头, 用于 5mL 尖底管	18 x 5 mL	17 x 6
20059119	ClickSeal 密封盖	n/a	n/a
75005726	备用 O- 型密封圈	n/a	n/a
75003500	O- 型密封圈真空脂	n/a	n/a
用于 MicroClick 转头的适配器			
75005756	1.5/2 mL 微量管	18 x 5	11 x 45

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证



Fiberlite F21-48 x 2 微量角转头，
45°, R_{max} 97 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	15200	25055

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75003664	Fiberlite F21-48 x 2 转头, 用于 1.5/2 mL 微量管	48 x 2 mL	11 x 50
021-489021	备用 O- 型密封圈		



Microliter 48 x 2 铝合金微量角转头，
45°, R_{max} 98 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	15200	25314

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75003602	48 x 2 铝合金微量角转头, 适用于 1.5/2 mL 微量管	48 x 2 mL	11 x 50
75003349	备用 O- 型密封圈		



MicroClick 30 x 2 铝合金微量角转头，
45°, R_{max} 99 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	14000	21693

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75005719	30 x 2 MicroClick 微量角转头, 适用于 1.5/2 mL 微量管及带滤芯的过滤管	30 x 2 mL	11 x 50
75005726	备用 O- 型密封圈		



Microliter 30 x 铝合金微量角转头，
45°, R_{max} 100 mm

离心机	最高转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4 Plus	15200	25830

货号	产品描述	转头容量 (位数 x 体积, mL)	离心管规格 (Ø x L, mm)
转头及配件			
75003652	30 x 2 铝合金微量角转头, 适用于 1.5/2 微量管	30 x 2 mL	11 x 50
75003349	备用 O- 型密封圈		

通过 Public Health England, Porton Down, UK 生物安全认证

微量角转头适配器

货号	产品描述	离心管规格 (Ø x L, mm)
用于 Microliter 微量转头的适配器 (30 个 / 包)		
75005753	0.5 mL 微量管	8 x 44
75005754	0.25 mL 微量管	6 x 46
75005752	0.2 mL PCR 管	5 x 20

规格参数



	Sorvall ST4 Plus	Sorvall ST4R Plus
最大离心容量 (水平转子)		4 x 1,000 mL
最大离心容量 (定角转子)		6 x 100 mL
最高转速 (水平转子)		5,300 rpm
最大 RCF (水平转子)		5,590 x g
最高转速 (定角转子)		15,200 rpm
最大 RCF (定角转子)		25,830 x g
转子数		12
温度控制	-	-10~+40°C
用户界面	按钮和高清 LCD	
功能	6 个程序	
加 / 减速控制	9 / 10	
外观尺寸	W565xD588xH362 mm	W746xD670xH360 mm
重量	89 kg	120 kg
证书	EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15	
质保	5 年	

Sorvall ST4 Plus 订购信息 *

部件编号	产品名称
75009909	Sorvall ST4 Plus, 通风型, 230V 50/60Hz
75009924	Sorvall ST4R Plus, 冷冻型, 230V, 50/60Hz

* 一般用途。对于 IVD 和医疗设备, 请联系我们。

赛默飞世尔科技

上海

上海市浦东新区新金桥路 27 号 3,6,7 号楼
邮编 201206
电话 021-68654588*2570

生命科学产品和服务业务

上海市长宁区仙霞路 99 号 21-22 楼
邮编 200051
电话 021-61453628 / 021-61453637

北京

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 7 层 / 8 层
邮编 100013
电话 +86 10 8794 6888

广州

广州国际生物岛寰宇三路 36、38 号合景星辉广场北塔 204-206 单元
邮编 510000
电话 020-82401600

成都

成都市临江江西路 1 号锦江国际大厦 1406 室
邮编 610041
电话 028-65545388*5300

沈阳

沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 3109 室
邮编 110013
电话 024-31096388*3901

武汉

武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路生物医药园 C8 栋 5 楼
邮编 430075
电话 027-59744988*5401

南京

南京市中央路 201 号南京国际广场南楼 1103 室
邮编 210000
电话 021-68654588*2901

西安

西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦 1006-08 单元
邮编 710075
电话 029-84500588*3801

昆明

云南省昆明市五华区三市街 6 号柏联广场写字楼 908 单元
邮编 650021
电话 0871-63118338*7001

欲了解更多信息, 请扫描二维码关注我们的微信公众号

赛默飞世尔科技在全国有共 21 个办事处。本资料中的信息, 说明和技术指标如有变更, 恕不另行通知。



赛默飞
官方微信



实验室产品
和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC