

COLINTech®

成都科林分析技术有限公司

成都科林分析技术有限公司

CHENGDU COLIN ANALYSIS TECHNOLOGY CO., LTD.

www.colintech.com



TDC 20  
样品管活化仪


ISO9001

COLINTech®  
成都科林分析技术有限公司

地址: 成都市武侯区武科西一路85号鼎晟国际A2-3楼 / 邮编: 610041 / 传真: 028-85253094  
电话: 028-85260395 85230950 85253094 87032352 / http: www.colintech.com

www.colintech.com

## 发展历程

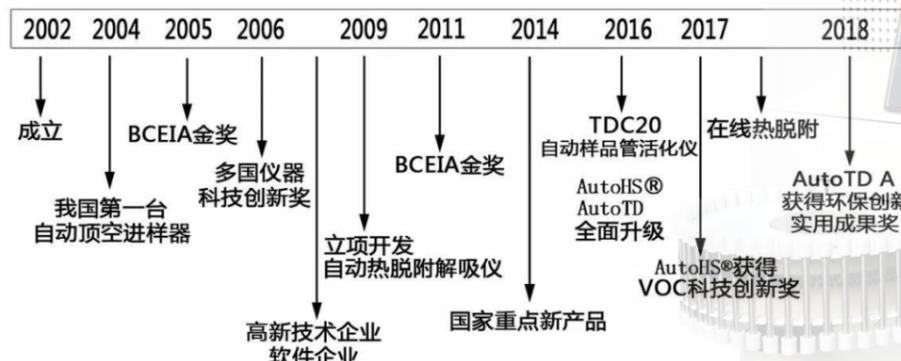

## Company introduction 公司简介

### 公司简介

成都科林分析技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于2002年，通过多年的自主创新和艰苦创业，现已发展成为一家集研发、生产、销售、服务一体化的科技型（高新技术）企业，并在分析仪器领域掌握了多项具有自主知识产权并居于国际前沿的创新技术。

2004年研制成功我国第一台自动顶空进样器：AutoHS®动态—静态双模式自动顶空进样器，并获得国家专利授权。2005年4月该项目通过科技成果鉴定，鉴定结论为“达到国际先进水平”。2005年10月该项目获得本行业最高奖——北京分析仪器报告会及展示会金奖（BCEIA金奖），同年获得国家创新基金无偿支助，2006年9月该项目获得2006多国仪器展最高奖—科技创新奖。至今该产品仍然是保持技术领先地位。

2008年本公司立项开发自动热脱附解吸仪，2010年完成样机测试并获得多项实用新型和发明专利授权，2011年4月经第三方—中国测试技术研究院测试，经鉴定达到国际先进水平，获得创新基金无偿支助，2011年获得BCEIA金奖。

2014年AutoTD A自动热脱附解吸仪获得国家重点新产品立项。

2018年AutoTD A自动热脱附解吸仪获得环保部颁发的实用创新成果奖。

## TDC 20

### 样品管活化仪

TDC 20样品管活化仪是高度自动化样品管容量从1到20自动选择的热脱附样品管清洗设备。能有效提高实验室工作效率、降低系统运行成本。

### 产品特点

- 一键启动完成样品管活化
- 样品管保护，没有载气或载气过低将停止加热
- 尾气排放（满载），有专门的尾气排放管接口，能避免样品管残留有毒物质对实验室人员的健康危害
- 样品管容量1到20自动选择
- 只需将样品管放置在气管架上推动气管架就可以完成装载并自动连接气路、自动打开气路，无需额外手动连接气路
- 标准样品吹扫、模拟采样过程
- 自动停止、自动冷却

### 技术参数

- 样品管容量：1-20 自动选择
- 国际标准样品管长度
- 温度范围：室温以上 400 °C
- 电源：220VAC 3A

