冷水机(冷却水循环装置)

HH 高温精密型

最高达80°C,实现土0.2°C稳定度的精确控制。

☑ 功能特点

- 低温控制型,温度范围控制在-20℃~80℃之间, 温度稳定性为±0.1℃,可实现精确控制, 性能参数经验验证,可靠性高。
- 修身与紧凑式设计,节约安装空间。
- 传统制冷压缩机通过一次次简单的开与闭控制系统, 实现控温,这样会减少压缩机的使用寿命。但是, Lab Companion 使用专有的技术实现制冷系统控制, 减少压缩机的开与闭的次数, 制冷系统的耐用性就提高很多。
- 两个备用阀,防止冷却剂泄露。
- 一体式风冷型制冷系统,方便安装。
- 冷凝器盘管易于清理, 使得制冷效率更高。
- 制冷系统采用环保的制冷剂。
- 可从机器正前方确认泵压力,方便随时掌握运转状态。
- 浴槽灌注口宽大,易于安装和维护。
- 标配移动式脚轮,方便安装和移动。

☑ 操作特点

- 连接外置温度感应器(选配),可实现精确控温。
- 连接电脑和使用专用软件,便于控制管理及数据处理。
- 两个备用阀,防止冷却剂泄露。
- 前置的控制面板可确认所有操作及运行状态。
- 同时显示设定值与当前值, 机器运行时可以变更设定值。
- 温度可手动补偿,提高可靠性。
- 制冷压缩机和泵可以独立控制开与关。
- 机器正前方配有LED背光式液位指示器, 方便确认浴槽溶液水位。
- 标配排水阀,易于维护。
- 超温保护功能。
- 连接LC Connected (移动设备监控系统), 可随时随地通过移动软件进行监控。 (购买LC GreenBox时)

☑ 安全特点

- 超温保护功能。
- 温度异常或浴槽溶液不足时,自动侦测和警报, 设备会继续运行,确保用户的实验可以正常进行。
- 电流过载及漏电保护。
- 控制器具有锁定功能,防止未经授权的操作。
- 压缩机运行时电流过载保护, 自动停机功能。
























☑ 泵容量

潜水泵

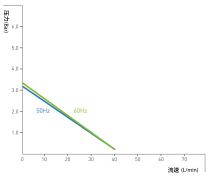

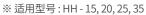

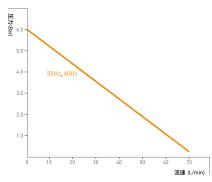

※ 适用型号: HH-45H,55H

技术参数

| 型号 | HH-15 | HH-20 | HH-25 | HH-35 | HH-45H | НН-55Н |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 内部尺寸 | | | | | | |
| 最大填充量 (L / cu ft) | 14 / 0.49 | 14 / 0.49 | 25 / 0.88 | 25 / 0.88 | 39 / 1.38 | 39 / 1.38 |
| 制冷容量 (HP) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 管道直径 (mm / inch) | 20 / (3/4") | 20 / (3/4") | 20 / (3/4") | 20 / (3/4") | 20 / (3/4") | 20 / (3/4") |
| 灌注进口 (Ø, mm / inch) | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 |
| 外部尺寸 | | | | | | |
| 宽 (mm / inch) | 515 / 20.3 | 515 / 20.3 | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | 605 / 23.8 | 605 / 23.8 |
| 深(包括排水阀), (mm / inch) | 645 (715) / 25.4 (28.1) | 645 (715) / 25.4 (28.1) | 830 (900) / 32.7 (35.4) | 830 (900) / 32.7 (35.4) | 975 (1045) / 38.4 (41.4) | 975 (1045) / 38.4 (41.4) |
| 高(包括盖子), (mm / inch) | 800 (835) / 31.5 (32.9) | 800 (835) / 31.5 (32.9) | 975 (1045) / 38.4 (41.1) | 975 (1045) / 38.4 (41.1) | 1265 (1300) / 49.8 (51.2) | 1265 (1300) / 49.8 (51.2) |
| 重量 (kg / lbs) | 92 / 202.8 | 93 / 205 | 142 / 313 | 147 / 324 | 171±10 / 377±20.1 | 176±10 / 388±20.1 |
| 温度参数 | | | | | | |
| 工作温度范围 (℃ / °F) | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 |
| 温度稳定度在15℃(±℃/℉) | 0.1 / 0.2 | 0.1 / 0.2 | 0.1 / 0.2 | 0.1 / 0.2 | 0.1 / 0.2 | 0.1 / 0.2 |
| 加热功率 (kW) | 2 | 2 | 4 | 4 | 8.4 | 8.4 |
| 制冷功率,最大 | ' | · | · | | | |
| 在20°C时 (kW) | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 3 | 5 | 6.5 |
| 在 0°C时 (kW) | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.1 |
| 在 -20°C时 (kW) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 |
| 泵的压力 | | | | | | |
| 最大流量 (L / min, gal / min) | 40 / 10.6 | 40 / 10.6 | 40 / 10.6 | 40 / 10.6 | 70 / 18.5 | 70 / 18.5 |
| 最大压力 (bar / psi) | 3.3 / 47.9 | 3.3 / 47.9 | 3.3 / 47.9 | 3.3 / 47.9 | 6 / 87.02 | 6 / 87.02 |
| 电源要求&订货信息 | | | | | | |
| 230V, 60Hz, A | 15 | 16 | 27 | 31 | | |
| 货号 | AAH67011K | AAH67021K | AAH67031K | AAH67041K | - | - |
| 230V, 50Hz, A | 14.5 | 15.5 | 25 | 30 | | |
| 货号 | AAH67012K | AAH67022K | AAH67032K | AAH67042K | - | - |
| 380V, 60Hz, A | | | | | 18.3 | 19.8 |
| 货号 | - | - | - | - | AAH67159K | AAH67169K |
| 380V, 50Hz, A | | | | | 17.8 | 19.3 |
| 货号 | - | - | - | - | AAH67158K | AAH67168K |

- *技术参数符合DIN 12876标准。
 *温度稳定度/制冷功率/泵测试数据的浴液:水,制冷功率测试数据的浴液:乙醇。
 *以上参数由230v 60Hz(HS-45H,55H为380v 60Hz)电源条件下测得。
 *产品性能可能受到环境温度的影响。
 *在空载运行条件下,冷却能力应低于加热能力。



选配件 页数 44 LC GreenBox, 倒刺转接头, 连接器, 适配器, 尿烷管, 卡箍

选配件

可靠性和重复性经过验证

可靠性和重复性经过验证

- ◆ 符合安全要求,包括冷水机的电气安全标准。
- ◆ 设备性能测试流程符合每个标准,确保可靠的产品性能。
- ◆ 提供各项经过验证的测试参数,方便用户选择合适的型号。



倒刺转接头

| 货号 | 描述 | | | |
|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| 00HXE0001066 | 3/4" 外螺纹和适用管内径为 1" 的倒刺转接头 | | | |
| 00HXE0001067 | 3/4" 外螺纹和适用管内径为 3/4" 的倒刺转接头 | | | |
| 00HXE0001068 | 3/4" 外螺纹和适用管内径为 5/8" 的倒刺转接头 | | | |
| 00HXE0001069 | 3/4" 外螺纹和适用管内径为 1/2" 的倒刺转接头 | | | |
| 00HXE0001070 | 3/4" 外螺纹和适用管内径为 3/8" 的倒刺转接头 | | | |
| AAA64501 | 带球阀的 1" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64502 | 带球阀的 3/4" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64503 | 带球阀的 5/8" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64504 | 带球阀的 1/2" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64505 | 带球阀的 3/8" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64506 | 带闸门阀的 1" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64507 | 带闸门阀的 3/4" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64508 | 带闸门阀的 5/8" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64509 | 带闸门阀的 1/2" 的套装倒刺转接头 | | | |
| AAA64510 | 带闸门阀的 3/8" 的套装倒刺转接头 | | | |
| | | | | |



倒刺转接头

- ·可连接各种管道配件。
- · 无需任何工具,适合管配件, 管接头和软管接头。

连接器/适配器

| 货号 | 描述 |
|--------------|------------------------|
| 00HXE0001105 | 3/4" 外螺纹和 3/4" 内螺纹转换接头 |
| 00HXE0001106 | 3/4" 外螺纹和 5/8" 内螺纹转换接头 |
| 00HXE0001107 | 3/4" 外螺纹和 1/2" 内螺纹转换接头 |
| 00HXE0001108 | 3/4" 外螺纹和 3/8" 内螺纹转换接头 |
| 00HXE0001109 | 3/4" 外螺纹和 3/4" 外螺纹转换接头 |
| 00HXE0001110 | 3/4" 外螺纹和 5/8" 外螺纹转换接头 |
| 00HXE0001111 | 3/4" 外螺纹和 1/2" 外螺纹转换接头 |
| 00HXE0001112 | 3/4" 外螺纹和 3/8" 外螺纹转换接头 |




连接器/适配器

·连接水管和其它装置。

快插式转接头

| 货号 | 描述 | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|
| 00HXE0001075 | 12 mm 快插式转换接头 | ID 9.0 mm, OD 12.0 mm | |
| 00HXE0001076 | 10 mm 快插式转换接头 | ID 6.5 mm, OD 10.0 mm | |
| 00HXE0001077 | 8 mm 快插式转换接头 | ID 5.5 mm, OD 8.0 mm | |
| 00HXE0001078 | 6 mm 快插式转换接头 | ID 4.0 mm, OD 6.0 mm | |
| AAA64531 | 带球阀的 12 mm 套装快插式转换接头 | | |
| AAA64532 | 带球阀的 10 mm 套装快插式转换接头 | | |
| AAA64533 | 带球阀的 8 mm 套装快插式转换接头 | | |
| AAA64534 | 带球阀的 6 mm 套装快插式转换接头 | | |

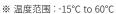



快插式转接头

·硬管连接或更换方便。

挠性转换接头

| 货号 | 描述 | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| 00GBA0008589 | 3/4" 外螺纹和 3/4" 内螺纹挠性转接头 | | | |
| 00HXE0001072 | 3/4"外螺纹(配1/2"外螺纹接头)和1/2"内螺纹(配1/2"内螺纹接头)挠性转接头 | | | |
| AAA64521 | 带球阀 3/4" 的套装挠性转接头 | | | |
| AAA64522 | 带球阀 1/2" 的套装挠性转接头 | | | |
| AAA64523 | 带球阀 3/4" 挠性接头配有闸门阀 | | | |
| AAA64524 | 带球阀 1/2" 挠性接头配有闸门阀 | | | |



挠性转换接头

·采用不锈钢材质转接头。

尿烷管

| 货号 | 描述 | | |
|--------------|--|------------------------|--|
| 00HXE0001079 | 1 米长和 12 mm 口径的尿烷管 | ID 9.0 mm, OD 12.0 mm | |
| 00HXE0001080 | 1 米长和 10 mm 口径的尿烷管 | ID 6.5 mm, OD 10.0 mm | |
| 00HXE0001081 | 1 米长和 8 mm 口径的尿烷管 | ID 5.5 mm, OD 8.0 mm | |
| 00HXE0001082 | 1 米长和 6 mm 口径的尿烷管 | ID 4.0 mm, OD 6.0 mm | |
| 00HXE0001083 | 1 米长和口径为 1" 带玻璃纤维的PVC管 | ID 25.0 mm, OD 31.0 mm | |
| 00HXE0001084 | 1 米长和口径为 3/4" 带玻璃纤维的PVC管 | ID 19.0 mm, OD 24.0 mm | |
| 00HXE0001085 | 1 米长和口径为 5/8" 带玻璃纤维的PVC管 | ID 16.0 mm, OD 20.5 mm | |
| 00HXE0001086 | 1 米长和口径为 1/2" 带玻璃纤维的PVC管 | ID 12.0 mm, OD 16.0 mm | |
| 00HXE0001087 | 1 米长和口径为 3/8" 带玻璃纤维的PVC管 | ID 10.0 mm, OD 14.0 mm | |
| 00HXE0001088 | 1 米长和口径为 1" 带金属丝的PVC管 | ID 25.0 mm, OD 33.0 mm | |
| 00HXE0001089 | 1 米长和口径为 3/4" 带金属丝的PVC管 | ID 19.0 mm, OD 26.0 mm | |
| 00HXE0001090 | 1 米长和口径为 5/8" 带金属丝的PVC管 | ID 15.0 mm, OD 22.0 mm | |
| 00HXE0001091 | 1 米长和口径为 1/2" 带金属丝的PVC管 ID 12.0 mm, OD 18.0 mm | | |
| 00HXE0001092 | 1 米长和口径为 3/8" 带金属丝的PVC管 ID 9.0 mm, OD 15.0 mm | | |

※ 温度范围:-15℃ to 60℃

绝缘管

| 货号 | 描述 |
|--------------|------------------------------|
| 00FEA0001453 | EPDM 绝缘管, 25 mm 的倒刺转接头 (13T) |

挠性管

| 货号 | 描述 |
|--------------|------------|
| 00HXE0001128 | 3/4" 口径挠性管 |
| 00HXE0001074 | 1/2" 口径挠性管 |

卡箍

| 货号 | 描述 |
|--------------|---------|
| 00HXE0001098 | 1" 卡箍 |
| 00HXE0001099 | 3/4" 卡箍 |
| 00HXE0001100 | 5/8" 卡箍 |
| 00HXE0001101 | 1/2" 卡箍 |
| 00HXE0001102 | 3/8" 卡箍 |

分散式倒刺转接头

| 货号 | 描述 |
|----------|--------------------|
| AAA64541 | 3路分散式倒刺转换接头 (1/4") |
| AAA64542 | 3路分散式倒刺转换接头(3/8") |

LC GreenBox

| 货号 | 型号 | 描述 | 尺寸 (W x D x H, mm / inch) |
|----------|--------|--------|---------------------------------|
| AAAQ1011 | HS, HH | 移动监控系统 | 156 x 94 x 34 / 6.1 x 3.7 x 1.3 |



尿烷管

- ·比PVC水管柔韧性强。
- ·具有超强的抗热和抗腐蚀性。



绝缘管

- · 采用EPDM材质,耐燃性/抗氧化性较强。
- ·在低温下,柔韧性良好。



卡箍

·防腐蚀,防熔化的不锈钢夹具。



分散式倒刺转接头

·可同时与多个水管连接。



LC GreenBox

·连接LC GreenBox(移动设备监控系统), 可随时随地通过移动APP进行监控。