



触屏

定时运行

程序设置



触屏

### 技术参数

最大搅拌量 (H<sub>2</sub>O)

电机输入/输出功率

电机原理

速度控制

外形尺寸

重量

转速范围

数字显示

定时运行

程序设置

D-1 (手持型)

0.1-500 ml

145/95 W

-

-

50×245mm

0.9 kg

3,000-30,000rpm

-

-

-

D-4 (数显型)

0.1-2000 ml

450/360 W

BLDC motor

PID

72×137×140mm

2.2 kg

3,000-30,000rpm

LED TFT

-

-

D-4P (强力型)

0.1-5000 ml

450/360 W

BLDC motor

PID

72×157×140mm

2.8 kg

1,500-15,000rpm

LED TFT

-

-

D-9 (大功率型)

0.1-20000 ml

950/760 W

BLDC motor

PID

92×183×177mm

4.2 kg

3,000-25,000rpm

LED TFT

是

是

### 套装包含

D-1 主机

PS30 支架

PS10 转夹头

刀头 (按应用选择)

D-4 主机

PS30 支架

PS10 转夹头

SK200 容器固定夹

刀头 (推荐20mm刀头)

D-4P 主机

PS30 支架

PS10 转夹头

SK200 容器固定夹

刀头 (推荐30mm刀头)

D-9 主机

HS500T H型升降支架

PS50 转夹头

SK200T 容器固定夹

刀头 (推荐40mm刀头)

多款型号，处理范围从0.1-20000ml，低噪音运行。

通用性广，适合医药、食品、日化、化工、材料等领域。

## 无刷直流马达

无刷直流马达，无碳粉产生，避免样品污染；

无电火花，使用安全、噪音低，免维护；

PID转速恒定系统：粘度变化，内部补偿稳定马达转速；

内置安全回路，过载、过热自动保护，无忧连续运行。

## LED数字显示

LED数字显示，可同时显示设定转速、实时转速及运行时间；触屏操作，定时运行，程序设置。

## 任意主机配合任意刀头使用

快速拆换系统：所有元件、转子和定子只需轻轻松开，就可实现快速更换。



数显无刷

无碳粉污染

刀头灵活选择

三年保修

## 典型刀头 (其他刀头另请咨询)

刀头使用高品质316L不锈钢。易于清洗、持久耐用。

### DS-5/P


定子外径: 5mm  
处理量: 0.1-20ml



用于处理微量样品, 试管刀头

### DS-20/PC-CMIR


定子外径: 20mm  
处理量: 20-5000ml

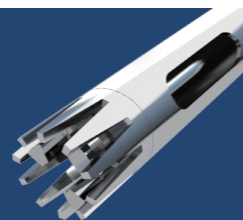

用于纤维剪切, 如肉类、植物等样品, 也可用于小批量、粘稠样品的均质分散

### DS-20/PG-SMIR


定子外径: 20mm  
处理量: 20-5000ml

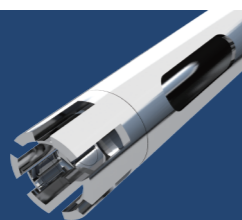

通用性多合一刀头

### DS-20/PF-EMR


定子外径: 20mm  
处理量: 20-3000ml

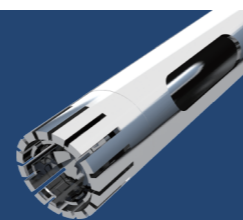

用于油水乳化包裹, 如疫苗等

### DS-30/PGH-PMIR


定子外径: 30mm  
处理量: 500-10000ml

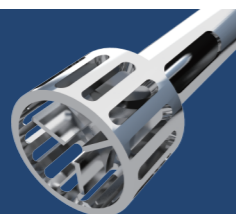

用于膏霜类样品的均质, 粉液的溶解、均质

### DS-40/PMH-PMIR

定子外径: 40mm  
处理量: 1000-10000ml

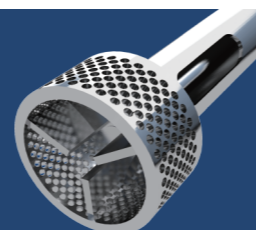

用于流动性较好糊状样品的均质乳化

## 配件



SK200



PS30



HS500



HS500T



LS800T

广州市巨璟仪器有限公司

广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技产业园G3栋430-432室  
Tel: 020-887876934  
E-Mail: jujingyiqi@.163com www.jujingyiqi.com



# 实验室分散机

MICCRA  
UHS-RS TECHNOLOGY

- 数显恒速
- 无刷电机
- 不污染样品



低噪音设计

日化/制药/食品/化工/材料 等领域均适用

