

六通道同步进行、稳定高效  
适用于：

土壤、沉积物  
食品、农产品  
药品、保健品

## HSE806 快速溶剂萃取仪

土壤有机检测完美组合



96个样品  
八小时即可处理完

**ATR**<sup>®</sup>

力德生物科技（上海）有限公司  
联系电话：021-52680862

# HSE-806 快速溶剂萃取仪

## 优质

仪器采用高温高压萃取技术，对常见溶剂加温加压下提取样品，快速有效萃取，减少溶剂损耗。

## 高效

仪器采用平行萃取模式，30分钟内可同时萃取6个通道样品，8小时可处理多达96个样品。

## 安全

仪器采用聚四氟乙烯泛密封方式，确保高压不漏液。




- 仪器采用六通道设计，激光微孔技术可确保各通道平行性，萃取池支持 10mL、22mL、34mL、40mL、60mL、66mL、80mL、100mL、120mL 规格，可根据客户需求定制。
- 样品收集瓶可选多种规格，60mL 顶空瓶，150mL 细口瓶，250mL 细口瓶，350mL 细口瓶，均可根据客户需求定做。
- 四通道比例阀，支持四种溶剂自由混合。
- 收集杯可根据浓缩仪样品支架定制，可直接放进样品浓缩仪中进行浓缩，不需要单个转移样品。
- 具有过压监控功能，软件界面可实时显示每个通道压力数值变化。

# 技术参数

## 快速溶剂萃取仪参数一览表：

通道数	六通道
液相泵	1-100mL/min
流量精度	±2%
压力范围	3-200bar; 0.3-20mpa 各通道独立测压
压力精度	±5bar; ±0.5mpa
温度范围	室温-220℃
控温精度	±2℃
比例阀通道	四通道
比例阀混合精度	±2%
氮气入口压力	6-10bar; 0.6-1.0mpa
最大功率	1800 瓦 10A

## 操作流程

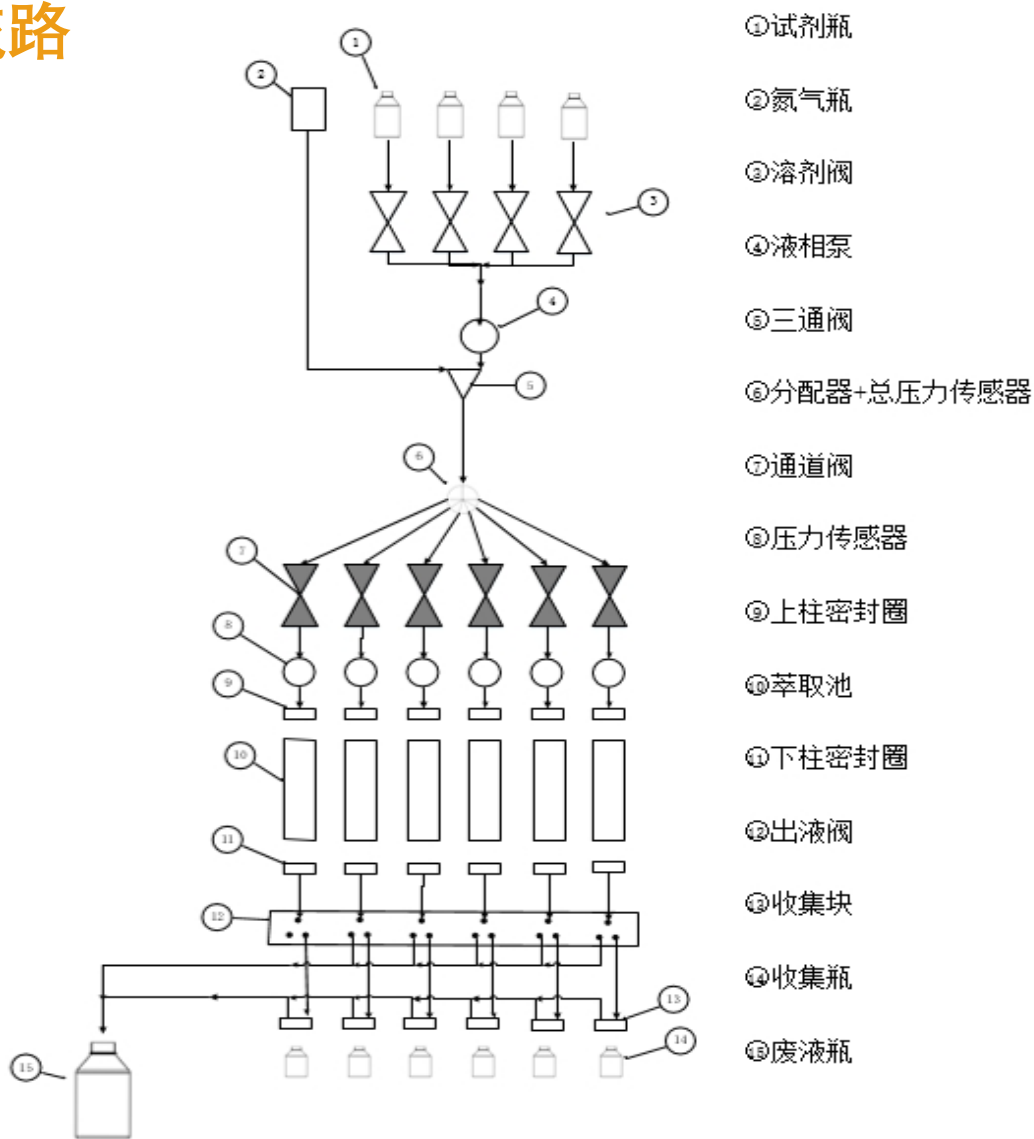

# AutoVap S8 Plus 全自动定量浓缩仪



- 可同时浓缩 12 个样品，也可单独控制每个样品
- 独立的光学探头精确控制每个样品的定量体积
- 样品浓缩体积为 0-100ml
- 0.5 ml 或 1.0 ml 自动终点感知
- 温度控制：室温—99℃
- 浓缩速率是一般氮吹仪的 3-5 倍
- 样品回收率稳定保证 90%以上

# AutoPro SPE 200 全自动固相萃取仪

---- 水样、食品、农产品药品、土壤净化

- 2 通道全自动固相萃取仪，可同时处理 2 个样品，连续不间断处理 20/22 个样品
- 萃取的单一样品体积为 0-100ml，也可拓展处理达数升的大体积水样
- 适用萃取小柱：1ml/3ml/6ml/12ml/20ml 标准小柱
- 柱子的活化、萃取、洗脱，流路的洗涤等过程能够通过设定的程序全自动完成，无须人工介入
- 仪器中推动液体经过萃取柱的泵是高精密注射泵，不会引起堵塞
- 双针进样，自动清洗取样针，自动收集，完全独立不互相干扰



力德生物科技（上海）有限公司

地址：上海市中春路 1288 号金地科创园 6 号楼东区三层

电话：021-52680862

网址：[www.lideshengwu.com](http://www.lideshengwu.com)