

为元素分析实验提供前处理解决方案

产品中心

PRODUCT CENTRE

您的位置：首页 > 产品展示 > 石墨消解仪

请输入关键词


产品展示

- 全自动消解仪
- 石墨消解仪**
- 尿碘消解仪
- 赶酸仪
- 陶瓷电热板
- 石墨电热板
- 微波消解仪
- 氮吹浓缩仪
- 索氏提取仪
- 凯氏定氮仪
- 加热套

自 解决方案

- 土壤中铅元素的测定用 D4智能石墨消解仪四...
- D6智能石墨消解仪处理小麦、玉米、糙米消...
- G8全自动石墨消解仪消解土壤测定七大元素
- 实验电热板王水消解样品法-测定喀什郊区土...
- 石墨消解仪-马奶的消解

联系格丹纳

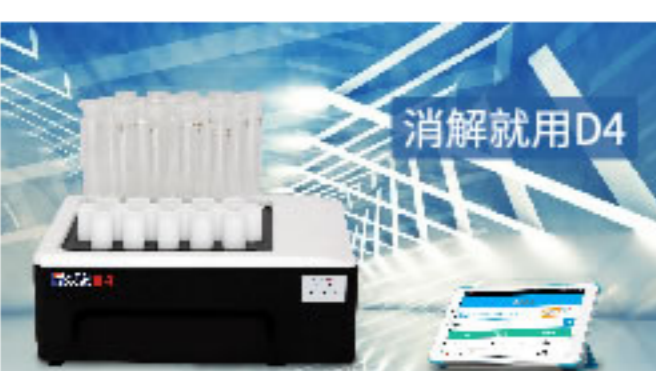

广州格丹纳仪器有限公司

地址：广州开发区科园路2号4栋5楼
 产品咨询：13392693259
 耗材电话：020-87684303
 售后服务：020-87684117
 传真：020-87684846
 Email：info@gdana.com
 网址：http://www.gdana.com/



DS-360-42H高温石墨消解仪 (42位)

DS-360-42H石墨消解仪采用高纯石墨材料作为加热体，包裹式加热，效率更高，温度均匀性更好；多孔设计，轻松实现样品的批量处理，是您样品消解的好伴侣。



在线咨询

分享到：

- 产品介绍
- 使用方法
- 安全事项

DS-360-42H石墨消解仪采用高纯石墨材料作为加热体，包裹式加热，效率更高，温度均匀性更好；多孔设计，轻松实现样品的批量处理，是您样品消解的好伴侣。

产品参数 Product Parameters

消解孔数	控温范围	测温方式	控制方式
42孔	常温~415℃	内置测温，可选外置	无线蓝牙控制
加热材质	联机方式	仪器台面	消解管长度
高纯石墨	可控八台仪器	聚四氟乙烯面板	10.5cm
控温精度	消解孔径	消解孔深	产品尺寸
±0.2℃	3cm	6cm	60LX36.5WX18.8H cm

产品特点 Product Advantage

无线蓝牙技术，控制更智能

使用mini平板(PAD)蓝牙控制技术，真彩触摸屏，仪器内部无需任何接插件和开关，便可轻松的实现温度控制，让您的工作充满时尚、自由和畅快。

均衡、包裹式加热，消解效率更高

高纯石墨体具有良好的导热性，为所有样品提供均匀的热量，消除了加热盲点。立体包裹式加热，热量损失更少，效率更高，弥补了电热板加热的不足。

多孔设计，处理量倍于微波消解

批量处理，整体时间大大缩短；标配42孔，一次可处理 4200ml液体样品；可定制56孔、72孔或90孔，处理量倍于微波消解仪；常压式消解仪更安全更快捷。

高品质工艺，维护操作简单

高纯石墨作为加热体，耐腐蚀；聚四氟乙烯台面，整机外围防腐处理，可在强酸强碱等恶劣环境中放心使用。

安卓系统，时尚，功能强大

采用先进的专家PID温控系统，独特的可视化监控，用户可通过PDA界面清楚的看到整个消解过程中的各项参数：消解时间、保持时间、当前温度等，用户可以根据不同的样品自行编辑并保存消解方法。

真实的样品温度

可选配外置温度探针，保证了样品的真实温度，使样品消解更加到位。

推荐产品

G6全自动石墨消解仪 (36位)

D4智能石墨消解仪 (39位)

HT-300实验电热板

也许您还想了解

输入搜索内容



全自动消解仪 | 石墨消解仪 | 尿碘消解仪 | 赶酸仪 | 陶瓷电热板 | 石墨电热板 | 微波消解仪 | 氮吹浓缩仪 | 索氏提取仪 | 凯氏定氮仪 | 加热套 |



全国统一服务热线：

13392693259

扫描二维码

关于格丹纳

- 企业简介
- 组织架构
- 公司事迹
- 企业文化
- 公司荣誉

产品展示

- 全自动消解仪
- 石墨消解仪
- 尿碘消解仪
- 赶酸仪
- 陶瓷电热板
- 石墨电热板
- 微波消解仪
- 氮吹浓缩仪
- 索氏提取仪
- 凯氏定氮仪
- 加热套

应用领域

- 土壤/沉积物
- 固体废弃物
- 环境检测
- 食品检测
- 工业品检测
- 解决方案

新闻资讯

- 石墨消解应用
- 电热板消解应用
- 行业动态
- 公司新闻

联系格丹纳

- 联系方式
- 在线地图

友情链接：

直读光谱仪 | 0460网站之家 | 测汞仪价格 | 南北湖商城 | 氮吹浓缩仪 | 管式电炉 | 消解仪 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 中国化工仪器网 | 纸卷夹 | AGV小车 | 卧螺离心机 | 细砂回收机

分享到：

