

JHY50 视频油脂熔点仪



提高效率创新点:

- *1: 带制冷系统, 一次处理 3 个样品;
- *2: PID 精确控温, 自带制冷系统;
- *3: 可录制并回放实验过程, 不错过每个细节;
- 4: 完全符合国标及 ISO 中油脂熔点的测定方法。

视频油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定 2-3 个样品。仪器自带升温系统, 可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高, 比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势。

标准: 符合 SNT0801.5-2015、GB/T24892-2010、SNT 0801.5-1999 、GBT127662008 标准

技术参数

温度显示范围: 0-100℃

*控温范围: (RT-20)-100℃

温度分辨率: 0.1℃

*升温梯度: 0.1℃-10℃/分钟

*冷却速率: 半导体降温

*温度精确度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\sim 100^{\circ}\text{C}$);

重复性: 0.1℃/Min 时熔点重复性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

检测方式: 半自动 (自动控温, 手动检测)

处理能力: 3 个/批 (同时可以做三个样)

*视频功能: 拍照 摄像

视频回放: 有

用户管理: 有

用户管理个数: 8 个

数据保存: 400

存储空间: 8G

显示方式: TFT 高清真彩屏

电脑接口: USB RS232 网口

可使用毛细管: 外径 1.4mm, 内径 1.0mm, 长 100mm (单、双开口)

外径 4.0mm, 内径 3.8mm, 长 800mm (大毛细管)

包装尺寸: 430*320*370mm

电 源: 110-230V 50/60HZ 120W

毛重: 6.15kg

加热水浴

采用铂金温度传感器，独特的水浴加热设计，加热速率 0.1-10°C/min。温度显示范围是 0~100°C，控温精度为 0.1°C，响应速度快、精确度高，可获得更准确的实验结果。

水浴池采用玻璃管，防止结垢及生锈，易于清洁，延长了寿命。



开机后，会自动将温度快速预热到用户设定的初始温度。

专业软件

实验结果可自动生成实验报告并保存，随时可以打印。实验过程自动被录制保存到 SD 卡中，SD 卡空间不足时，会提示用户转移或清空数据。

用户可通过软件中的窗口随时观察实验过程，也可以通过录像回放，改变播放速度，更好地观察实验的细节。软件界面友好，简单易用，各种参数一目了然。

测试细节

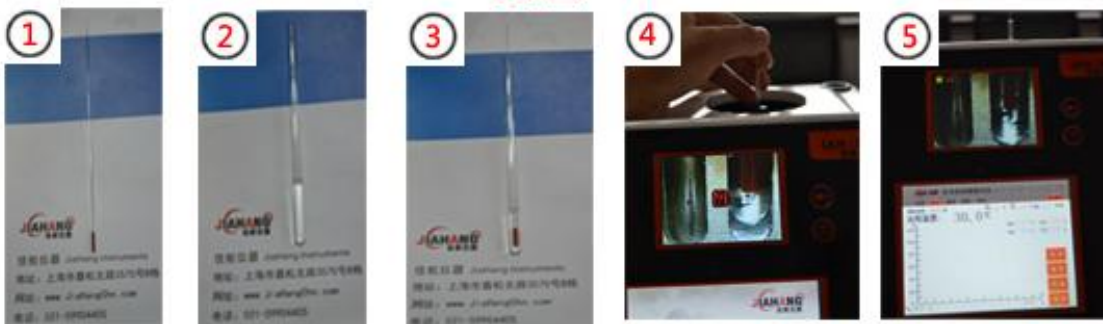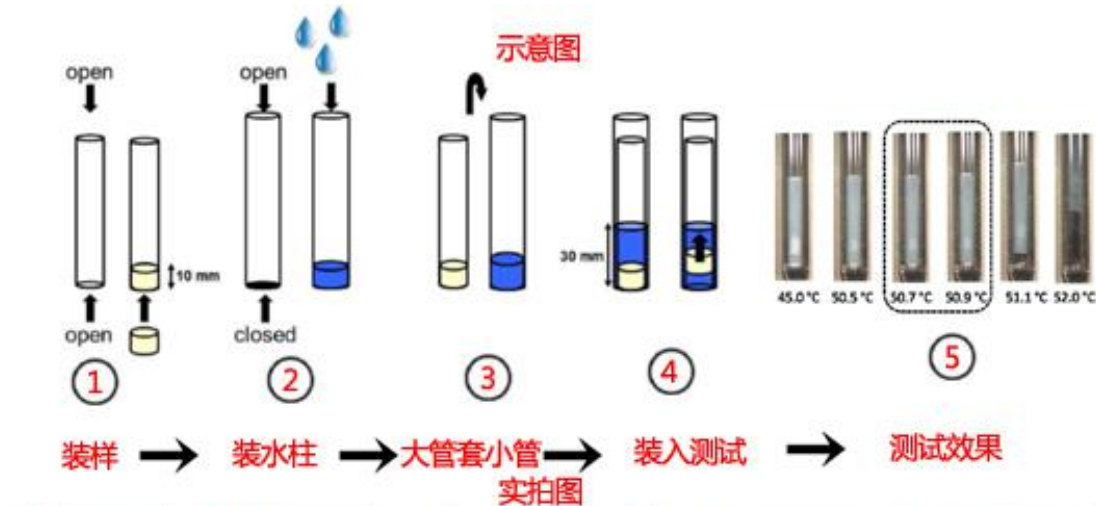

上海佳航仪器仪表有限公司

地址: 上海市嘉定区嘉松北路 3570 号 B 栋

电话: 021-59904405

网址: www.jiahangchn.com