

全自动定量氮吹浓缩仪

Auto-TSC8200

应用领域

农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
 环境分析：饮用水、地下水和污染水水样等
 食品饮料：牛奶、酒、啤酒等
 生物分析：血清、血浆、血液、尿液等
 制药药检：中药制药等



全自动>>>


- >自动控制流路，实现每个通道独立控制。
- >自动收集排出废气，环保，不占用通风厨。
- >自动切换吹针，独特的双吹针模式，先用斜吹模式，再切换直吹模式，应对不同液位高度，提高效率。

定量浓缩>>>

- >终点控制模式：无需更换浓缩杯即可实现终点余量 0.5 或 1.0mL 体积的可变切换。达到终点后自动停止，并发出报警提示。



性能指标>>>

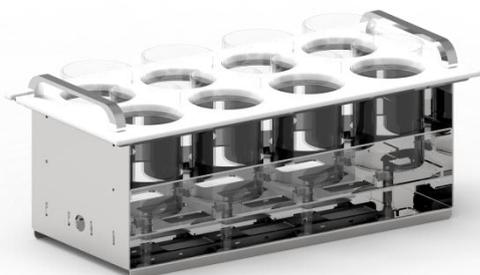

- >可同时浓缩 1-8 个样品，采用氮吹、水浴加热的方式对样品进行快速浓缩。
- >7 寸 LCD 触摸屏智能图形化操作界面设计，实时显示温度、压力、时间等参数。
- >独特双吹针设计，先采用斜吹模式涡旋吹扫，接近浓缩终点时自动切换为直吹模式，加快浓缩速度。
- >开盖悬停设计，上盖可以悬停在任意位置，取样方便、安全。
- >可拆卸式气嘴：每个气嘴都可独立拆卸、更换。
- >浓缩体积：样品处理量 $\geq 200\text{ml}$ 。

天毅仪器制造（成都）有限公司

电话：028-61609380

邮箱：tianezk@163.com

主营产品：微波消解仪、石墨消解、全自动石墨、全自动氮吹、真空平行浓缩

网址：www.tianezk.com/www.tiane17.com

地址：四川省成都市锦江区晨辉西路 56 号