

# ColorFlex® EZ



颜色测量 如你所见 应用于

咖啡

粉末

颗粒

糖

小球

液体

清洁剂

树脂

色素

薯条

层压制品

酱汁

水泥浆

填缝剂

香料

水泥

混凝土和 塑料板

酸奶

果汁

板和

塑料板

粘合剂

色素

化学品

乳制品

漆板

水果

乳酪

粉末

涂料

坚果

肥皂

固体

## 最接近目测的检定结果

ColorFlex® EZ采用 45%%光学几何结构,用途广泛、操作简易,为用户提供值得信赖的颜色测量值。 HunterLab以超过六十年的颜色测量经验和智慧,将颜色测量技术完美的融于这款小巧的仪器中。

# 45°/0° 设计: 达到完美的色彩控制

ColorFlex<sup>®</sup> EZ 具备 45°/0° 几何结构,是模拟人眼视觉观察样品的最佳仪器,确保在每次测量中都能得到准确无误的色度。

## 可连接更多界面


具有 3 个 USB 2.0 接口,可连接多种设备:

- USB闪存盘可储存检测结果,并导入到其他仪器或电脑
- 键盘可用于直接输入样品名称
- 条形码扫描仪可快速采集样品,避免人为数据输入错误
- 打印机可快速打印样品测试结果
- 可连接EasyMatch® QC 软件,在电脑上操作仪器

# 操作简单

轻松应付所有的颜色测量挑战:

- 尺寸小, 仅需很小的桌面空间
- "一键式"操作

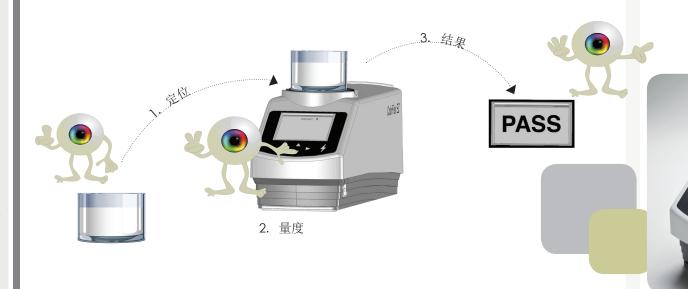

#### 性能更卓越

用途广泛、效果佳:

采样的多样性使得各种样品均能被测量,从不透明固体、液体、粉末、颗粒到半透 明的固体和液体。

- 简易数据传输,将设置和标准从一台 仪器传输至另一台,上传或下载至 USB 闪存盘以便备份
- ·可保存 250种 样品设置、

产品标准和容差设置,

及多达 2000种样品测量



#### 灵活性更强

内置软件配备 250 种设置,具有多项参数如产品标准值及容差值等,详见以下:

- 色度标尺、指数、光源及观察者
- 为行业提供客观标准,以辨别色差
- 针对产品规格设定合格/不合格公差
- 取平均值,以提供不均匀或不一致样品的准确测量值
- 以多种格式报告测量数据,如颜色数据、色差数据, 和光谱数据
- 配备不同的配件,可测量各种形态的产品

也可提供ColorFlex® EZ Tomato 番茄酱专用测色仪

# HunterLab及上海信联

HunterLab一直专注于研发颜色测量技术,拥有超过60年的经验及智慧。上海信联公司是美国HunterLab公司的中 国区官方授权代理,专职经营HunterLab颜色品质管理系统。负责该产品在中国的售前售后及维修等工作。上海 信联公司在各行各业 积累了颇为丰富的颜色应用经验,为用户提供准确的颜色解决方案。

就是如此简单!

这就是 ColorFlex® EZ

若要了解更多资讯,请浏览www.shanion.com 或与我们联系: 021-64850134













# 配件



04-4000-00 不透明样品杯光罩

提供遮光罩,避免外来光源对测量的干扰。

04-7209-00 25英寸样品杯

光学玻璃样品杯,用于液体、粉末、颗粒的测量。

环盘套件

用于测量透明液体的色度。



04-6622-00 杯架

02-4579-00

04-6623-09

04-6623-08

放置玻璃样品杯, 防止杯子滑动。

04-6623-10 32 毫米 (1.25英寸) 测试孔

25 毫米 (1英寸) 测试孔

19 毫米 (0.75英寸) 测试孔

04-6623-05 13 毫米 (0.50英寸) 测试孔



A13-1014-294 USB键盘

用户使用具有 88个字母键的键盘,能够直接输入名称至仪器。

A13-1014-254 USB条码扫描器

条码扫描器扫描产品名称至仪器,并自动检测出来。

**A13-1014-259** USB打印机

允许数据打印出来,需要标准USB数据线和热敏纸,两者单独出售。



L02-1014-608

硬面手提箱,ColorFlex® EZ

ColorFlex® EZ 专用硬面手提箱。



电话: 021-64850134, 54261103, 54261104传真: 021-64852306或访问www.shanion.com