



www.innoteg.com.cn
innoteg@innoteg-instruments.com
400-006-9696



扫码了解英诺德



总部

广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号
鱼珠智谷E-PARK创意园A09
Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700

亚太地区

香港九龙观塘巧明街100号
友邦九龙大楼36楼3605室
Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830

越南胡志明市办事处
DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu
Tho Street, Phuoc Kien Commune, Nha
Be District, Ho Chi Minh City.

北区

北京办事处
北京市东城区南竹竿胡同2号
银河SOHO D座50921室
Tel: (010) 82327600

西安办事处
陕西省西安市雁塔区红专南路12号
红专里联合办公二层B234
Tel: 15249271857

东区

上海办事处
上海市长宁区遵义路100号
虹桥南丰城A座2105-06室(200050)
Tel: (021) 5261 0159 Fax: (021) 5261 0122

武汉办事处
湖北省武汉市东湖高新佳园路2号
高科大厦18楼F1801(430074)
Tel: (027)87855908

南区

广州办事处
广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号
鱼珠智谷E-PARK创意园A09
Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700

长沙办事处
湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号
金科时代中心3A-1904(410015)
Tel: 18122021961

海南办事处

海口市海秀东路29号
融创精彩天地B2620房
Tel: (0898) 66710067 Fax: (0898) 66728787

西区

成都办事处
四川省成都市高新区
都会路55号3单元25楼2506号

昆明办事处
云南省昆明市五华区北京路1079号
欣都龙城2栋1101室

重庆办事处

重庆渝北区新溉路保华大道
仁安龙城国际1期1栋1单元21-1室
Tel: (023)67751496 Fax: (023) 67751496

南宁办事处

广西省南宁市民族大道141号
中鼎万象东方C座601室 (530028)
Tel: (0771)5890482 Fax: (0771)5890402

英诺德 EasySyn-12 平行合成仪



INNES2307-01


www.innoteg.com.cn

innoteg@innoteg-instruments.com

平行合成系统

INNOTECH英诺德是德祥集团旗下自主研发品牌，是一家专业从事科学仪器设备研发生产的高科技企业，是集实验室设备研发生产、方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家。

INNOTECH英诺德EasySyn-12平行合成仪是用于平行合成的高效个人合成站。EasySyn-12位于WM-1磁力搅拌器上，可同时加热至室温至180°C的12次反应，精度为±1°C。通过WM-1的Pt1000温度传感器实现更高的精度。Pt1000温度传感器允许用户通过模块温度或溶液温度进行控制。将温度传感器插入铝基座或通过盖子直接插入反应溶液中。

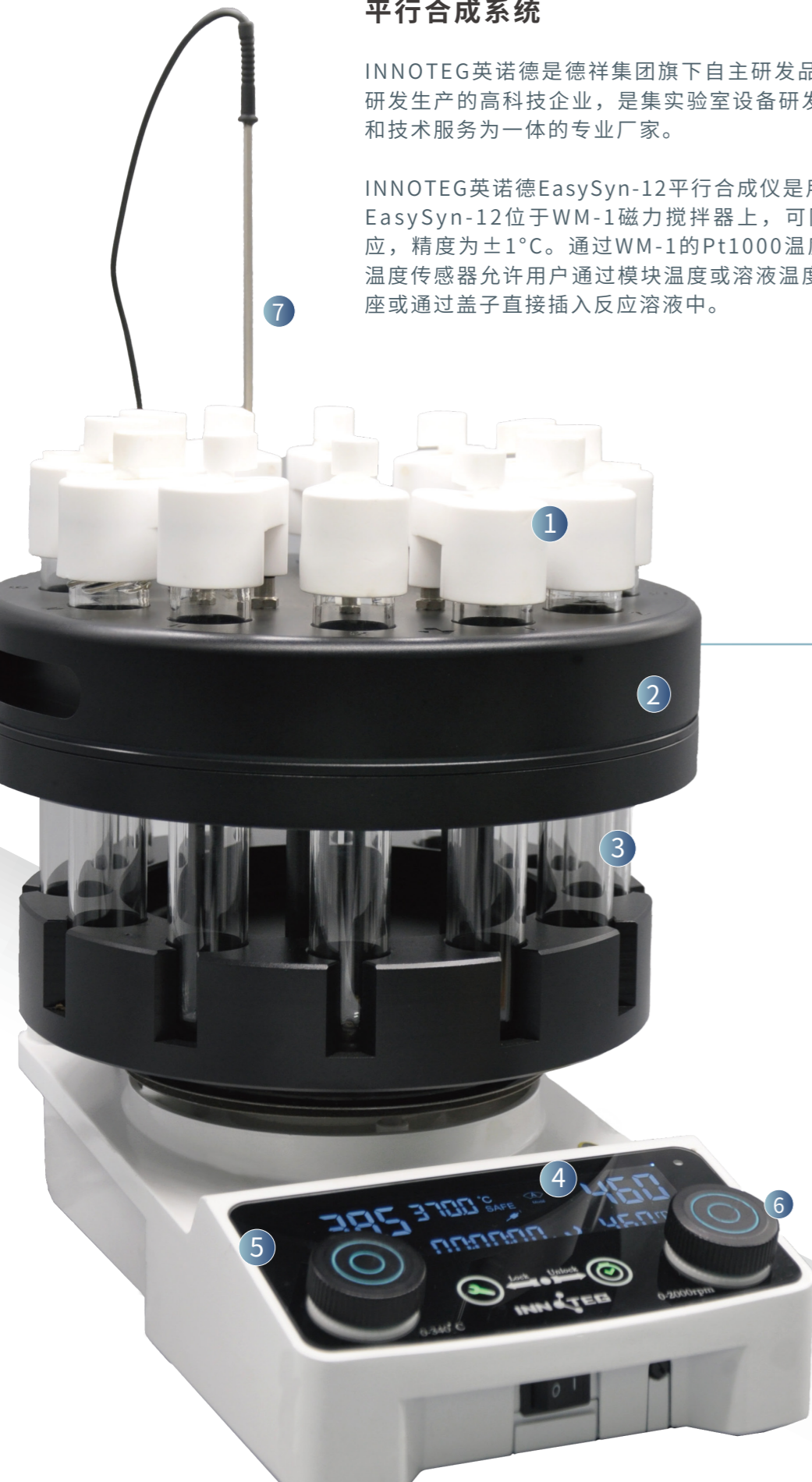

- 1 多位点反应，最高12位，反应体积：1ml—20ml
- 2 含氟聚合物涂层具有耐化学性和易清洁性
- 3 清晰的观察口在实验过程中容易观察管内容物
- 4 强大，均匀的搅拌50-2000转
- 5 温度范围从室温至180°C
- 6 快速设置和易于使用
- 7 采用PT1000的温度探针，控温精度±1°C
- 8 PTFE反应盖通过按压式设计与不锈钢通气口连接，操作简单方便
- 9 PTFE材质的反应盖耐腐蚀，盖帽具有独特的1/4快转螺纹可快速紧密连接到玻璃管上，降低旋盖的工作量
- 10 拆卸方便可快速转移样品,使得所有反应管能够同时被移除以转移到支架或用于快速后合成冷却
- 11 中央进出口的快速释放阀方便抽真空或通入惰性气体，保证反应体系的密闭性
- 12 关机后显示盘面温度，独特的智能防烫功能避免加热实验安全问题
- 13 可拆卸水冷回流进出口



品牌	英诺德
型号	EasySyn-12
反应器工位	12*20ml
反应器类型	试管
控温范围	RT-180°C
集中进出气	✓
单独气路开/关阀门	✓
冷凝回流功能	✓
中途进样	✓
快速取样	✓
搅拌	磁子搅拌

