



品牌：德国 **Avisoft**；型号：**UltraSoundGate 116Hnbm**；

名称：动物超声音频分析仪

动物超声音频分析仪 UltraSoundGate 116Hnbm

UltraSoundGate 116Hnbm 蝙蝠老鼠超声声谱分析系统

具有成本效益的超小型超声记录系统，配备 FG 驻极体麦克风、5 m 麦克风延长线、平衡模拟输入、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口和 Avisoft-RECORDER USGH 软件。该装置与小型 PC 结合使用，为被动蝙蝠呼叫监控提供了一种经济高效的解决方案。

UltraSoundGate 116Hnbm 蝙蝠老鼠超声声谱分析系统技术参数：

- 1, 通道数：1 通道
- 2, ADC 类型：具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构；
- 3, 解析度：16 位；
- 4, 采样率 [kHz]：300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50；5, 频率响应：1 - 135 kHz；
- 6, 输入灵敏度：-9 dBV = -7 dBu = 0.35 Vrms；
- 7, 增益调节电位器：否（固定增益）；
- 8, 输入阻抗：50 欧姆；
- 9, 模拟输入连接器：母 XLR-5 插座；
- 10, 其他输入：XLR 引脚 5 上的外部触发输入/输出（TTL 兼容）；
- 11, 电脑接口：USB 2.0，同步高速模式；
- 12, 物理 USB 连接：标准 B 型 USB 插座；
- 13, 电源电流（从 USB 汲取）120 毫安；
- 14, 机身：紧凑的铝制外壳；
- 15, 物理尺寸（宽/高/深），单位为 mm：36 x 43 x 110（带麦克风）；
- 16, 重量：90 克（不含麦克风）；
- 17, 包含的软件：Avisoft-RECORDER USGH；
- 18, 系统要求：PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom，运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11；

UltraSoundGate 116Hnbm 蝙蝠老鼠超声声谱分析系统可选配软件：声音分析软件 Avisoft-SASLab Pro

南京欧熙科贸有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室，邮编：210018


电话：025-86465277, 52613764 传真：025-52613794 张海霞 13913028277

Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com



Avisoft-UltraSoundGate 116Hnbm 与其他蝙蝠呼叫记录器相比，用于被动蝙蝠监控的优势是什么？

- 1, 可以在麦克风和基本单元/计算机之间插入很长的延长电缆。
- 2, 无限连续录制时间。（理论上的）限制是计算机硬盘的大小。
- 3, 随附的记录软件为被动监控应用程序（例如互联网连接）提供了广泛的有用功能。
- 4, PC 平台确保系统可以轻松地与其他（成本效益）组件集成。一旦新技术（例如 LTE 互联网服务）在未来出现，就有可能逐步升级系统。
- 5, 另请参阅传单 UltraSoundGate;
- 6, 如果足以监测和记录低于 80...90 kHz 的信号频率，可以使用低成本蝙蝠监测系统代替 UltraSoundGate 116Hnbm。

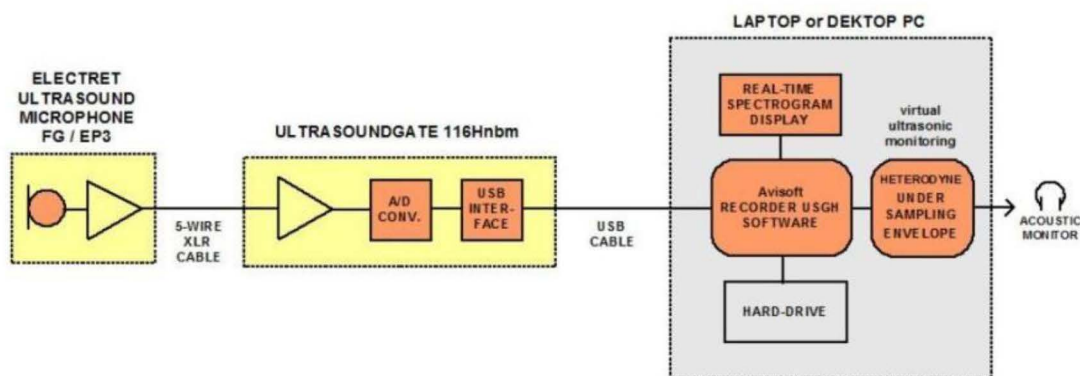

UltraSoundGate 116Hnbm录音系统原理

南京欧熙科贸有限公司是德国 Avisoft 公司在中国的总代理，欢迎来电咨询。

南京欧熙科贸有限公司为您提供动物超声音频分析仪 UltraSoundGate 116Hnbm 的参数、价格、型号、原理等信息，动物超声音频分析仪 UltraSoundGate 116Hnbm 产地为德国、品牌为 Avisoft，型号为 UltraSoundGate 116Hnbm，更多相关信息可来电咨询，公司客服电话 7*24 小时为您服务

南京欧熙科贸有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室，邮编：210018

电话：025-86465277, 52613764 传真：025-52613794 张海霞 13913028277

Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com