

IKA

designed for scientists

CN



离心分离 | IKA G-L

IKA G-L

/// 通用型微量离心机

中等转速下分离物质：IKA G-L 是一款理想的微量离心机，尤其适用于分子生物学领域。它可以使用标准的 1.5/2.0 离心管及 PCR 联管。按钮自动开盖功能。



安全保护功能

离心机配套有一个金属盖，只有在盖子完全密闭的情况下，才能开启运行。

最先进的显示界面

通过薄膜按键实现完全直观的菜单导航，从而非常方便的设置转速、时间及程序。

强劲的马达

此款离心机使用高性能的马达，从而实现离心转速高达 15,700 rpm。

IKA G-L

订货号 0030001174

标配 12 位 1.5/2.0 ml 金属转子及盖子已包含在配送范围内。

清晰的分类显示

IKA G-L 技术参数

技术参数

转子容量	12 × 1.5/2.0 ml
转速	最小, 800 rpm 最大, 15,700 rpm
转速偏差	5 %
离心加速度	16,500 G
计时功能	是
计时显示	7 字段 LED
配平监测功能	是
急停功能	是
开盖功能	自动
转子更换	无需工具
保护盖	是
接口	USB

基础参数

重量	3.9 kg
外形尺寸 (W × H × D)	200 × 140 × 280 mm
允许环境温度	5 – 40 °C
允许相对湿度	80 %
防护等级 DIN EN 60529	IP 20
电压	220 – 230 V
频率	50/60 Hz
电机功率输入	65 W
输入功率	92 W 待机: 18 W



配套产品


以下 IKA 产品可以更好的配套 G-L 离心机使用:



mini G
离心机
订货号 003958025



PETTE vario 100 – 1,000 μ l
移液器
订货号 0020011216

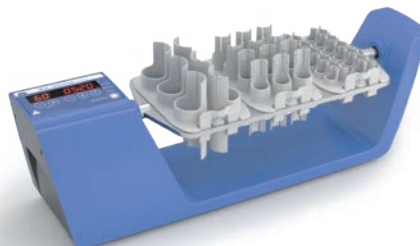

Trayster digital
摇床
订货号 0004006000

FAQ

IKA G-L 离心机是数字显示屏吗?

是的, IKA G-L 离心机有三个数字显示屏。第一个屏幕显示 rpm/rcf 值; 第二个屏幕显示计时 / 定时; 第三个屏幕显示选择的程序。

IKA G-L 离心机可以调节转速吗?

可以, 速度调节设置步进 100rpm/rcf。

需要哪些工具来更换转子?

IKA G-L 离心机更换转子不需要任何工具。

IKA G-L 配件信息



G-L 转子 2 \times PRC 8 联管 \times 0.2 ml
订货号 0030001345

更多配件信息
请登陆
www.ika.com

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn, 阿里巴巴: ikashop.1688.com



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

