


涡旋振荡器 HVM1 型

HVM1 Vortex Mixer


● 适用范围 Scope of application

尤适用于振荡试管或其他小容器中的液体、组织样品，在化工、制药、生命科学等行业实验室应用较广。

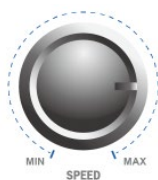

● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 切换自如：多功能开关支持一键切换运行模式为“连续”或“触碰”，满足您对便捷与节能的需求。
- ★ 变速控制：0-3300rpm 无级变速设计，允许慢速振动至高速旋转，您可依据不同的混合要求而设定。
- ★ 振荡平稳：强劲电机输出稳定动力，坚固金属外壳提供稳重基座，配合您实现多种类型的均匀混合。
- ★ 兼容性好：多种形状、尺寸和材质的混合头，轻松应对各种混合场景。

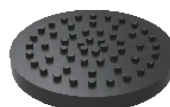

橡胶托盘



弹出式垫片



移出工具

● 型号规格 Model specifications

型号	HVM1
运行方式	圆周
速度范围	0 - 3,300rpm
操作模式	触摸或连续
周转直径	圆形轨道，直径 4.0mm
速度控制	无级变速
适用容器 / 数量	手持式：各种微型试管或锥形试管 固定式（微型试管底座头）：0.5 / 1.5 / 2.0ml 微型试管各 12 个
材质	粉末涂层铝
驱动电机	无刷电机
允许温度 & 湿度	5°C ~40°C, <80%
最大负载 & 功率	0.5Kg, 30W
产品规格 (WDXH) & 净重	140 x 190 x 123mm (不包括顶部), 大约 3.3kg
包装规格 (WDXH) & 毛重	175 x 255 x 215mm, 3.6kg
电源电压	单相电, 220V 50Hz