

everfuge®

恒尔生物

**Achieve Each Separation**

**实现每一次分离**

离心机新品

北京恒尔生物仪器有限公司  
Beijing Everfuge Biology Instrument Co.,Ltd.

## ◇ 大容量冷冻离心机 PRO2615R

### 应用领域

- 核酸提取
- 蛋白质离心
- 细菌、酵母的离心收集
- 细胞收集
- 血液离心



2615R

### 性能特点

- 动态压缩机制冷；
- 可持续制冷，在盖子关闭的情况下，转子腔室保持制冷；
- 离心结束后，保护样品安全；
- 可执行预冷冻功能；
- 自动待机，可降低能耗；
- 可存储99个自定义程序，调取方便；
- 8组常用参数和2组快捷参数按键，快速运行离心程序
- 多种语言可选，方便使用；
- 自动转子识别，失衡检测；
- 10档软加速和软刹车功能，保护敏感样品；
- 可调节离心半径，确保最大相对离心力设置更准确；
- 定速计时功能，在达到设定转速时开始离心，确保离心可重复性；
- 转速设定增量为1rpm，确保了离心的高准确性。
- 快速锁定转子盖/吊篮盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子/吊篮
- 快速预冷功能，省心省力，且转子在最高转速下，仍可以保持4 °C
- 气密性转子可选，金属转子及配件可高温高压灭菌，保护人员安全

### 技术参数

2615R技术参数			
最大容量	4 × 1000ml/4 × 7 工作板	加速/减速	10rpm
最高转速	13700rpm	可存储程序	99组
最大离心力	22194 × g (固定角转子)	运行时间	10s-99h59min
最大离心力	4800 × g(水平转子)	温度范围	-20°C-40°C
最大噪音	<53dB(A)		

## 可选转子

ROTORS

### 水平转子

	名称	型号	最大相对离心力	最高转速	最大容量	货号
	4位水平转子	HA-04-1000	4121 × g	4200 rpm	4×1000 ml	06.756.2001
	4位水平转子	HA-04-750	4816 × g	4700 rpm	4-750 ml	06.756.2002
	4位水平转子	HA-04-DWP	3828 × g	4700 rpm	深孔板	06.756.2003
	2位水平转子	HA-02-DWP	2272 × g	4000 rpm	深孔板	06.756.2004
	4位水平转子	HA-04-400	5263 × g	5100 rpm	4×400 ml	06.756.2005

## 可选转子

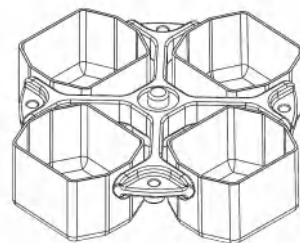
ROTORS



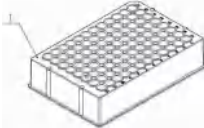
### 角转子



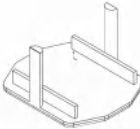
	名称	型号	最大相对离心力	最高转速	最大容量	货号
	6位角转子	SA-06-250	15054 × g	10100 rpm	6×250 ml	06.756.1001
	6位角转子	SA-06-100	18516 × g	13000 rpm	6×100 ml	06.756.1002
	8位角转子	SA-08-50	21190 × g	13500 rpm	8×50 ml	06.756.1003
	20位角转子	SA-20-5	20913 × g	13100 rpm	50×5 ml	06.756.1004
	48位角转子	SA-48-2	25314 × g	15200 rpm	48×1.5/2.0 ml	06.756.1005
	30位角转子	SA-30-2	25830 × g	15200 rpm	30×1.5/2.0 ml	06.756.1006

## 4位水平转子 | H-04-1000

最大离心力	4121xg
最高转速	4200rpm
最大容量	4×1000ml
加速	30s
角度	0°
温度	+4℃
订货号	06.756.2001



离心管			
容量 (ml)	15ml	50ml	微孔板
直径x长度 (mm)	17x122mm	29.5x102mm	85x127mm

适配器			
容量 (ml)	96x15ml	68x50ml	4x6酶标板
订货号	07.756.0101	07.756.0102	07.756.0103

*everfuge*<sup>®</sup> 恒尔生物

## 北京恒尔生物仪器有限公司

公司地址：北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院1号楼4033 室

电话：010-82363430

网址：[www.everfuge.cn](http://www.everfuge.cn)