


可拆卸式三层同轴针头

完全可拆卸设计

外针、中针、内针、针体座和接头均可方便的拆卸后清洗，解决了焊接式同轴针头内部难以清洗的难题，使用寿命长，节省成本；

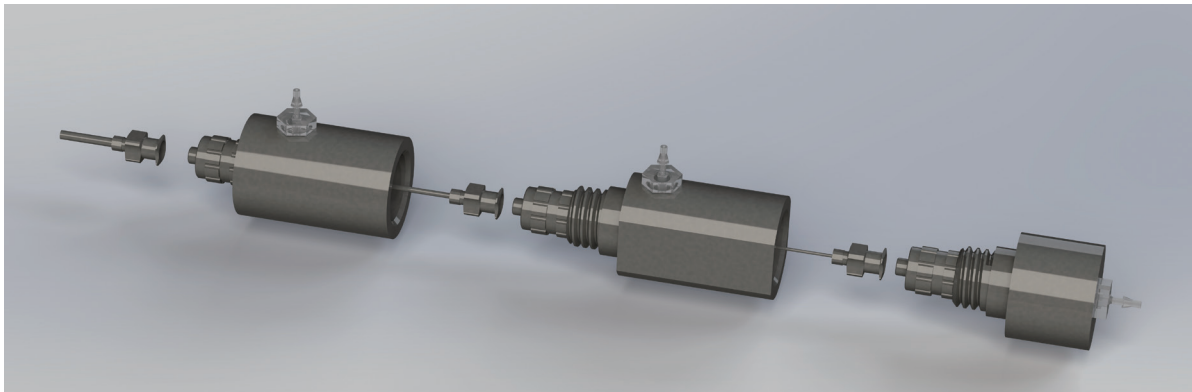

多种组合设计，一针变十针

每套标配通用主体针座一组，不同内外径的外、中、内不锈钢针头各三支，最多可以组成10种三层同轴针头，极大地拓展了组合形式；同时，使用的不锈钢针头均为市面上的标准针头，价格低廉，极大地降低了使用成本，并且可以有更多种的外、种、内尺寸组合形式。

mm	外针			中针			内针			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
内径	1.9	1.36	1.12	1.2	0.84	0.61	0.6	0.4	0.25	
外径	2.4	1.84	1.48	1.64	1.28	0.91	0.9	0.7	0.5	
针号	13G	15G	17G	16G	18G	20G	20G	22G	25G	
	111	112	113	122	123	133	222	223	233	333



精密、精细加工

针头精细打磨抛光；外、中、内同心度好；





洁净材质

主体针座采用 316L 不锈钢材质，耐腐蚀； 转接头使用医疗级 PP 原料制成，洁净安全；

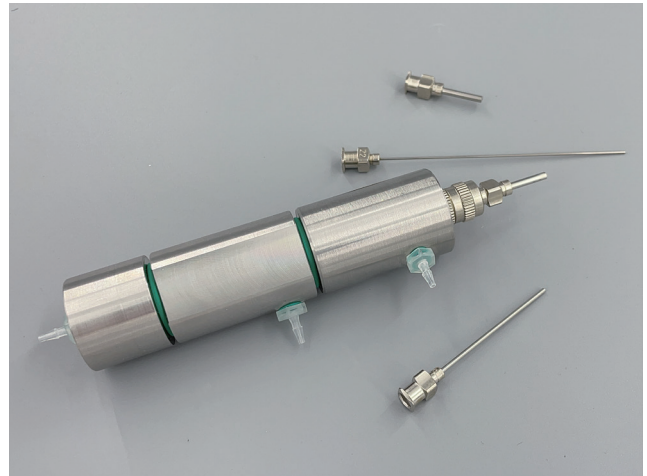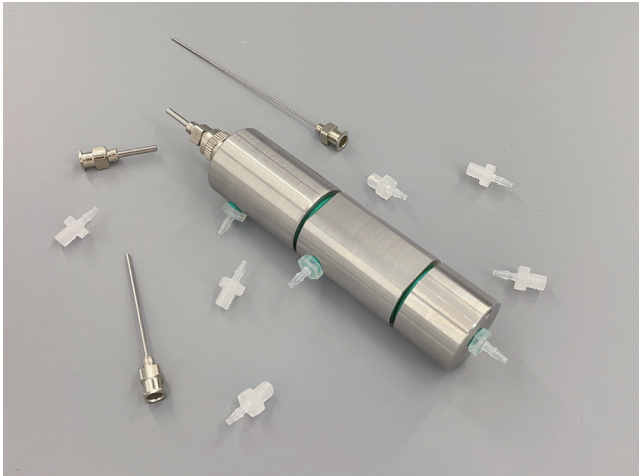

自带固定孔，便于固定

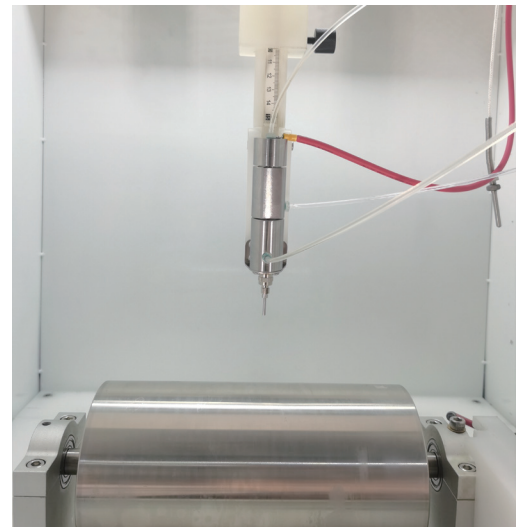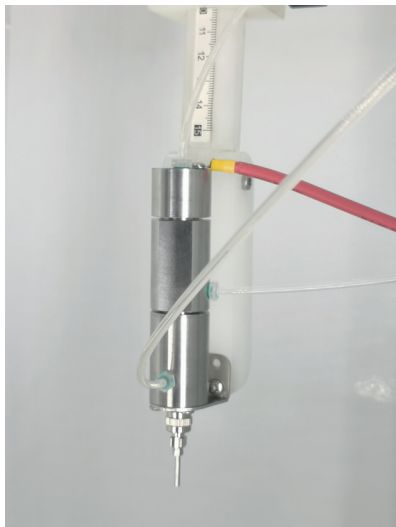

出厂前进行水压测试，有效防止泄露；

订购信息：

WI22-0301 可拆卸式三层同轴针头套装（主体座*1组，外针13G*1，外针 15G*1，外针 17G*1，中针16G*1，中针 18G*1，中针 20G*1，内针 20G*1，内针 22G*1，内针25G*1，1/16' 软管接头*18，小密封圈*18，大密封圈*4，鲁尔转接针头座*4，两用扳手*1，固定支架*1）

备注说明：

- 1, 死体积数据：外中层死体积：1.4ml，中内层死体积：2.0ml，内层死体积：0.2ml。
- 2, 客户可以选择其他规格的外、中、内不锈钢针头。
- 3, 重量：约300g

公司信息

上海
上海楚柏实验室设备有限公司
地址:上海市松江区高技路655号3号楼5层
邮编: 201601
电话: 021-6769 6665
邮箱: sales@truelab.com.cn

深圳
楚柏（深圳）新技术有限公司
地址: 深圳市龙华区云峰路18号503-505室
邮编: 518109

www.truelab.com.cn