


BV200 蓝光透射仪

BV200 blue light transilluminator

产品应用

PRODUCT APPLICATION

应用于核酸电泳凝胶进行观察及切胶操作。适用于 SYBR™ Safe, SYBR™ Gold, SYBR™ Green I&II, SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, Gelsignal™ Green等安全染料, 避免紫外线对样品的损伤和EB等有毒染料对实验人员的伤害。

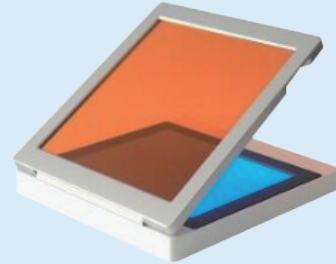

产品特点

PRODUCT FEATURES

	描述
01.	超薄设计, 便于移动, 方便使用;
02.	便利切胶设计, 无需佩戴防护目镜;
03.	均匀透照模式, 低背景, 样品观测更均匀, 拍照效果更佳;
04.	滤光盖板角度可调, 并可固定, 单手操作, 看胶切胶更轻松;
05.	大功率LED灯珠, 长寿命;
06.	蓝光光源, 使用户易暴露部位免受紫外线伤害, 对核酸片段亦无损伤;
07.	适用于多种安全染料, 取代高致癌性的EtBr。

产品参数

PRODUCT CONFIGURATION

	描述
光源	470nm蓝色LED灯, 底部透射, 非侧面照射光源, 蓝光光源安全环保, 使样品和实验人员避免紫外伤害
透射面积	17cmx13cm, 表面钢化玻璃, 耐磨耐腐蚀
防护盖	盖子为琥珀色滤光片, 可调节角度, 单手操作, 看胶更轻松
尺寸	210mm*210mm*36mm (L×W×H)
重量	净重1.9kg
电源适配器输入	100-240VAC, 50/60Hz
仪器输入	9VDC, 2.55A
额定功率	23W



上海勤翔科学仪器有限公司
上海市宝山区淞兴西路258号5C-102

电话:+86 21 6533 2202
传真:+86 21 6679 0200

邮箱: info@clinx.cn
网址: www.clinx.cn