


# 紫外透射台

## UV Transilluminators

### 产品应用

#### PRODUCT APPLICATION

应用于应用于核酸电泳凝胶的结果观测与切胶操作, 适用于大部分核酸染料, 广泛应用于涉及分子生物学, 分子遗传学, 医药卫生, 生物制品, 农业等生命科学领域的科研院所与企事业单位。

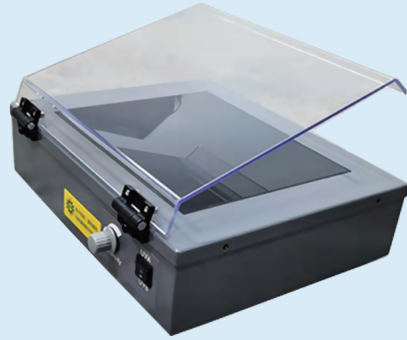

### 产品特点

#### PRODUCT FEATURES

描述
01. 配合操作人员的视角, 能以合适角度调节并固定紫外防护板, 提供专业紫外线防护, 并且不影响观察及切胶操作;
02. 单波长紫外透射台标配302nmUV灯管, 可配合不同染料如常用的Gel Red、EtBr、SYPRO Orange等染色的凝胶观察;
03. 双波长的紫外透射台可满足实验的不同需要, 302nm适合DNA/RNA的观察和分析, 365nm适合制备观察以及切割条带, 减少对DNA的破坏;
04. 亮度调节: 可以调节紫外强度, 适应不同操作环境。

### 产品参数

#### PRODUCT CONFIGURATION

型号	CUV 20A	CUV 40A
透射面积	标配8W的302nm紫外灯管6根, 可选配254nm或者365nm灯管, 紫外强度5%~100%可调	标配302nm*5 (8W)和365nm*4(8W)两种波长灯管, 可选配254nm波长灯管, 三种波长任选其二, 紫外强度5%~100%可调
透射面积	21cm*26cm	21cm*26cm
专业紫外防护板	挡板面积28cm*32cm	挡板面积28cm*32cm
应用	用于DNA/RNA凝胶观察及切胶	用于DNA/RNA凝胶观察及切胶
电源	220VAC/50Hz	220VAC/50Hz
仪器尺寸	360mm*290mm*90mm (长*宽*高)	360mm*290mm*90mm (长*宽*高)
重量	5.5kg	5.75kg



上海勤翔科学仪器有限公司  
上海市宝山区淞兴西路258号5C-102

电话:+86 21 6533 2202  
传真:+86 21 6679 0200

邮箱: info@clinx.cn  
网址: www.clinx.cn