

eLINE 连续分液器的订购细节

产品编号	产品
73070X	百得eLINE Pro连续分液器
73080X	百得eLINE Lite连续分液器
730981	百得eLINE单座充电支架, 带充电器
730991	百得eLINE4座旋转充电支架, 带充电器
731001	eLINE 替换电池

X: 0=不带交流适配器, 1=带交流适配器, 欧洲标准; 2=带交流适配器, 美国标准;
3=带交流适配器, 英国标准; 4=带交流适配器, 日本标准; 5=带交流适配器, 澳大利亚标准
在全球, 百得拥有对此项产品多项专利。

百得连续分液器吸头

为了达到最好的移液操作效果, 我们推荐使用Biohit原配的连续分液器吸头

- 易于更换的设计
- 无喷雾器设计—免除污染
- 使用原产的活塞和吸头
- 去除了DNase、ATP、RNase和内毒素
- 适用于百得手动和电动连续分液器, 以及其他种类的分液器。

百得连续分液器吸头订购细节和参数表

货号	吸头量程 [ml]	类型	每档最小/大 量程[μl]	增量 [μl]	最少/最多 分档次数	每档 量程 [μl]	测试体积 [μl]	准确度 [%]	精确度 [%]
792017 792026	0.1	未消毒 预消毒	1/100	0.2	1/100	100	10 100	1.00 % 1.00 %	2.00 % 0.50 %
792018 792027	0.2	未消毒 预消毒	2/200	0.4	1/100	100	20 200	1.70 % 1.00 %	2.50 % 0.50 %
792019 792028	0.5	未消毒 预消毒	5/500	1	1/100	100	50 500	1.00 % 0.80 %	3.00 % 0.60 %
792020 792029	1.0	未消毒 预消毒	10/1000	2	1/100	100	100 1000	0.50 % 0.50 %	0.60 % 0.20 %
792021 792030	2.5	未消毒 预消毒	25/2500	5	1/100	100	250 2500	0.60 % 0.60 %	0.40 % 0.20 %
792022 792031	5.0	未消毒 预消毒	50/5000	10	1/100	100	500 5000	0.60 % 0.60 %	0.50 % 0.15 %
792023 792032	10.0	未消毒 预消毒	100/10 000	20	1/100	100	1000 10000	0.40 % 0.40 %	1.00 % 0.20 %
792024 792033	25.0	未消毒* 预消毒*	500/25 000	50	1/50	25	2500 25000	0.50 % 0.50 %	0.50 % 0.15 %
792025 792034	50.0	未消毒* 预消毒*	1000/50 000	100	1/50	25	5000 50000	0.30 % 0.30 %	0.70 % 0.15 %
792036	吸头适配器25ml、50ml, 3个每包								
792038	初始套装, 包括: - 20×0.5ml - 20×1.0ml - 20×2.5ml - 20×5.0ml - 20×10.0ml								

* 包括1个适配器

所有Biohit eLINE连续分液器及手动连续分液器吸头(除已消毒吸头外)均符合以上参数。
由于Biohit不断的研发工作, 规格如有改变, 恕不另行通知。

分销商:

了解更多详情请访问www.biohit.com、www.biohitchina.com



490612 • 4/2009 © Biohit Oyj

小设计, 大改变!

eLINE[®]
Lite & Pro

电动连续分液器



eLINE Lite和Pro电动连续分液器

eLINE Lite和Pro电动连续分液器把您带进熟悉而又独特的、舒适的多次分液世界。

eLINE Lite和Pro连续分液器是全自动移液操作包括自动吸头去除按钮，在长期移液工作中有效防止重复性劳动肌肉损伤(RSI)。同时提供了比手动连续分液器更宽泛的分液量程选择。

杜绝实验室样品的有毒、具传染性的、放射性的液体互相感染—容易遵循操作步骤，并且确保了实验精确度的可重复性，即便是操作粘性液体、易传染液体、或是高水气压的液体。所以eLINE Lite和Pro连续分液器对于油性类、醇类像乙醇、丙酮、蛋白质、缓冲剂、洗涤剂操作是理想的选择。

eLINE连续分液器是您最便捷和人性化的选择。



eLINE Pro 提供全面而又容易的液体处理程序。


eLINE Lite专为多次分液(d)模式而设计，它的吸头向导功能能使分液更加快速和简便。

两者都提供：

- 吸头向导功能—自动选择适配的吸头
- 无可比拟的人体工学设计—毫不费力的移液操作
- 极其轻便的电动吸头去除操作
- 杜绝实验室样本的交叉感染—容易遵循的操作步骤
- 量程范围从1µl-50ml
- 5档分液、吸液速度
- 直接插入式充电，即插即用
- 与其他eLINE 电动移液器的充电器和支架通用
- 与其他品牌的连续分液器吸头通用

eLINE Lite和Pro电动连续分液器操作模式

操作模式	eLINE Pro	eLINE Lite
采用吸头向导的多次分液(d)	✓	✓
多次分液(d)	✓	
移液(P)	✓	
稀释(dd)	✓	
多次不等量分液(Sd)	✓	
多次等量分液(Ad)	✓	
多次吸液(SA)	✓	
个性化选择(CST) - GL(设置时间间隔) - Sr(选择想要的吸头) - SET(恢复出厂设置)	✓	
5档分液、吸液速度	✓	✓

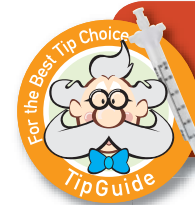

节省您的时间，让吸头向导来帮您选择适配的吸头吧！

- 不需要花时间去计算规格
- 只需要设定需要的量程，以及移液次数，吸头向导会帮您计算，并显示出对应的吸头规格

有时在分液时挑选到可以等分量和次数相匹配的吸头是件非常困难的事情。需要经过多次的吸头选择界面和计算才能选到最合适的吸头。而eLINE连续分液器的全自动吸头向导会帮您选择并显示最合适的吸头量程。这种独特的功能将节省您宝贵的实验室工作时间并杜绝发生使用错误吸头的概率。



一触式吸头去除按键，独此一家的设计！

清晰的LCD显示
所有您需要的信息

直接插入式充电器 - 即插即用

键盘设计简单明了

单键控制所有的移液操作

美观的人体工学设计

左手或右手均可操作

轻便的吸头插入装置

