



2003型溶剂真空脱气机

避免液相色谱仪分析时溶剂中气泡影响

最新推出消除溶解气体的先进技术

装置特点

- ◆ 适用于正在使用的任何型号HPLC仪器
- ◆ 由于采用内置Systemc AF除气薄膜，内部容积仅为480 μ l
- ◆ 超静无声，5年连续无故障运行
- ◆ 泵头清洗不用吹洗阀
- ◆ 采用ZHCR（零滞后恒定运转）步进电机驱动真空泵，基线无起伏
- ◆ 闭环真空控制，转速变化时真空恒定
- ◆ 提前检测预知误差和漏液

技术指标


- ◆ 内腔容积: 480 微升
- ◆ 接触材料: PEEK 和Systemc AF
- ◆ 尺寸(HxWxD): 127 x 73 x 249 mm

订货指南

订货号	通道数
MB0001-6352-A	2
MB0001-6353-A	3
MB0001-6354-A	4
MB0001-6355-A	5

吸收值 (AU)

一般单速泵和取得专利技术的Systemc ZHCR 真空除气泵对UV检测器基线的影响

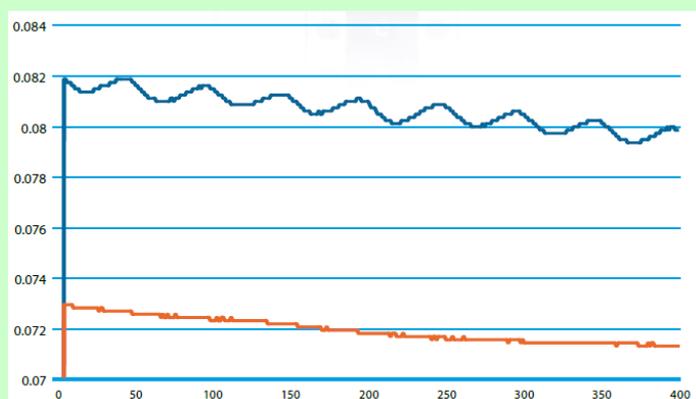

GPC兼容脱气机

- ◆ 对于GPA和正相色谱使用带stented瓣膜的真空腔。
- ◆ 主要指标和上述相同

订货号	通道数
MB0001-6622	2
MB0001-6624	4

蓝线 —— 一般真空泵
 红线 —— Systemc ZHCR®真空除气泵

时间 (秒)