



易于使用， 快速且精确

Gravimat® 自动加入适量溶剂来稀释固体样品


任何实验室所需的稀释和分注程式，可直接在荧幕上选择。

特定稀释倍数会自动存档，以便应用于下次稀释

interscience



条码器

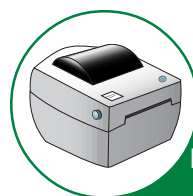

RS 232 打印机



推进器

多功能屏幕


预设稀释

选择稀释要素

其它稀释功能:

- 分注
- 称重
- 追踪
- 语言
- 校正

显示之前操作

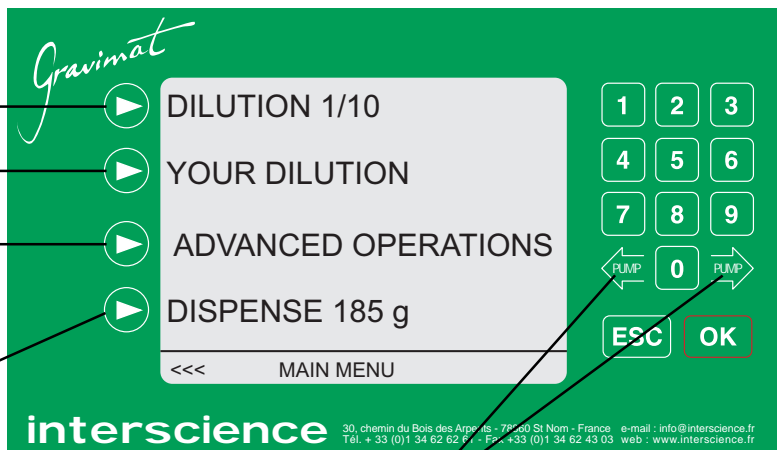

泵选择

技术规格

- 稀释时间:
 - < 20 秒, 250ml
 - < 10 秒, 250ml, 有推进器
- 稀释倍数 1/2 至 1/999
- 精确度:
 - <0.05g, 样品重量
 - >99%, 大量液体分注 (样品重量>1g)
- 最大重量: 2500g
- 称重和分注功能在一机
 - 称重平台: 精确度 0.05g
 - 液体分注: 精确度 0.1g
- RS 232 输出打印机或 LIMS
 - 参数: 日期、时间、使用者代号、泵选择、样品识别、样品重量、总重量、稀释倍数、稀释精确度...
- 不锈钢制, 易于清理
- 多种语言屏幕: 法文、英文、德文、西班牙文、意大利文和日文...
- 尺寸: 25*42*30cm- 重量: 10kg
- 功率: 220V/110V-50Hz/60Hz

选项

选项	参数
Gravimat® 有两种型号	
Gravimat® 单泵(220V)	510 230
Gravimat® 双泵(220V)	512 230
可高压灭菌 5 公升瓶子	513 001
打印机	521 000
条形码器	522 000
推进器	511 000
(两组泵配件和管件)	
“100ml 袋子”套	514 001
(BagOpen® 架和座)	
分注臂 (空气腔体方式操作)	513 002
校准 Cofrac 重量(500g)-F1	513 005

消耗品

全套分注配件	空气过滤器	
硅胶管	打印纸	
无菌过滤袋: BagFilter®		111 425
BagPage® +		122 025
BagPage® R		161 025

您可以索要完整的消耗品清单
符合 AFNOR V08-010 标准

Gravimat® 同时配有: BagOpen®, 可高压灭菌 5 公升瓶子 (每个泵一个), 以及可高压分注组件 (每个泵两个), 以上配件都易于安装。

www.interscience.fr

请将以下写明您需求的表格传真至 +33 (0)1 34 62 43 03

Gravimat® 稀释器:

- 报价
 演示

姓名
公司
地址

- BagFilter® 过滤袋
 BagMixer® 均质器
 BagTools® 附件
 BagSystem® 方法
 Spiral® 接种仪
 其它

邮政编码
电话
电子邮件

国家
传真
网址

经销商