


绕线管式马弗炉

采用绕线陶瓷管外部的电阻丝加热，加热元件和工作管构成一体。热电偶安装在工作管和加热元件之间的一个安全位置上，受到整个工作管的保护。若需充气或防止样品溢溅，也可加配一个工作管。

参数列表:

马弗炉型号	CTF 12/65/550	CTF 12/75/700	CTF12/100/900
最高温度℃	1200℃	1200℃	1200℃
连续温度℃	1100℃	1100℃	1100℃
炉膛内经 mm	65	75	100
加热长度 mm	550	700	900
炉子长度 mm	600	750	950
均温长度 mm	230	265	640
升温时间	45	45	90
选择单相电源	✓	✓	✓
两相或三相	✓	✓	✓
最大功率(W)	2000	3000	4500
重量 (kg)	25	28	35

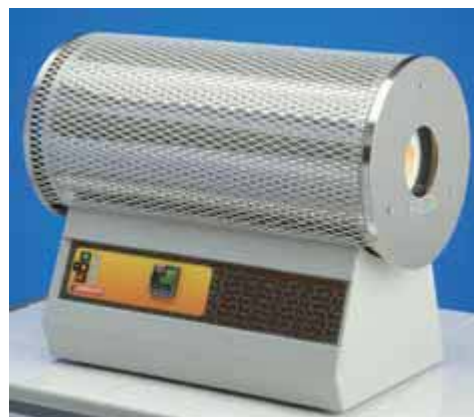

参数列表:

马弗炉型号	MTF9/15/130	MTF10/15/130	MTF10/25/130	MTF12/25/250	MTF12/38/250	MTF12/25/400
最高温度℃	900℃	1000℃	1000℃	1200℃	1200℃	1200℃
连续温度℃	800℃	900℃	900℃	1100℃	1100℃	1100℃
炉膛内经 mm	15	15	25	25	38	25
加热长度 mm	130	130	130	250	250	400
炉子长度 mm	180	150	150	300	300	450
均温长度 mm	30	30	45	60	90	100
升温时间	7	5	10	15	25	30
选择电源单相	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最大功率(W)	220	400	400	700	1000	1000
重量 (kg)	2	3	3	10	15	10