



先行者™ 珠宝天平



珠宝行业的专业天平 - 先行者™ 珠宝天平

奥豪斯公司新推出的先行者系列珠宝天平，可广泛应用于首饰制造、宝石研究、经营贸易等领域。根据不同的称量要求分为适用于珠宝钻石称量的高精度克拉天平和适用于贵金属称量的黄金天平，是一款为珠宝行业度身定做的专业型天平。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质及流畅大气的造型，更融入了最新的设计理念，充分考虑中国用户的需求。

- **中文操作面板** – 使操作更加简单便捷
- **背亮液晶显示屏** – 使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果
- **金属质感面板** – 专为珠宝天平设计，使您的称量尤显尊贵
- **前置式水平调节泡** – 方便操作者对天平进行水平调节
- **多组合式风罩** – 5 片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求
- **嵌入式多功能架** – 既能阻隔液体样品流出时对操作面板的影响，又可以搁置天平称量过程中可能会用到的器具
- **多种应用模式** – 包括计件称量和百分比称量
- **独特的应用功能：**
 - ◆ 多种称量单位 – 毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
 - ◆ 称量环境参数设置 – 零点跟踪和环境因素过滤，确保不同环境下的读数稳定
 - ◆ 优化的微小加样称量 – 采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度，使客户的加样量和天平的读数保持一致
 - ◆ 内置下秤钩 – 满足用户进行密度测定和其它特殊称量要求
 - ◆ 标配 RS232 通讯接口 – 方便连接打印机、电脑和其他外围设备
 - ◆ 选配第二显示器 – 可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取



先行者™ 珠宝天平

型号	CPJ303	CPJ603	CPJ1003	CPJ2003
量程(g)	60	120	200	400
可读性(g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001
重复性(g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001
线性误差(g)	0.0002	0.0002	0.0002	0.002
准确度级别	(I)	(I)	(I)	(II)
校准	自动外部校准, 配备砝码			自动外部校准, 选购砝码
秤盘尺寸(mm)	ø90	ø90	ø90	ø120
秤盘上方空间(mm)	180	180	180	180
外形尺寸(宽 x 高 x 长)(mm)	196x287x320	196x287x320	196x287x320	196x287x320

型号	CPJ812	CPJ2102	CPJ3102	CPJ4102
量程(g)	810	2100	3100	4100
可读性(g)	0.01	0.01	0.01	0.01
重复性	0.01	0.01	0.01	0.01
线性误差(g)	0.01	0.01	0.01	0.01
准确度级别	(II)	(II)	(II)	(II)
校准	自动外部校准, 选购砝码			
秤盘尺寸(mm)	160x160	160x160	160x160	160x160
秤盘上方空间(mm)	-	-	-	-
外形尺寸(宽 x 高 x 长)(mm)	196x92x320	196x92x320	196x92x320	196x92x320

智能的环境模式设置


环境滤波设置 - 根据操作环境中气流振动大小或者被称物的性质, 可进行高、中、低三种滤波设置。

自动稳零设置 - 环境的变化可能引起显示的漂移, 自动稳零设置可以保证即使环境有微小的变化, 天平仍然保持从0克开始称量。

丰富的应用模式

计件称量 - 此应用模式可计算单一重量物品的数量, 可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。先行者珠宝天平不仅具有标准计件功能还具有平均单件重量最优化功能。

百分比称量 - 此模式可用于比较混合样品重量和快速检重等。在该模式下, 先在秤盘上放上样品作为参考重量, 参考重量将显示为100%, 而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。

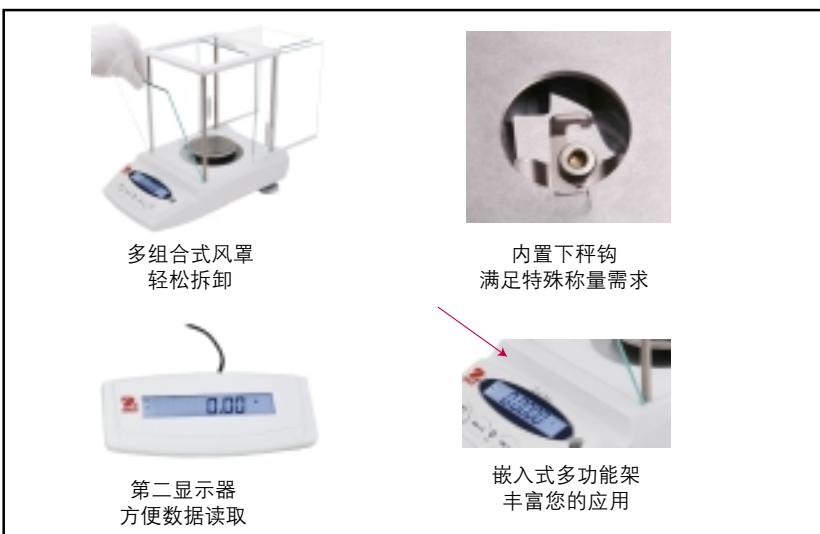

奥豪斯仪器(上海)有限公司
Ohaus Instruments(Shanghai) Co., Ltd.
地址: 上海市桂平路471号4幢4楼
邮编: 200233
电话: (021)64855408
传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com.cn>
客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

