



荣获2006年IBO便携式分析仪器工业设计银奖



通过ISO 9001:2000质量管理体系认证

多利斯 代表用户

墨西哥海关、中国农业大学、云南红云烟草集团、宁夏省博物馆、
Monsanto (孟山都)、Purina (普瑞纳)、Eli Lilly (礼来)、Nestle (雀巢)、Lonza (龙沙)、Novartis (诺华)、Unilever (联合利华)、
Westward Pharmaceuticals、CancerNova、Farma International、Mitsubishi (三菱)

德祥总部
香港九龙官塘鸿图道26号威登中心2602-05室
Tel: (852) 2759 2182
Fax: (852) 2758 3830
Email: info@tegent.com.cn

北京办事处
北京市海淀区知春路9号
坤讯大厦1506室 (100083)
Tel: (010) 8232 7383
Fax: (010) 8232 9551

成都办事处
成都市春熙路大科甲巷8号
利都广场7楼724-5室(610016)
Tel: (028) 8665 6745
Fax: (028) 8665 6744



上海办事处
上海市静安区北京西路1068号
银发大厦18楼 (200041)
Tel: (021) 5261 0159
Fax: (021) 5261 0122

广州办事处
广州市中山五路219号
中旅商业城1505室 (510030)
Tel: (020) 2227 3388
Fax: (020) 2227 3368

厦门办事处
厦门市后埭溪路28号
皇达大厦15楼A2BC(361004)
Tel: (0592) 5185 885
Fax: (0592) 5185 886

多利斯 Polychromix

手持红外分析仪器的领导者

www.polychromix-china.com



首台真正手持式红外分析仪，
为海关、安检行业提供货物快检解决方案：

- 近红外分析模式
- 安全的灯源
- 无损检测
- 集成电脑系统
- 彩色LCD显示屏
- 可充电锂电池
- 完整的生产工艺流程应用



美国多利斯Phazir CS手持式红外光谱分析仪

——海关、安检行业快速分析解决方案



多利斯(Polychromix)手持式红外分析仪是第一款使用在海关、安检行业的创新性手持式红外分析仪。Phazir CS的设计兼顾技术专家和非技术人员，其安全的红外光检测光源能保证人员只需接受简单培训就可以进行实时在线分析。

- 3秒钟内定性及定量分析
- LCD屏幕实时显示测试结果及光谱图
- 5分钟即可建立个性化模型库
- MEMS衍射光栅专利技术

具体应用

- 海关现场快速高效抽检或进出口检验
- 查处违禁药品的情况
- 查处进出口危险化学品
- 毒品和爆炸物把关
- 严防进出口的虚报货物
- 公共场所、大型活动安全情况排查
- 比如在现场为通关物品进行分类，防止石化油品，纺织品，药品等的虚报关税问题。



多行业数据库

多利斯爆炸物数据库包括: Acetone, AND, AN, AN+H2O, AN+TNT, ANFO, APC, B(OH)3+TNT, BENZENE, BNDP A/F, cellulose, CL-20, DADNE, DATB, DEGON, DMNB, DNAN, DNT, EDD, EGDN, EHN, GAP, GASOLINE, HMX, HNS, Hydrazine hydrate, IPN, ISOPHTHALIC ACID, KPIC, M/E NENA, MNT, NC, etc.

多利斯麻醉剂数据库包括: Acetyl pseudoephedrine, Benzocaine, Caffeine, Chlorpheniramine, Cocaine, Cocaine HCL(Reg.), Crack Cocaine, Diphenhydramine, Ephedrine HCl, Ephedrine sulfate, Ergonovine maleate, Ergotamine tartarate, Heliotropine, Heroin, Lactose, Lactose Hydrate, Lidocaine, Mannitol, Methamph.-X, Methyl Sulfone, Morphine, etc.

多利斯医药数据库包括超过287种原料包括: Acacia, Ace K, APAP, Arlacel, Ascorbic acid, Aspirin, Avicel Ceolous MCC, Avicel RC, Benadryl, Benzoic acid, Biotin, Butyl paraben, Caffeine, CaOH, CaPO4, Carnuba Wax, CaSO4, Cellacafate, Citric acid, Crosopidone, Cycloserine, Dextrose, Dextrose hydrate, Diclofenac, Dinithromycin, DM, EDTA, ethyl cellulose, FDC Blue, FDC Red, Fluoxetine, Fructose, Galactose, Gelatin, etc.

多利斯FeedME动物饲料库包括: bean flour, coffee, corn gluten, corn meal, cyanuric acid, feather meal, oat flour, poultry byproduct, poultry meal, rice flour, sorghum, soy powder, soy protein, vegetable protein, wheat chaff, wheat gluten, yeast flakes, acetaminophen and melamine. Contact Polychromix for a complete list of Materials.

多利斯纤维数据库包括: Acrylic, Cotton, Linen, Nylon, PET, Rayon, Silk, Wool, Rayon-PET, Silk-Cotton, Acetate-Rayon, Linen-Cotton, Wool-Nylon, PET-Rayon, Cotton-PET, Wool-Nylon, PET-Wool. Contact Polychromix for a complete list of Materials.

Phazir CS强大优异的仪器特性

- 可检测多种形态的样品: 固体(例如集装箱中货物等), 粉末, 液体, 胶体, 颗粒, 以及玻璃瓶装或塑料袋装样品。
- 适合于多种场合的应用: 实验室, 储藏室, 海关仓库等。
- 可以定性和定量分析实际通关的货物, 在现场即可为执法提供可靠的依据。




方法与方法生成


- Phazir可选内置数据库, 包括爆炸物, 麻醉剂, 医药, 动物饲料, 纤维多行业数据库。
- 独有的PMG方法生成器软件, 用户可重新建立或扩展自定义数据库。



定性定量检测

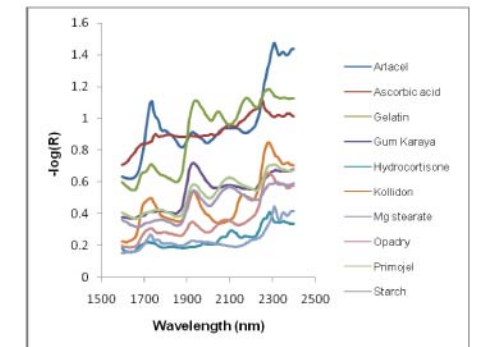

定性检测分析光谱曲线

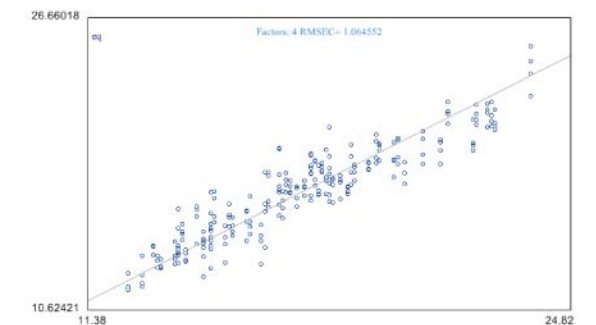

PLS-预计对比实际测量(4个因数)的标准曲线

简单明了的结果显示



实时结果显示(操作界面图)打印

Phazir先进的实时图谱打印功能, 可以得出详细完整的实验报告, 适合现场测试结果公布及追溯。

