



EFL 2000

理想的重型筛分机

筛分机

EFL 2000 系列强而有力
足以应付繁重任务和适
合工地使用.

- 操作简单
- 快速放开夹确保
了一致的夹紧压
力
- 低噪声水平
- 可放置200mm至
315mm直径筛网
- 装有防震脚
- 5 - 60分钟定时器
或连续设定



当分析重型或大量样品时, 需要一台
特别为这些任务制造的筛分机.

EFL 系列就是特别为重型样品而设计.
对重型样品表现同样出众, 配备了动
态动能装置, 对筛网和样品提供适当
的震动力量, 同时确保快速, 精确和重
复性高的测试. 最少的垂直活动, 样品
不会悬浮在空气中, 缩短了筛滤时间.
独特的振动动作可保持筛网上的细孔
清洁和不会被阻塞.

EFL筛分机有特别的固定工具, 筛网可
以稳固地固定但不会过紧, 而且筛网
可以快速更换.

定时器可以预先设定, 最长时间60分
钟或连续使用.

没有采用容易腐蚀的部件和非金属弹
簧, 使EFL免维护.

规格


直径: 510mm (手柄 2x35mm)
净重: 83kg
毛重: 106kg
电源: 230V 50Hz 485VA

使用 200mm 直径筛网

型号 EFL2000/1
高度不包括固定杆: 330mm
可放置盖和接收器和最多8个标准高度
或18个半高200mm(8")直径筛网.

使用250mm和300mm(12")直径筛网

型号 EFL2000/2
高度不包括固定杆: 330mm
可放置盖和接收器和最多7个标准高度
或12个半高300mm(12")直径筛网; 7个
标准高度250mm直径筛网; 或12个标准
高度, 24 半高200mm(8")直径筛网.

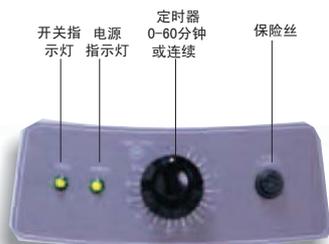

开关指 电源 定时器
示灯 指示灯 0-60分钟
或连续 保险丝



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港

电话: (852) 2391 7783
传真: (852) 2789 2068
电邮: info@kouhing.com

广州

电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海

电话: (021) 5854 0660
传真: (021) 5854 0663
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京

电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 5885 7248
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门

电话: (0592) 2086 227
传真: (0592) 2086 217
电邮: xiamen@kouhing.cn